

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: CHATTANOGA	VERSIÓN: 1
	MODELO: 2765CS	FECHA DE ELABORACIÓN: 02/04/2023

USO DEL EQUIPO



Equipo biomédico que utiliza corriente eléctrica para estimular zonas del organismo afectadas por el dolor nervioso, inflamaciones, músculos atrofiados y lesiones osteomusculares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica.
- No exceder los 60 minutos de tratamientos.
- No exceder los 25 Mc de pulso.
- No exceder los 43.3 C del cabezal del ultrasonido.
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo.

PARTES DEL EQUIPO


PARTE A:



PARTE A:

1. Panel de acceso trasero
2. Interfaz de usuario
3. Led indicador de acoplamiento
4. Aplicador de ultrasonido
5. Mando de intensidad
6. Gancho del cable conductor
7. Panel de acceso frontal
8. Botón para iniciar
9. Botón de pausa
10. Botón de terminar
11. Botón de biblioteca
12. Botón de pantalla de inicio
13. Botón de atrás
14. Puerto de tarjeta de datos
15. Botón de control de parámetros
16. Puerto para tarjeta MMC

PARTE B:

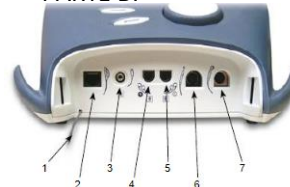

PARTE B:

1. Acollador
2. Conector de mando a distancia
3. Conector de interrupción
4. Conector de cable conductor 1
5. Conector de cable conductor 2
6. Conector de sonda microcorriente
7. Conector de aplicador ultrasonido.

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

MODO ELECTROTERAPIA:



1. Colocación de electrodos
2. Seleccione electroterapia y la forma de onda requerida
3. Ajuste el canal de terapia en caso de ser necesario
4. Edite los parámetros de la onda en caso de ser necesario
5. Conecte el cable de interruptor de paciente
6. Ajuste la intensidad de la forma de la onda
7. Pulse el botón de iniciar tratamiento
8. Pulse el botón de pausar tratamiento en caso de ser necesario
9. Guarde los datos del paciente

MODO ULTRASONIDO:



1. Preparación del paciente y uso conductivo
2. Seleccione el botón de ultrasonido y el tamaño del cabezal

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: UNIDAD DE ELECTROTERAPIA	CÓDIGO: NA
	MARCA: CHATTANOGA	VERSIÓN: 1
	MODELO: 2765CS	FECHA DE ELABORACIÓN: 02/04/2023

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

ALARMAS Y POSIBLES ERRORES



100 Sobrecorriente	Revise que los accesorios se encuentren bien conectados y estén en buen estado
102 Mal contacto	Asegúrese que los electrodos y los cables conductores estén haciendo buen contacto con la zona de tratamiento
104 Protocolo en blanco	Introduzca el nombre del protocolo a realizar

MODO COMBINADO:

1. Coloque los electrodos en el paciente y conecte el ultrasonido al equipo
2. Seleccione el botón de terapia combinada
3. Seleccione el botón de editar
4. Edite los parámetros de la opción de la terapia de ultrasonido
5. Seleccione la forma de la onda
6. Conecte el cable de interruptor de paciente
7. Pulse el botón Editar Stim, para editar los parámetros de forma de la onda
8. Ajuste la intensidad de la forma de la onda
9. Seleccione el botón editar ultrasonido y ajuste la intensidad del mismo
10. Seleccione el botón de iniciar tratamiento
11. Seleccione el botón de pausar tratamiento en caso de ser necesario
12. Seleccione el botón de terminar tratamiento
13. Guarde los datos del paciente

MODO DE BIBLIOTECA DE RECURSOS CLÍNICOS:



1. Seleccione el botón de biblioteca de recursos, el cual hace referencia al ítem 11
2. Seleccione el botón de protocolos clínicos
3. Seleccione la zona del cuerpo deseada para la terapia
4. Seleccione la indicación clínica de terapia deseada
5. Seleccione la situación patológica
6. Seleccione la gravedad patológica
7. Preparación del paciente
8. Edición de los parámetros iniciales de modalidad en caso de ser necesario y repita los pasos del modo seleccionado respectivamente

3. Seleccione el botón de editar parámetros en caso de ser necesario
4. Ajuste el canal de terapia en caso de ser necesario
5. Seleccione modalidad de ultrasonido y deje pulsado el botón de calentamiento de cabezal hasta que se encienda el icono
6. Esperar aproximadamente 2 minutos que el cabezal caliente
7. Ajuste la intensidad del ultrasonido
8. Seleccione el botón de iniciar tratamiento
9. Seleccione el botón de pausar tratamiento en caso de ser necesario
10. Seleccione el botón de terminar tratamiento cuando sea necesario
11. Guarde los datos del paciente

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIA de riesgo moderado.