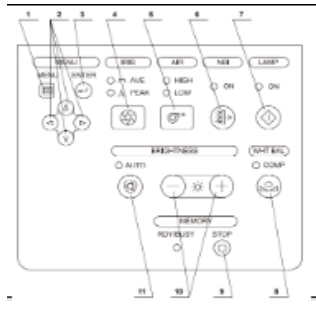


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA	MES	AÑO
				2	01	2024
Nombre del equipo:	VIDEOPROCESADOR	Modelo:	CV-170		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	OLYMPUS	Clasificación del equipo:				DIAGNOSTICO
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		PARTES DEL EQUIPO		
 El Optera Procesador de vídeo CV-170 ofrece una calidad de imagen HDTV y NBI (Imagen de banda estrecha). Es un equipo compacto funciona como Videoprocesador y fuente de luz al tiempo.		La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.				
		PASOS DE OPERACIÓN		1. Tecla del menu 2. Teclas de selección 3. Tecla de enter 4. Tecla para cambiar el modo iris 5. Tecla para controlar el aire suministrado al endoscopio 6. Tecla de selección del modo de observación 7. Tecla para encender/apagar la lampara 8. Tecla de balance de blancos 9. Tecla de detección de acceso		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		1. Ubique el equipo, confirme que el equipo esta apagado y conecte el cable de alimentacion. 2. Conecte el endoscopio en el puerto de la parte central inferior. 3. Conecte la otra parte del endoscopio el conector electrico como se muestra en la siguiente imagen.				
Potencia de Alimentación		4. Oprima el boton de encendido del videoprocesador. Verifique que el led indicador encienda.		Descripción de la irregularidad		
Voltaje: 100 – 240 VAC		5. Verifique que la imagen diagnostica se muestra en el monitor.		El endoscopio no emite ninguna luz.		
Frecuencia: 50 - 60HZ		6. Verifique que la luz sea emitida por el extremo distal del endoscopio.		Posible causa		
Tamaño		7. Presione los botones de ajuste de brillo para disminuir y aumentar la intensidad de la luz, hasta encontrar el nivel adecuado para la observación.		El endoscopio o el cable de la guía de luz no están conectados al conector de salida.		
Dimensiones: 295 (An.) x 145 (Al.) x 425 (Pr.) mm		8. Si requiere utilizar la bomba de aire, oprima el botón AIR. Verifique que sale aire por el orificio inferior del Slot de salida. Presione nuevamente este botón para realizar el cambio entre ON, LOW, HIGH, OFF.		solucion		
Peso: 11 kg		9. Cuando finalice el procedimiento apague el videoprocesador y el monitor.		Conecte el endoscopio de forma segura a la toma de corriente		
Salida de señal HDTV analógica		10. Desconecte el endoscopio		La imagen endoscópica permanece congelada.		
Se podrá seleccionar la salida RGB (1080/60i) o la YPbPr (1080/60i).				La imagen endoscópica se congela.		
Salida de señal SDTV analógica				Pulse la tecla "FREEZE" (Congelar) en el teclado para restablecer la imagen en vivo.		
VBS compuesta (480/60i: NTSC), Y/C (480/60i: NTSC), y RGB (480/60i: NTSC); salidas simultáneas posibles.						
Salida de señal digital						
SDI (HD-SDI o SD-SDI)						
DVI (puede seleccionarse WUXGA, 1080P o SXGA)						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						