

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: NEUMOINSUFLADOR	CÓDIGO: NA
	MARCA: KARL STORZ	VERSIÓN: 1
	MODELO: 269320	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO



Dispositivo médico que utiliza Co2 por medio de una sonda para expandir áreas para facilitar las cirugías de laparoscopia, el funcionamiento se basa en expandir y disminuir flujos y presiones dentro de las cavidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Caudal de 30 L/m
- Calefacción de gas integrada
- Rango de presión de 1-30 mm HG

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS




Clasificación IIB de alto riesgo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%, la manguera de calentamiento se esteriliza normalmente en autoclave hasta 100 veces.

PARTES DEL EQUIPO

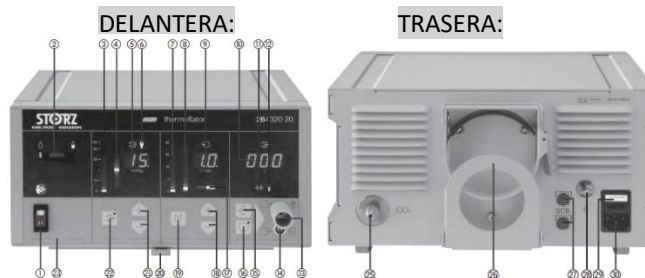

DELANTERA:

1. Botón de ON/OFF
2. Indicador de reserva de gas
3. Indicador de presión real
4. Indicador de valor de presión nominal
5. Valor en pantalla de presión real
6. Indicador de funcionamiento
7. Indicador de valor real de flujo de gas
8. Indicador de valor nominal de flujo de gas
9. Valor en pantalla de flujo de gas
10. Valor en pantalla de consumo de CO2
11. Indicador de funcionamiento de válvula de descarga
12. Indicador de funcionamiento de elemento térmico
13. Conexión de insuflación hacia el paciente
14. Conexión para elemento térmico
15. Botón RESET
16. Botón START/STOP de insuflación
17. Indicador de funcionamiento de flujo
18. Botones para aumentar o disminuir valor nominal de flujo

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Encienda el equipo
2. Conecte el CO2 al suministro de gas trasero
3. Abra la tubería de CO2
4. Verifique que el equipo supere el test automático de encendido
5. Verifique el encendido de los indicadores de AC y funcionamiento
6. Verifique que la presión del gas nominal se encuentre llene o con la presión suficiente para el procedimiento
7. Conecte el tubo de insuflación al filtro de gas de CO2

MODO DE FLUJO INTERMITENTE:



1. Presione la tecla M y verifique que el indicador de funcionamiento se encienda
2. Ajuste los valores deseados de flujo de gas

PRESELECCIÓN DE PRESIÓN NOMINAL:



1. Seleccione el valor de presión nominal entre 1-30 mm HG
2. Verifique que el valor de la presión visualizado en pantalla sea el deseado.

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: NEUMOINSUFLADOR	CÓDIGO: NA
	MARCA: KARL STORZ	VERSIÓN: 1
	MODELO: 269320	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

TEST DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

1. Asegúrese que el suministro de gas esté conectado y abierto
2. Encienda el equipo del botón de ON/OFF
3. Verifique que el equipo supere su auto test de encendido
4. Conecte el dispositivo con un filtro hidrófobo, un tubo de insuflación y una cánula
5. Seleccione la presión nominal a 15 mm HG y caudal de gas de 1
6. Pulse el botón RESET y verifique que en la pantalla aparece 0.0
7. Pulse el botón de START
8. Verifique que el equipo insufla
9. Verifique que aparece en pantalla el mensaje "oclusión" presión real=0 y caudal=0
10. Pulse el botón STOP y retire la cánula y ocluya el tubo de insuflación para verificar posibles fugas en los circuitos

19. Botón M para modos de conmutación de flujos
20. Compartimento de instrucciones
21. Botón de aumentar o disminuir valor nominal de presión
22. Botón para inicialización de insuflación
23. Tarjeta de identificación
24. Elemento térmico

TRASERA:

25. Conector para gas CO2
26. Soporte para botella de CO2
27. Conexiones SCB
28. Conexión equipotencial
29. Fusibles de la red
30. Conexión de red AC

POSIBLES ALARMAS Y ERRORES



Gas insuficiente	Verifique que el cilindro de CO2 se encuentre cargado para su correcto funcionamiento y verifique el estado del indicador de consumo de gas.
Oclusión	Verifique que no hay oclusión en el tubo de insuflación o la cánula
Contaminación	El tubo de insuflación tiene líquido.

CONEXIÓN DEL TUBO DE GAS CALENTADOR:

1. Conecte el filtro y el tubo de calefacción
2. Conecte el enchufe del tubo calentador con la conexión de calefacción de gas
3. Conecte el tubo de insuflación a la conexión de la cánula.
4. Seleccione el botón de START para calentar automáticamente el gas



INICIO DE INSUFLACIÓN:



1. Seleccione la tecla de START para iniciar insuflación
2. Verifique que el valor de consumo de gas que aparece en pantalla sea el deseado
3. Verifique que el valor de caudal real que aparece en pantalla sea el deseado.