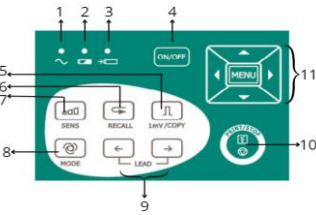


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>9</td> <td>MES</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2024</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	9	MES	09	AÑO	2024	
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	9	MES	09														
AÑO	2024																
Nombre del equipo:	Electrocardiógrafo	Modelo:	SE-3	Riesgo del equipo:	IIA												
Marca:	EDAN			Clasificación del equipo:	Apoyo diagnóstico												
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PANEL DE CONTROL													
 Es un electrocardiógrafo de 3 canales con 12 derivaciones representadas simultáneamente, menú gráfico, parámetros ECG y electrocardiograma. El ECG de 3 canales se puede visualizar en la pantalla simultáneamente. Se puede registrar con una impresora térmica de alta calidad. Se puede elegir convenientemente entre la función de impresión automática, de registro rítmico y USB. Se puede utilizar la fuente de energía de red o la batería de litio recargable interna.		 -Pantalla LCD: La pantalla LCD tiene 2 especificaciones: Pantalla LCD de 320x240 puntos de color simples o pantalla LCD de 192x64 puntos de color simples. -Enchufe hembra del cable paciente e interfase deseñal: Hay enchufes hembras sobre el lado derecho de la unidad central que incluyen los del cable paciente, RS232, salida/entrada externa e		 1. Luz de fuente de energía principal (conectado a corriente). 2. Luz indicadora de batería. 3. Luz indicadora de recarga de la batería. 4. Encendido/ Apagado. 5. Tecla 1mV/COPY: Se puede presionar para traer a la pantalla el electrocardiograma grabado la última vez en la función AUTO. 6. Tecla de consulta de memoria: Revisar los registros del paciente que estén guardados. 7. SENS (tecla de cambio de sensibilidad): Control automático de ganancia. 8. MODE (tecla de cambio de función): AUTO (automática), MANU (manual), Ritmo, ImpUSB y Desac (apagada). 9. LEAD (tecla de cambio de derivación): En la función MANU. 10. Tecla PRINT/STOP (de impresión y detención): Se utiliza para comenzar y detener la grabación. 11. Tecla MENU: Ingresar ajustes de menú.													
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Dimensiones: 288mm×210mm×70mm 2. Peso: Cerca de 2,5 Kg 3. Pantalla: -Pantalla LCD de 320x240 puntos de color simple. -Pantalla LCD de 192x64 puntos de color simple. 4. Fuente de energía de red: -Voltaje de entrada medida =100V~115V/220V~240V -Frecuencia medida = 50/60Hz -Fuente de energía de red Potencia de entrada medida= 35VA 5. Batería de litio interna -Voltaje medido= 14.4V -Capacidad medida = 1600 mAh -Función de cambio: Voltaje/corriente constante Fuente de energía. -Corriente de carga (estándar) = 0.2C5A (320mA).		 1. Conexión de equipotencialidad: Ofrece una conexión entre la unidad y la barra de tierra de la instalación eléctrica cuando sea necesario. 2. Enchufe hembra de la fuente de energía de red. -FUENTE CA: Enchufe hembra de la fuente de energía alterna. 3. Interruptor de encendido : Encendido/ Apagado		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. Nota: Siempre desconecte el equipo.													
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																	
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																	

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
				9	09	2024		

Nombre del equipo:	Electrocardiógrafo	Modelo:	SE-3	Riesgo del equipo:	IIA	
Marca:	EDAN			Clasificación del equipo:	Apoyo diagnóstico	

CONEXIÓN DEL CABLE PACIENTE	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	FUNCIÓN MANUAL
 Enchufe el conector del cable principal al enchufe hembra del cable paciente sobre el lado derecho de la unidad de acuerdo a la dirección de la flecha en el enchufe y luego	1. Presione primero el interruptor de encendido sobre el lado izquierdo de la unidad mientras se utiliza la fuente de energía de red y la luz indicadora de la fuente de energía principal se encenderá. Entonces presione la tecla ON/OFF en el panel de control para encender la unidad. Luego de la revisión automática se mostrará en la pantalla LCD la información del equipamiento como el fabricante, nombre del dispositivo, número de versión y dirección de Internet. Luego el SE-3 esta listo para el examen y el registro. 2. Cuando utilice la batería de litio recargable interna presione directamente la tecla ON/OFF en el panel de control para encender la unidad y luego el indicador de batería se encenderá. Luego de la revisión automática el SE-3 esta listo para el examen	Hay 12 derivaciones divididas en cuatro grupos, y hay tres derivaciones en cada grupo. El usuario puede determinar que grupo de derivaciones necesita grabarse y elige los parámetros de grabado de acuerdo a esto. Método de operación: 1. Presione la tecla MODE para elegir la función MANU. 2. Presione la tecla izquierda o derecha LEAD para seleccionar las 3 derivaciones de la grabación. 3. Presione la tecla MENU para ingresar a la ventana de parámetros de REGIS para elegir los ajustes de grabado u otros parámetros. 4. Presione la tecla PRINT/STOP para comenzar el registro. 5. La tecla ImV/COPY se puede presionar para imprimir la marca Imv en el registro mientras se graba el registro ECG. 6. Presione la tecla PRINT/STOP para detener la grabación después de finalizar el registro del ECG.
INSPECCIÓN PREVIA DE FUNCIONAMIENTO 1. Ambiente: Verifica que no haya interferencias electromagnéticas cerca del equipo, especialmente equipos médicos grandes como electroquirúrgicos y de resonancia magnética 2. Fuente de energía: Asegúrate de que el cable de alimentación esté bien conectado y utiliza una toma de corriente con puesta a tierra. Recarga la batería si está baja antes de usar el equipo. 3. Cable del paciente: Verifica que el cable del paciente esté bien conectado a la unidad y mantenlo alejado del cable de alimentación. 4. Electrodo: Confirma que todos los electrodos están correctamente conectados según los identificadores y colores. Asegúrate de que los electrodos precordiales de succión no se toquen entre sí. 5. Papel del documentador: Verifica que haya suficiente papel de registro y que esté cargado correctamente. 6. Paciente: Asegúrate de que el paciente no esté en contacto con objetos conductores y que esté tibio, relajado y respirando calmadamente.	FUNCIÓN AUTOMÁTICA Cuenta con la función de grabación automática. Se lista el orden de cambio de las derivaciones en las diferentes funciones. Hay 12 derivaciones divididas en cuatro grupos, y hay tres derivaciones en cada grupo. Los grupos líderes se cambiarán en orden, automáticamente mientras se registra el ECG y si se ha finalizado esta grabación de señal de grupo de derivaciones, se cambiará automáticamente al próximo grupo de derivaciones y comenzará la grabación. Método de operación: 1. Presione la tecla MODE para elegir la función automática. 2. Presione la tecla PRINT/STOP para comenzar el registro. Sin embargo, cuando se comienza la grabación más tarde, el ECG se grabará en orden desde el primer grupo de derivaciones otra vez.	RHYTHM MODE (FUNCIÓN DE RITMO) El usuario puede grabar 60 segundos de la derivación de ritmo en forma de onda en el ECG. 1. Presione la tecla MENU para ingresar a la ventana de ajustes REGIS para elegir Derivacionritmo u otros ajustes. Presione nuevamente para volver después de la configuración. 2. Presione la tecla MODE para elegir la función Ritmo. 3. Presione la tecla PRINT/STOP y aparecerá el mensaje "Muestreo" en el campo de información y al mismo tiempo se contará el tiempo de respuesta. Cuando el tiempo de respuesta alcance los 60 segundos comienza a grabar. 4. Se detendrá automáticamente después de registrar un ECG de la derivación de ritmo completo en forma de onda. Al presionar la tecla PRINT/STOP nuevamente durante el curso del registro se puede detener la grabación.

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:	
1. Definición de uso del equipo:	En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
2. Especificaciones técnicas:	En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
3. Partes del equipo:	Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
4. Modos de operación del equipo:	En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
5. Limpieza y desinfección:	En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
6. Alarmas y posibles errores:	Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
7. Pasos de operación del equipo:	Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.