

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo García E.S.E.	 Universidad AUTÓNOMA de Occidente	 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
			EQUIPO: CAMINADORA	CÓDIGO: NA
			MARCA: SCIFIT	VERSIÓN: 1
			MODELO: AC5000	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2022

USO DEL EQUIPO



Dispositivo que se utiliza para realizar distintos tipos de entrenamientos con distinta intensidad, intervalos y modos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




- La toma de corriente no debe compartirse con ningún otro equipo.

-No modifique el enchufe suministrado con el producto.

-Conecte adecuadamente el equipo al receptáculo como se muestra en el diagrama:

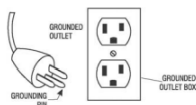

PARTES DEL EQUIPO

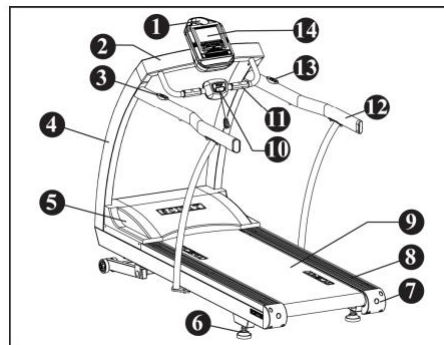

Partes delanteras del equipo:

1. Porta botellas de agua.
2. Soldadura central.
3. Interruptor de elevación.
4. Marcos verticales izquierdo y derecho.
5. Cubierta del motor.
6. Zapatas de nivelación.
7. Tapas finales izquierda y derecha.
8. Cubiertas de rieles laterales.
9. Cinturón de paseo.
10. Parada de emergencia.
11. Contacto Ritmo cardíaco.
12. Rieles de mano extendidos (sólo ACM).
13. Interruptor de velocidad.
14. Consola Intelli-Fit.

ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO



1. Si siente alguna molestia física suspenda el ejercicio.
2. Conecte el equipo únicamente a una toma de corriente dedicada y debidamente conectada a tierra.
3. Desenchufe el equipo inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo.
4. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Para realizar cualquier ajuste durante su entrenamiento, PARE la máquina y realice los ajustes necesarios.
6. No utilice el dispositivo si tiene un cable o un enchufe dañado.
7. Mantenga el cable de poder alejado de las superficies calientes y del mecanismo de elevación.
8. No utilice el aparato con las aberturas de aire bloqueadas.
9. No introduzca nunca ningún objeto en ninguna abertura.
10. No utilizar en el exterior, en lugares donde se utilicen productos en aerosol o en un entorno rico en oxígeno.
11. La conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica.
12. Para desconectar, apague el interruptor y desenchúfelo del receptáculo.

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Evaristo García E.S.F.	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: CAMINADORA	CÓDIGO: NA
	MARCA: SCIFIT	VERSIÓN: 1
	MODELO: AC5000	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2022

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 	PROGRAMAS DEL EQUIPO	RECOMENDACIONES GENERALES
1. Conecte el equipo al receptáculo. 2. Ubíquese en el equipo, la posición más segura es con los pies en cada marco lateral superior a horcajadas sobre la cinta de correr. 3. Súbase a la cinta de correr después de haber puesto en marcha la cinta de correr para evitar lesiones. 4. Para equilibrarse, mire al frente y sujétese a la barra lateral o al manillar. 5. Asigne el programa de entrenamiento a convenir. 6. Ubique el sistema de parada de emergencia en la ropa a la altura del torso. 7. Realice el entrenamiento. 8. Al finalizar para evitar molestias, reduzca la velocidad antes de bajarse. 9. Desconecte el equipo.	 Manual de inicio rápido: Permite al usuario definir la velocidad o la elevación a un ajuste deseado. Este ajuste no cambiará.  Control de la frecuencia cardíaca (fc): Ajusta automáticamente la inclinación de la cinta de correr en respuesta a los cambios en la fc.  SCIFIT: Ofrece varios programas con perfiles de velocidad y elevación, o cambios durante el programa. SISTEMA PARADA DE EMERGENCIA  Está diseñado para detener la cinta de correr rápidamente en situaciones de emergencia tirando del imán del panel de control. Si se cae o resbala hacia atrás durante el entrenamiento, el imán se separará del panel de control y la cinta de correr se detendrá.	1. Mantenga las manos y los dedos alejados de todas las zonas que puedan causar lesiones, como los rodillos delanteros y traseros. 2. Nunca coloque la parte trasera de la cinta de correr cerca de un obstáculo. 3. No coloque nunca ninguna sustancia debajo de la cinta de correr de la cinta. 4. No derrame ningún líquido sobre la cinta de correr. 5. No supere el peso establecido por el fabricante (el peso máximo del usuario es de 220 kg o 450 libras). CLASIFICACIÓN DE RIESGO  Clasificación I de Riesgo bajo. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO  La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.