

CALENTAMIENTO PACIENTE

WARM TOUCH NELLCOR

- 1** Calentador electrónico encargado de suministrar aire caliente a una manta térmica. Con el fin de tratar o evitar hipertermia en pacientes adultos o infantiles.

2 **TERAPIA PERSONALIZADA**



La terapia debe ser totalmente personalizada y por ello el médico debe seleccionar el rango de temperatura al inicio de la terapia de calentamiento de cada paciente.


3 **PARTE FRONTAL**

1. Manguera
2. Interruptor de alimentación
3. Boquilla
4. Cable eléctrico
5. Reloj
6. Panel de control



3 **PARTE TRASERA**

1. Puerto prueba de sobrecalentamiento
2. Etiqueta con instrucciones
3. Abrazadera del carro del calefactor
4. Etiqueta de advertencia
5. Cubierta del filtro
6. Soporte del gancho para la cama
7. Correa de la boquilla con gancho

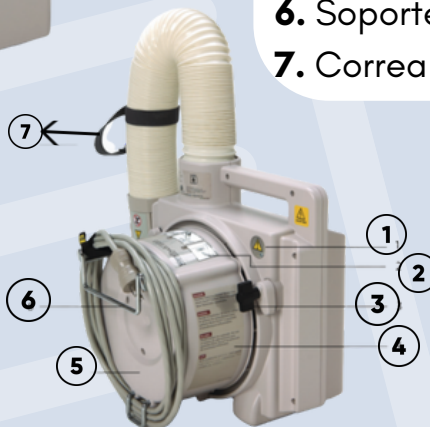

PANEL DE CONTROL

Indicador de alarma con botones para seleccionar temperatura deseada 32°C, 38°C, 43°C y 45°C



ALARMAS

- Alarma de encendido/falla de energía
- Alarma de sobrecalentamiento

ADVERTENCIA

- Si la manguera del sistema de calentamiento entra en contacto con el paciente, pueden producirse lesiones por calor.
- Controle la temperatura del paciente en forma constante. Reduzca la temperatura del aire o interrumpa la terapia cuando el paciente alcance una temperatura normal.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

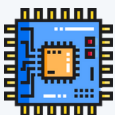

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.

ADVERTENCIA



Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos