

ASPIRADOR YX930D



1

Equipo biomédico encargado de succionar secreciones en la vía aérea, lo hace a partir de vacío. Posee una alta velocidad de flujo y un bajo nivel de contaminación



2

COMPONENTES

1. Regulador de succión
2. Interruptor de encendido y apagado
3. Vacuómetro
4. Filtro hidrofóbico
5. Válvula anti retorno
6. Recipientes



3

MODO DE USO

Antes de poner a prueba el funcionamiento del equipo, verificar que todos los elementos estén en el lugar adecuado, especialmente la válvula anti retorno, verifique que el sello de color negro se encuentre hacia arriba.

Posterior a esto conecto el equipo a la red eléctrica y encender (2), se debe posicionar la manguera de succión en el área deseada, una vez esté ubicada regular la succión con el regulador (1).



4

ACCESORIOS

1. Cánula de succión para cavidad abdominal
2. Manguera de succión
3. Filtro de aire
4. Fusible
5. Pedal.



IMPORTANTE

Desinfectar el material de los frascos, se debe realizar sumersión en solución desinfectante.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1

PREPARAR LIMPIADOR

Klorkleen + Vital Care

1. Realizar solución limpiadora dependiendo de la cantidad deseada:



Para 1 pastilla agregar 1 Litro de agua

Para 1/2 pastilla agregar 500 ml de agua

2. En el recipiente de Vital Care con las toallitas, aplicar la solución desde el centro hacia la periferia.

3. Tapar el balde y rotularlo

4. Esperar 20 minutos



2


PARA LIMPIAR EQUIPOS BIOMÉDICOS



Verifique que el equipo esté desconectado, que no tenga cables pelados o puntos de riesgo eléctrico.



Tomar un pañito de Vital Care preparado con Klorkleen y limpiar la superficie del equipo, incida de zonas de difícil acceso.

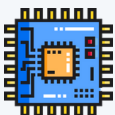

A la hora de realizar la limpieza tener cuidado con tarjetas o componentes electrónicos.



ADVERTENCIA

Inhalación

Ingestión

Contacto con la piel

Contacto con los ojos