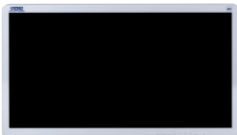
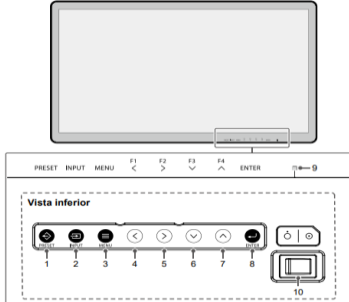
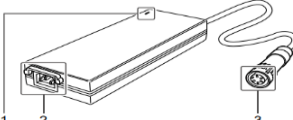
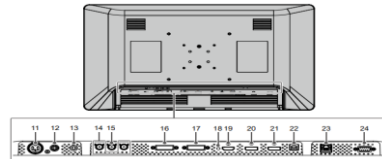
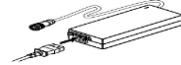
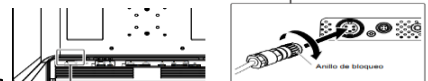
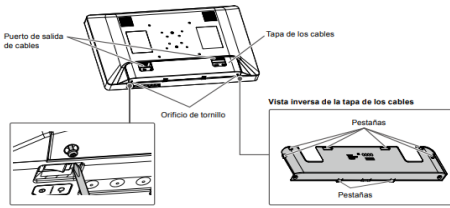
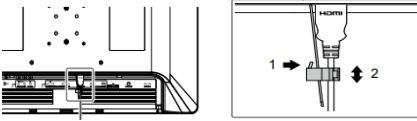


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001												
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>28</td> <td>MES</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2024</td> </tr> </table>		PAGINA	01	DE	01	DÍA	28	MES	08	AÑO	2024	
PAGINA	01	DE	01												
DÍA	28	MES	08												
AÑO	2024														
Nombre del equipo:	PANTALLA GRADO MÉDICO	Modelo:	TM343	Riesgo del equipo:	I										
Marca:	KARL STROZ	Clasificación del equipo:			No aplica										
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		CONTENIDO DEL PAQUETE		PARTES DEL EQUIPO (FRONTAL)											
 Este producto está pensado para visualizar imágenes médicas, por ejemplo, imágenes de cirugía endoscópica. Se obtienen imágenes médicas de gran calidad y alta resolución.		- Monitor - Cable de alimentación - Adaptador de CA (AHM250PS48T) - Tapa de los cables (con tornillos) - Tornillos de fijación del monitor - 4 tornillos tipo M4 - 4 tornillos tipo M6													
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		PARTES DEL ADAPTADOR CA													
- Diagonal de pantalla: 32" - Tipo de monitor: Monitor 4K - Resolución: 3840 x 2160 Pixel - Relación de aspecto: 16:9 - Relación de contraste: 1350:1 - Luminosidad: 700 cd/m² - Ángulo máx. de visualización horizontal: 178° - Salida DC: 5V / 1A - RS-232C: 1 - Tensión de trabajo: 100 – 240 VAC - Frecuencia de red: 50/60 Hz - Anchura: 760,8 mm - Altura: 463,8 mm - Profundidad: 91,6 mm - Peso: 13,2 kg - Soporte de fijación VESA: 100 x 100 mm, 200 x 200 mm - Tipo de fuente de alimentación: Alimentación externa - Potencia absorbida: 153 W		 - Indicador de alimentación principal: Según el estado operativo de la alimentación eléctrica principal, el indicador del adaptador de CA se enciende o se apaga. Iluminado: Encendido, No iluminado: Apagado - Terminal AC IN: Conecta el cable de alimentación. - Terminal DC OUT: Conecte el terminal DC IN en el monitor.													
		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN													
		Se recomienda realizar una limpieza periódica para mantener el monitor como nuevo y prolongar su vida útil. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		- Botón (PRESET): Muestra el menú predeterminado. - Botón (INPUT): Muestra el menú de selección de entrada. - Botón (MENU) : Muestra el menú principal. - Botón (F1); 5. Botón (F2); 6. Botón (F3) ; 7. Botón (F4) : Ejecuta la función asignada a este botón. Selecciona elementos en la pantalla de menú. - Botón (ENTER): Selecciona elementos en la pantalla de menú. - Indicador de alimentación: El color del indicador varía según el estado operativo del monitor. -Verde: Modo de funcionamiento normal. -Naranja: En el modo de ahorro de energía. -Apagado: Apagado. - Interruptor de alimentación: Enciende o apaga la unidad. : Encendido, Apagado.											
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:															
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.															
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica															
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo															
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.															
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.															
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas															
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.															

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012		
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01 DÍA MES AÑO 28 08 2024	
			FECHA DE EMISIÓN:		
Nombre del equipo:	PANTALLA GRADO MÉDICO	Modelo:	TM343	Riesgo del equipo:	I
Marca:	KARL STROZ			Clasificación del equipo:	No aplica
PARTES DEL EQUIPO (POSTERIOR)		CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN		INSTALACIÓN DE LA TAPA DE LOS CABLES	
 11. Terminal DC IN: Conecta el terminal DC OUT en el adaptador de CA. 12. Terminal DC OUT: Se utiliza para suministrar alimentación de 5 V a un dispositivo periférico. 13. Terminal (equipotencial): Este terminal se usa para equalizar la tensión potencial entre los equipos. 14. Terminales de entrada SDI 1/2 (tipo BNC): Se conectan desde los dispositivos con un terminal de salida SDI. 15. Terminal de salida SDI (tipo BNC): La señal enviada al terminal de entrada SDI 1 se envía tal cual. 16. Terminal de entrada DVI-D: Se conectan desde los dispositivos con salida DVI-D. 17. Terminal de salida DVI-D: La señal enviada al terminal de entrada DVI-D se envía tal cual. 18. Soporte de cable HDMI: Sujeta el cable HDMI que se conecta al monitor. 19. Terminal de entrada HDMI: Se conecta desde los dispositivos con salida HDMI. 20. Terminal de entrada de DisplayPort: Se conecta desde los dispositivos con salida DisplayPort. 21. Terminal de salida DisplayPort: La señal enviada al terminal de entrada DisplayPort se envía tal cual. 22. Terminal USB. 23. Terminal Ethernet: Controla este producto conectándolo a una red. 24. Terminal RS-232C: Controla este producto conectándolo a un dispositivo externo.		1. Conecte el cable de alimentación del terminal AC IN en el adaptador de CA. Inserte completamente el cable de alimentación.  2. Conecte el terminal DC OUT del adaptador de CA al terminal DC IN en el monitor. Alinee la forma del conector con la forma del puerto, gire el anillo de bloqueo en sentido horario y fíjelo de manera segura.  3. Conecte el cable de alimentación del adaptador de CA y conecte el enchufe en la toma de corriente.		1. Alinee la tapa de los cables en la parte posterior del monitor de modo que los cables puedan pasar a través del puerto de salida de cables. 2. Inserte las pestañas de la tapa de los cables en las ranuras del monitor. 3. Apriete los tornillos de los orificios izquierdo y derecho de la parte inferior del monitor. 	
		CONEXIÓN DE LOS CABLES		ENCENDIDO	
		1. Gire la palanca del portacables para HDMI hacia abajo. 2. Ajuste la posición de sujeción.  3. Cierre la abertura del portacables para HDMI.  * Asegúrese de que el cable HDMI esté bien sujeto.		1. Encienda el interruptor de alimentación en la parte inferior del monitor y, a continuación, encienda el monitor. El indicador de alimentación de la parte delantera del monitor se enciende de color verde. Sino se visualiza ninguna imagen: -Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente. -Compruebe que el terminal DC OUT y el terminal DC IN estén conectados correctamente. -Encienda el interruptor de alimentación. -Compruebe que el indicador de alimentación principal del adaptador de CA esté encendido. -Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla.	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					