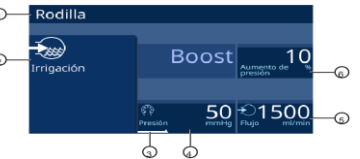
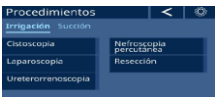
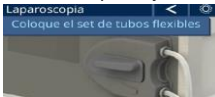
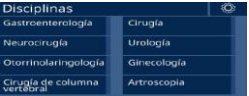


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001		PAGINA 01	DE 01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA 29 MES 08 AÑO 2024	AÑO 2024
Nombre del equipo:	Bomba de irrigación	Modelo:	UP220	Riesgo del equipo:	IIA	
Marca:	ENDOMAT SELECT			Clasificación del equipo:	Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PANTALLA TÁCTIL		
 El ENDOMAT SELECT es una bomba de rodillos para la irrigación o aspiración de líquidos durante intervenciones diagnósticas y quirúrgicas. Los distintos módulos de software permiten su aplicación en una disciplina específica, así como en casos multidisciplinarios. El sistema ofrece diversos paquetes de software que el usuario puede elegir y combinar de forma individual.		VISTA FRONTAL  - Tecla Standby - Pantalla táctil TFT - Palanca de bomba (palanca de enclavamiento del cartucho) - Barrera de luz		 - Nombre de la disciplina - Inicio/parada irrigación/aspiración - Indicación irrigación/aspiración - Limitación de presión - Límite de flujo - Aumento de refuerzo de la presión Indicación irrigación o aspiración La función de succión o irrigación está activada: –Valor real: Raya anaranjada –Valor nominal: Marca blanca		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		VISTA POSTERIOR		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
Función de la bomba: Bomba de irrigación o aspiración Tipo de aparato: Bomba peristáltica Tensión de trabajo: 100 – 240 VAC Anchura: 370 mm Altura: 124 mm Profundidad: 305 mm Peso: 5,9 kg Frecuencia de red: 50/60 Hz Comunicación entre dispositivos USB: No Clase de protección eléctrica: Clase de protección 1 Grado de protección: CF Manejo a través de la pantalla táctil: Sí Desinfección por frotado: Sí Pantalla: Pantalla TFT Conector para sistemas externos: 2 Potencia absorbida: 82 VA Conector para interruptor de pedal: 2		 - Conector Link, p. ej., para Calcusion - Interfaz USB para servicio - Interfaz Ethernet (KARL STORZ HIVE) para servicio y UNIDRIVE Select - Conector, p. ej., para el interruptor de pedal - Conexión equipotencial - Conector a la red		La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		
				SET DE TUBOS DESECHABLES		
				Estos son los tubos desechables que se deben de utilizar en cada procedimiento: 		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012		
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01	
			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 29 MES 08 AÑO 2024	
Nombre del equipo:	Bomba de irrigación	Modelo:	UP220	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	ENDOMAT SELECT			Clasificación del equipo:	Diagnóstico
MODOS DE SERVICIO		SELECCIÓN DE DISCIPLINA Y PROCEDIMIENTO		CAMBIAR PROCEDIMIENTO	
 Funcionamiento como bomba de irrigación - De la bolsa de líquido de irrigación - Al instrumento  Funcionamiento como bomba de succión - Del instrumento/paciente - Al recipiente colector		- Después de la confirmación (puesta en servicio), seleccione la disciplina. - Aparece la pantalla de selección del procedimiento:  - Seleccione el procedimiento. - Siga la animación para ajustar el set de tubos 		- Pulse la flecha para devolverse, aparece la selección de disciplinas - Seleccione la disciplina y el procedimiento deseados - Gire la palanca de bomba del set de tubos en sentido contrario al de las agujas del reloj.  - Conecte los extremos de los tubos con la bolsa de líquido de irrigación (mandril de punción) e inserte el otro extremo en la conexión de irrigación del instrumento (cierre LUER). 	
PUESTA EN SERVICIO		COLOCACIÓN DEL SET DE TUBOS			
- Pulse la tecla Standby, se enciende en verde y arranca a realizar un test automatico.  - Si aparece la pantalla de inicio, pulse el botón Para continuar presione aquí para iniciar el producto. Tras la confirmación, Aparece la pantalla para seleccionar las disciplinas:  - Si aparece la pantalla con el ajuste de altura, confirme el		- Coloque el set de tubos. Asegúrese de que no se aplasten los tubos de la bomba.  - Si el set de tubos y el procedimiento coinciden, aparece el último procedimiento seleccionado. p. ej.:  - Si el set de tubos no es apropiado, aparece el siguiente mensaje de error: 		- Se muestra el  - Para extraer el set de tubos, gire la palanca de bomba en	
				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES	
				Producto interrumpido: Presione con firmeza el enchufe de red en el conector del producto, controle la alimentación de la red. Potencia de succión insuficiente: Comprobar el tubo y, si fuera necesario, cambiarlo por uno nuevo, Comprobar que la tapa de cierre quede bien asentada. Sin potencia de succión: Compruebe la cantidad de líquido.	
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					