

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	




MONITOR DE SIGNOS VITALES

MARCA: NIHON KOHDEN
MODELO: BSM-2303K/BSM-2301K


Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el monitor muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.

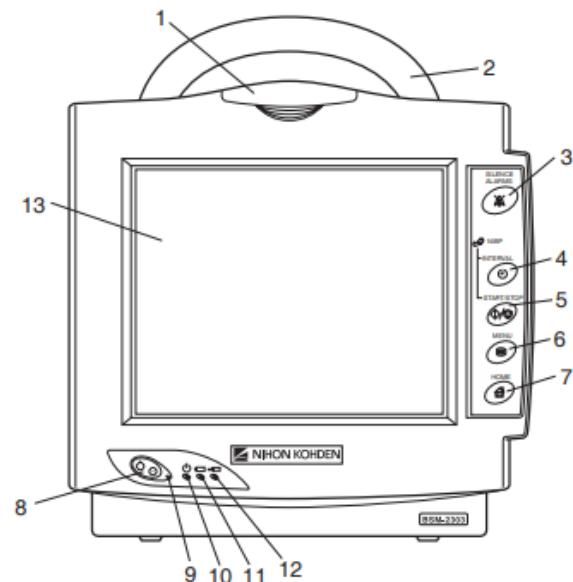

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Indicador de alarma	7	TECLA HOME
2	Asa	8	Interruptor de corriente
3	Tecla SILENCIAR ALARMAS	9	Luz de encendido
4	Tecla INTERVALOS PSNI (NIBP)	10	Luz de encendido de CA
5	Tecla PSNI START/STOP (NIBP)	11	Luz de batería
6	TECLA MENU	12	Indicador de carga de batería

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

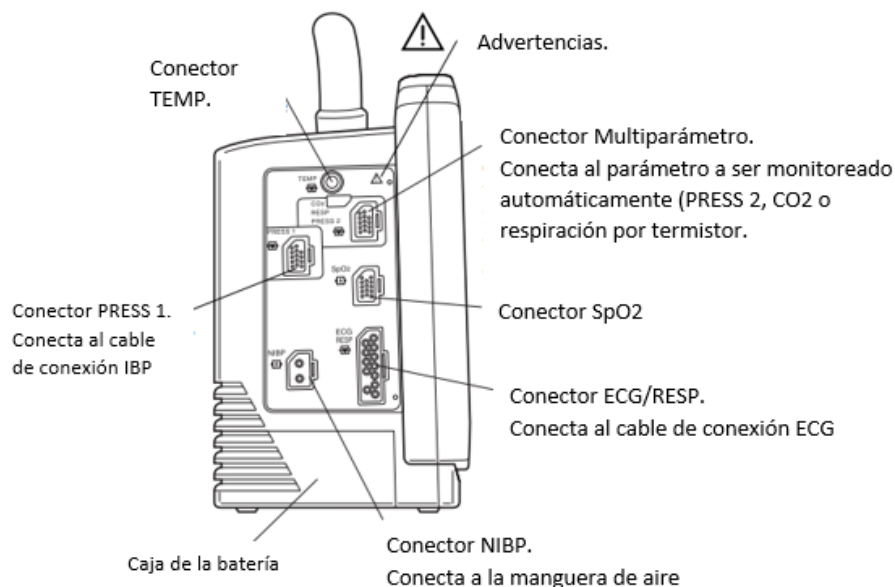

Ingresar nuevo paciente

- Antes de ingresar un nuevo paciente, borre la información del anterior, seleccione [MENU] → [INFO PACIENTE] → [DELETE ALL], de no hacer esto los datos del paciente anterior se pueden confundir con los del actual.
- En la misma ventana [INFO PACIENTE] ingrese los datos del paciente actual.
- En caso tal de que el paciente tenga marcapasos, active la detección estimulación (pacing detection) de la siguiente forma [MENU] → pulse la tecla [ECG] → [ALARMAS VITALES] → [OTROS VALORES] → selecciones [ACTIV] en la sección [DETECCION ESTIMULACION] (columna de la derecha).

Monitorización ECG/RESP:

- Seleccione el cable de paciente.
- Conecte el cable de paciente que tiene el electrodo al cable de conexión para ECG y enchufe este al conector ECG/RESP del monitor.
- Prepare la piel del paciente, ubique los electrodos en el paciente, asegúrese de que el monitor este encendido y preparado para monitorizar.
- En caso tal de que el paciente cuente con marcapasos, asegúrese de que aparezca el mensaje “ESTIMULACION”, de lo contrario revise la sección “Recomendaciones antes de usar”
- La respiración se puede medir por el método de impedancia cuando los electrodos RA y LL o RA y LA están colocados.

Monitorización de SpO2:

- Seleccione la sonda acorde al paciente.
- Conecte la sonda al cable de conexión de SpO2 y el cable de conexión al conector de SpO2 del monitor.
- Fije la sonda al paciente.

Monitorización de la PSNI (NIBP):

- Elija el manguito adecuado para el tipo de paciente.
- Conecte el manguito a la manguera de aire (introduzca la junta del manguito en la manguera de aire y gírela en sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic) y esta al conector NIBP del monitor. Para desconectar el manguito gire la junta del manguito en dirección contraria a las agujas del reloj.
- Coloque el manguito en el paciente de modo que la marca este alineada con la arteria del paciente. A su vez, asegúrese

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

de que el manguito este a la misma altura que el corazón del paciente.

- Establezca los valores necesarios.
- Comience el proceso de medición, para esto presione la tecla [PSNI START/STOP] para llevar a cabo una única medición.

Monitorización de temperatura:

- Seleccione el sensor de temperatura de tipo y tamaño adecuado.
- Enchufe el cable de la sonda al conector TEMP del monitor.
- Ajuste el sensor de temperatura al paciente de manera confiable.
- Modifique los valores necesarios.
- Inicie la monitorización.

SÍMBOLOS



ON/OFF



Menú



Funcionamiento
con batería



Home



Carga de la
batería



Suspensión de
alarma

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Limpieza
Monitor	- No use un paño seco o abrasivo ni detergentes ácidos o alcalinos. - Apague y desconecte el monitor, limpie con un paño suave humedecido con detergente neutro y escurrido. - Al terminar limpie el monitor utilice un paño suave y seco para retirar los restos de detergente. - Dejar secar al aire.
ECG/RESP.	- No toque el pin del conector ni moje el conector. - Frote el cable del electrodo y el cable de conexión con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol. - Seque con una gana o un paño seco.
SpO2	- No toque los pines del conector ni moje el conector. - Frote el cable de conexión con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol. - Seque con una gana o un paño seco.
PSNI (NIBP)	- No moje el conector, no permita que entre líquido en el manguito de goma. - Tire cuidadosamente del manguito para extraerlo de la cubierta de tela. - Lave la cubierta con detergente neutro y agua. Séquelo bien. - Frote el manguito de goma con un paño suave o con algodón impregnado en alcohol desinfectante. Séquelo bien. - Para limpiar los tubos, frote con un paño suave humedecido con detergente neutro y agua a unos 40°C.

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Inspeccione el monitor y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

ADVERTENCIAS:

- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

FALLA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN POR REALIZAR
El equipo no enciende.	Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.	Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.
	Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo	Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta.	Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión.
Medición falsa de los parámetros	Ruptura o falso contacto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
	Incorrecta colocación de los electrodos ECG	Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.
Descargas eléctricas en el paciente	Corrientes de fuga que se pueden presentar por múltiples causas como mal estado del sistema o mala conexión eléctrica.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
	Deterioro, ruptura y pérdida de aislamiento tanto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
Deterioro de la salud del paciente.	Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias