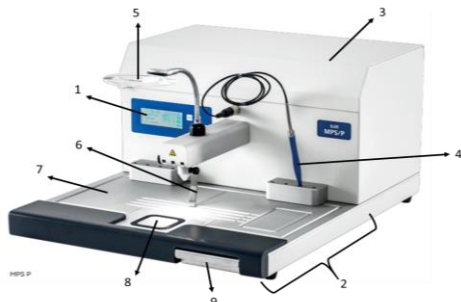


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES
				15	03	2023

Nombre del equipo:	CENTRAL DE INCLUSIÓN	Modelo:	MPS/P2	Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	SLEE MEDICAL			Clasificación del equipo:	Riesgo moderado

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO				
Los centros de inclusión de parafina tipo MPS/P1 y MPS/P2 están destinados a la inclusión de muestras de tejido histológico en parafina fundida (cera) para uso en laboratorio de patología. 		6. Coloque el cassette en el molde. 7. Rellene el molde y cassette con parafina. 8. lleve el bloque construido a la placa de enfriamiento para que la parafina se solidifique.				
		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO <table border="1"> <tr> <td>MODO MANUAL</td> <td>Con las flechas de subir o bajar en la pantalla, navegue hasta encontrar la opción operación, luego presione enter y la temperatura empezará a subir o bajar hasta llegar a su setpoint.</td> </tr> <tr> <td>MODO TEMPORIZADOR</td> <td>Haga click en menú, navegue hasta llegar a temporizador, programe hora de inicio y hora de fin, así como también los días de operación. Posteriormente salga del menú, deje encendido el equipo y espere a su uso al día siguiente.</td> </tr> </table>	MODO MANUAL	Con las flechas de subir o bajar en la pantalla, navegue hasta encontrar la opción operación, luego presione enter y la temperatura empezará a subir o bajar hasta llegar a su setpoint.	MODO TEMPORIZADOR	Haga click en menú, navegue hasta llegar a temporizador, programe hora de inicio y hora de fin, así como también los días de operación. Posteriormente salga del menú, deje encendido el equipo y espere a su uso al día siguiente.
MODO MANUAL	Con las flechas de subir o bajar en la pantalla, navegue hasta encontrar la opción operación, luego presione enter y la temperatura empezará a subir o bajar hasta llegar a su setpoint.					
MODO TEMPORIZADOR	Haga click en menú, navegue hasta llegar a temporizador, programe hora de inicio y hora de fin, así como también los días de operación. Posteriormente salga del menú, deje encendido el equipo y espere a su uso al día siguiente.					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 450 mm de longitud x 600 mm de anchura x 290 mm de altura. Peso: 60 kg. Potencia: 400 VA Capacidad del contenedor de parafina: 5,5 litros. Área de trabajo: 30 °C - 80 °C. Iluminación: LED ajustable Capacidad de almacenamiento de bloques: 300	1. Panel de control. 2. Plancha de enfriamiento. 3. Reservorio de parafina. 4. Pinzas eléctricas (opcionales). 5. Lupa 6. Palanca de dispensación. 7. Plancha de calentamiento. 8. Punto de enfriamiento. 9. Bandeja de desechos.	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DEL EQUIPO 1. Pinzas anatómicas. 2. Fórceps rectos. 3. Fórceps curvos. 4. Forceps de angulación. 5. Enchufe de alimentación con conexión circular mediante pinzas eléctricas. 6. Aguja de disección. 7. Placa de enfriamiento. 8. Unidad de precalentamiento. 9. Base de moldes. 10. Tapas para incrustar cassetes. 11. Tintes para muestras histológicas. 12. Parafina.				
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1. Asegurese de que la unidad está apagada. 2. Use ropa protectora y guantes desechables. 3. En caso de que se haya derramado parafina, retire cuidadosamente. 4. Con ayuda de un paño suave y limpio, retire los residuos de parafina que se encuentren en la pantalla. 5. Limpie la unidad usando solo medios alcohólicos y tenga cuidado de rociar las láminas de funcionamiento.	PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1. Asegúrese de que el equipo esté dentro de los parámetros de operación. 2. Saque una muestra del reservorio para tejidos y un molde del reservorio de moldes (tenga en cuenta el tamaño de la muestra). 3. Retire la tapa del cassette. 4. Aplique un poco de parafina en el molde 5. Con ayuda de pinzas coloque la muestra en el molde.					

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.