

GUIA DE MANEJO RAPIDO DESFIBRILADOR SERIE TEC-5600


Equipo	DESFIBRILADOR BIFASICO
Modelos Disponibles:	TEC-5621 sin Marcapaso
	TEC-5631 con Marcapaso
Fabricante:	NIHON KOHDEN
País origen Fabricacion:	JAPON
Numero registro Invima:	2019EBC-0002632-R1
Clasificación de riesgo:	IIB
Certificados de calidad	ISO-9001, ISO-13485, ISO-14001, CE
Tiempo de vida útil estimado:	5 AÑOS
Disponibilidad de repuestos despues de la discontinuacion	5 AÑOS



DESCRIPCION GENERAL

El desfibrilador aplica descargas eléctricas de alta corriente y corta duración a los pacientes para tratar la fibrilación y la taquicardia ventricular. El desfibrilador tiene una función de entrada de ECG que permite la cardioversión sincronizada y la desfibrilación asincrónica. El Modelo TEC-5631 puede realizar estimulaciones transcutáneas (marcapaso), útiles para tratar la bradicardia temporal. El desfibrilador funciona tanto con alimentación de CA como con una batería. Además del modo de desfibrilación manual, el desfibrilador proporciona un modo de desfibrilación semiautomática fácil de utilizar: el modo DEA. El desfibrilador también puede monitorizar el estado del paciente tras la desfibrilación. Los modelos TEC-5621 y TEC-5631 incluyen medición del ECG. Pantalla LCD de 6,5 pulgadas. El desfibrilador se carga de 0 a 200 J en menos de 4 segundos y de 0 a 270 J en menos de 5 segundos. Esto permite una desfibrilación o una cardioversión en un tiempo mínimo. Tras una desfibrilación o una cardioversión, la onda del ECG se recupera en 3 segundos para que pueda comprobar inmediatamente el resultado de la desfibrilación o la cardioversión.


COMPONENTES UNIDAD PRINCIPAL

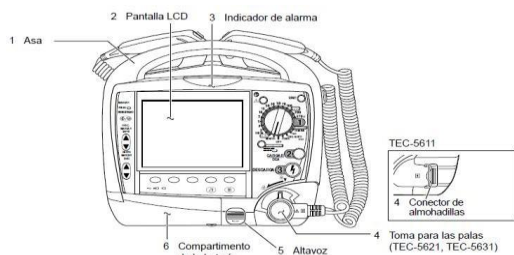


Lado derecho del equipo




Lado izquierdo del equipo

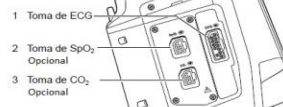


Parte trasera del equipo

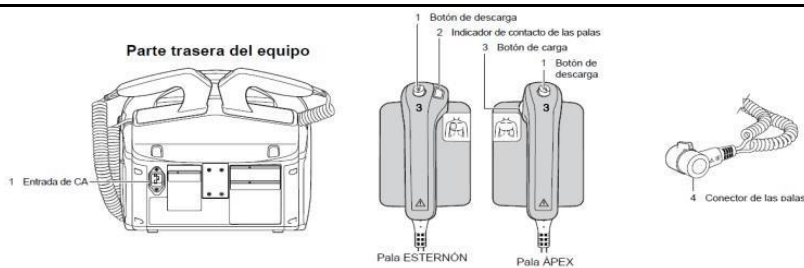

FLUJO DE OPERACIÓN DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION

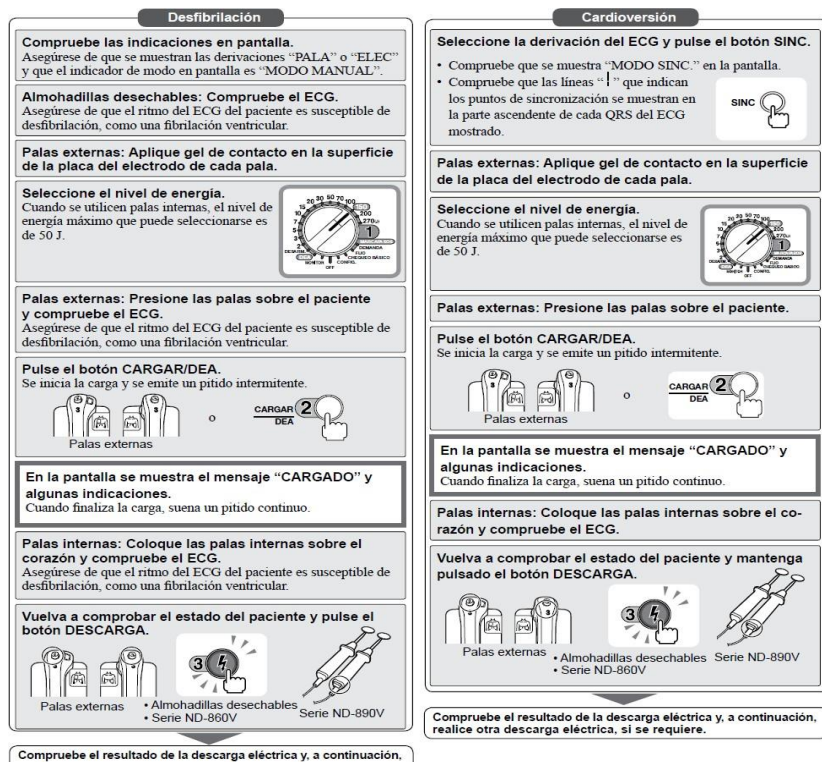

FLUJO DE OPERACIÓN MARCAPASO (Solo TEC-5631)

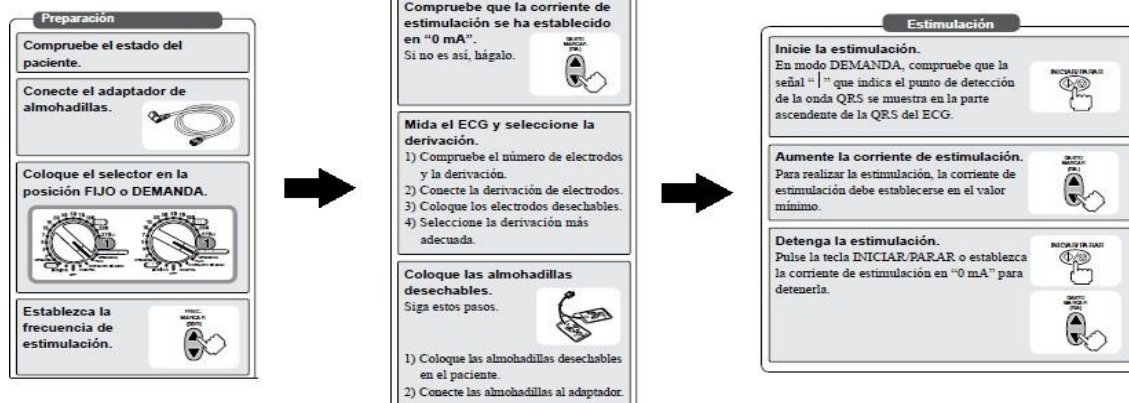

DATOS A TENER EN CUENTA

*Limpie las palas después de cada uso para evitar que se acumule gel conductor que puede producir zonas de contacto deficiente. *Limpie la superficie del equipo, utilizando un paño húmedo con alcohol o con un detergente enzimático (mezclado con agua) y luego pase con un paño con agua y retire el excedente de líquido aplicado. Luego tome un paño seco y retire el exceso de agua.

*No aplicar ningún solvente sobre la superficie del equipo o sus accesorios.
conectado el equipo a la red eléctrica

*Mantenga siempre