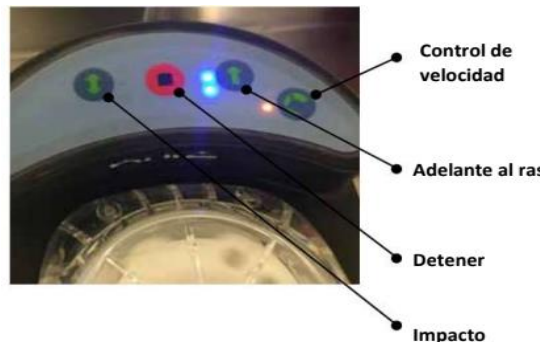
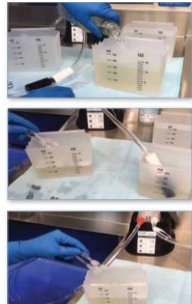


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 2 MES 01 AÑO 2024			
Nombre del equipo:	IRRIGADOR DE EQUIPOS	Modelo:	INTRUSFLUSH	Riesgo del equipo:	NO APLICA	
Marca:	RUHOF			Clasificación del equipo:	APOYO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		BOTONES DEL EQUIPO		MANTENIMIENTO DE JUEGO DE TUBOS		
EL InstruFlushTMEI sistema está diseñado para su uso en un área de reprocesamiento médico y ha sido completamente probado para su uso con una amplia variedad de dispositivos con lumen reutilizables, incluidos endoscopios rígidos y flexibles, dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos, dispositivos oculares y robóticos y puntas de succión. 				1. Arroje 500 ml de desinfectante en un recipiente 2. Sumerja por completo el tubo desplegable 3. Pulse el boton de lavado hacia adelante para llenar el juego de tubos de desinfectante. Al menos 100 ml de desinfectante a traves de los cables del tubo. Luego presione detener 4. Coloque las tapas de los extremos en todos los cables de los tubos y ajuste el control de velocidad en Baja. Coloque sus válvulas de alivio de presión sobre un contenedor o fregadero. Ejecute un lavado hacia adelante hasta que se expulse el desinfectante a través de las válvulas de alivio de presión. Presione DETENER. Sus tubos ahora están completamente llenos de desinfectante. 5. Despues del tiempo de contacto con el desinfectante, en un fregadero vacío, apunte los cables del tubo hacia abajo. Retire lentamente las tapas de los extremos. 6. Pase el resto del desinfectante a través de los tubos. 7. Llene un recipiente con 500 mL de agua limpia y coloque el tubo desplegable dentro. Enjuague al menos 500 ml a través de los cables del tubo para garantizar un enjuague adecuado.		
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fuente de alimentacion: 100-240 V Frecuencia: 50/60 Hz Consumo: 90 V		1. Boton de control de velocidad: Presione el botón UNA VEZ para velocidad baja (500 ml por minuto), DOS VECES para velocidad media (750 ml por minuto) y TRES VECES para velocidad alta (1000 ml por minuto).				
LIMPIEZA Y DESINFECCION		2. Boton de descarga para adelante: Presione el botón UNA VEZ durante 30 segundos, DOS VECES durante 60 segundos y TRES VECES durante 90 segundos.				
La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		3. Boton de detener: Presione para detener toda la acción de la bomba y cancelar cualquier ciclo.				
		4. Boton de impacto: Presione para dispositivos obstruidos. Presione el botón UNA VEZ durante dos (2) minutos, DOS VECES durante cuatro (4) minutos y TRES VECES durante seis (6) M.				
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						