

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
EQUIPO: PULSIOXIMETRO	CÓDIGO: NA
MARCA: BIOLIGHT	VERSIÓN: 1
MODELO: M800	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo biomédico utilizado en la pulsioximetría. Esta técnica permite medir de manera indirecta la saturación de oxígeno continua e instantánea mediante el monitoreo no invasivo de la hemoglobina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tener en cuenta que el pulsioxímetro viene con 3 baterías recargables con duración de 16 Horas de uso continuo.
- Cargar las baterías directamente a la red eléctrica
- No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo
- Modificar en caso de ser necesario tipo de paciente: Adulto-Pediátrico

PARTES DEL EQUIPO

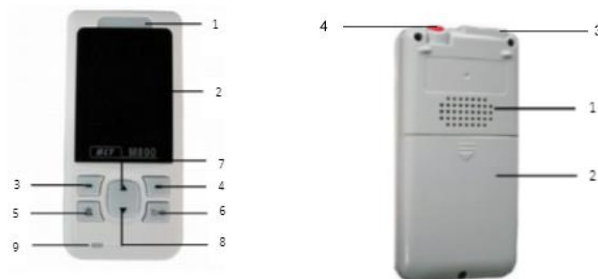

Partes del equipo delanteras:

- Luz indicadora de alarma
- Pantalla LCD
- Botón para acceder al menú principal y congelar ondas
- Botón para acceder a la medición de ECG/ SpO2
- Botón para pausar o mutar las alarmas
- Botón de ON/OFF
- Botón para desplazarse hacia arriba entre las diferentes opciones
- Botón para desplazarse hacia abajo entre las diferentes opciones
- Piloto indicador del estado de batería del dispositivo


Partes del equipo traseras:

- Bocina de alarmas
- Tapa de baterías
- Conector para accesorio de SpO2
- Conector para accesorio de ECG

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

- Verifique que el equipo este cargado
- Accione el botón de ON/OFF
- Conecte el accesorio de SP02 del equipo
- Conecte el accesorio de ECG del equipo
- Modifique el tipo de paciente en caso de ser necesario
- Inicie la monitorización

INTRODUCCIÓN AL PANEL DE LA PANTALLA

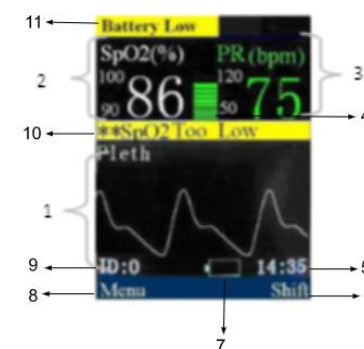

- Gráfica de onda SpO2/ECG
- Valores monitorizados de SpO2
- Valores de PR
- Valor de PR/HM
- Hora actual de la monitorización
- Botón de rápido acceso a las funciones
- Indicador del estado actual de la batería
- Botón de rápido acceso al menú

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: PULSIOXIMETRO	CÓDIGO: NA
	MARCA: BIOLIGHT	VERSIÓN: 1
	MODELO: M800	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/10/2022

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. No limpie el monitor con material abrasivo. 
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care
3. retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
4. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
5. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.

RECOMENDACIONES DE USO



1. Usar los dedos índice, medio o anular para monitorizar
2. No tener uñas largas o pintadas que pueden afectar la lectura.
3. No tener exceso de luz los cuales pueden dañar el infrarrojo.

MODO MONITOREO CONTINUO

El modo de monitoreo continuo está destinado para monitoreo de larga duración. Este modo es normalmente seleccionado cuando el paciente está hospitalizado o siendo transportado.

1. Ingrese en la opción de menú, Modo de trabajo
2. Seleccione el modo continuo

ADVERTENCIAS DEL USO DEL EQUIPO



1. Si el pulsioxímetro presenta fallos o daños en el momento de funcionamiento dejar de utilizarlo y llamar al equipo de mantenimiento.
2. No destapar el equipo ni realizar cambio de accesorios de equipo en equipo cuando no funcionan.
3. Use solo los sensores permitidos por BIOLIGHT, cualquier otro tipo de accesorios puede provocar una monitorización errónea.
4. Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que el equipo este apagado y debidamente desconectado al momento de la limpieza.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIB de Alto riesgo

9. Información de la cantidad de pacientes
10. Indicador de alarma fisiológica activada
11. Indicador de alarma técnica activada

NIVELES DE ALARMA

ALARMA FISIOLÓGICA ALTA 	Indican que el paciente está en una situación de amenaza de muerte y se demanda un tratamiento de emergencia.
ALARMA FISIOLÓGICA MEDIA 	Indican que los signos vitales del paciente aparecen como anormales y se requiere un tratamiento inmediato. Amarillo con parpadeo.
ALARMA FISIOLÓGICA BAJA 	Indican que los signos vitales del paciente aparecen como anormales, pero no amenazan con la vida del paciente.
ALARMA TÉCNICA MEDIA 	Indican la batería baja durante la monitorización
ALARMA TÉCNICA BAJA 	Indican que alguno de los accesorios puede estar desconectado.