

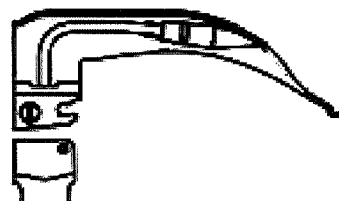


Laringoscopio de Fibra Óptica Penlon

Descripción del Equipo:

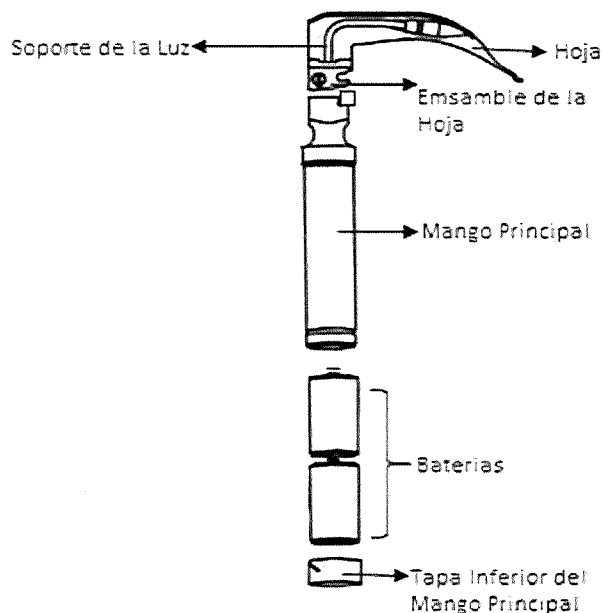


Tenga en cuenta la orientación de la hoja para conectar correctamente con el anclaje del mango, como se muestra en la siguiente imagen.

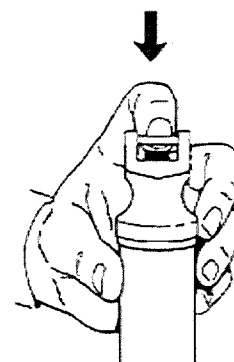

Funcionamiento:

1. Instale las Baterías para encender el equipo, como se evidencia en la siguiente imagen, debe retirar la tapa ubicada en la parte inferior del mango principal para insertar las baterías, tenga en cuenta la polaridad.

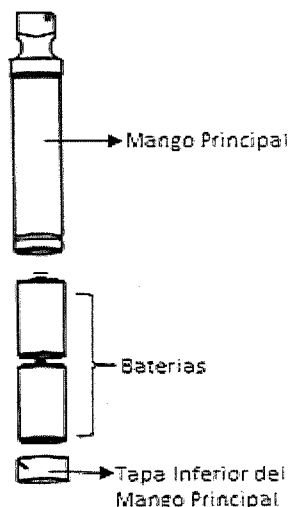

3. La unidad debe iluminarse mediante el soporte (canal) de la luz, en caso de no encender la fuente, verifique la polaridad o el estado de las baterías.

Nota: La potencia de salida de las baterías recargables puede caer rápidamente durante su uso, provocando un fallo rápido de iluminación. Asegúrese de disponer de un mango de repuesto.

2. Conecte la hoja del laringoscopio al mango y encienda la unidad, (posición "on").



LARINGOSCOPIOS DE FIBRA OPTICA - SERIE DIAMOND (Incluyendo la serie diamond McCoy)

Instrucciones de uso.

INTRODUCCIÓN

La serie de hojas y mangos Penlon – Diamond, son compatibles con otras hojas y mangos de los sistemas ISO “Green” (ISO 7376/3)

AVISOS Y PRECAUCIONES

Lea y comprenda antes de utilizar el laringoscopio

PRECAUCIONES (Para prevenir posibles accidentes personales a usted mismo y a otros)

- 1.- La intubación endotraqueal requiere entrenamiento especializado y los laringoscopios deberían ser solo empleados por personal quienes hayan recibido dicho entrenamiento. Para evitar trauma en el paciente, no uso excesiva fuerza durante la intubación .
- 2.- La hoja de laringoscopio puede transmitir infecciones de paciente a paciente, y se debe adoptar las medidas apropiadas para su limpieza, desinfección o esterilización, después del uso del paciente y para mantener un estado de esterilización. Las hojas no están estériles cuando se entregan nuevas.

CUIDADOS (para prevenir posibles daños al instrumento u otra propiedad)

- 1.- Las leyes federales de los EEUU y Canadá restringen este instrumento para ser vendido u ordenado solo por un especialista.
- 2.- Las hojas Crystal – refiérase a la hoja de instrucciones del usuario provista por separado con la hoja.

CUIDADO EN EL USO DE BATERIAS

PRECAUCION

- 1.- Las baterías usadas o defectuosas no deben ser desechadas en el fuego, puesto que podrían explotar. Ellas deberían ser tratadas como productos que contienen materiales corrosivos tóxicos.

Si una fuga desde la batería toma contacto con la piel, lávela una vez con grandes cantidades de agua.

- 2.- No someta a las baterías al calor o inmersión en químicos. Remueva las baterías desde el mango, previa su desinfección/ esterilización.
- 3.- La energía de algunos tipos de células (principalmente de tipo recargable) puede disminuir rápidamente ante su uso resultando en una rápida falla de iluminación.

CUIDADO

- 1.- Las baterías deberían ser removidas de los instrumentos cuando ellas no están siendo utilizadas. Los líquidos corrosivos pueden fugarse desde las baterías durante su almacenamiento y causar daño permanente al instrumento.
- 2.- Cuando coloque las baterías, chequee la configuración y su polaridad como se grafica en la pág. 2.

NOTA: No mezcle baterías recargables con baterías de un solo uso.

PRECAUCIONES PARA EL USO EN ÁREAS DE FUERTE MAGNETISMO

La mayoría de tipos de baterías contienen material magnético y pueden ser sujetas a altas fuerzas si se las expone a campos magnéticos, ejemplo en las áreas de Resonancia Magnética, habiéndose necesario un control preciso de las dificultades que puede presentar el laringoscopio.

Las baterías de litio, corrigen el problema, pero requieren especial adopción para ser utilizadas en los mangos estándar. Por favor refiérase a Penlon Limited para información adicional.

ALMACENAMIENTO

Remueva las baterías durante el almacenamiento.

Los líquidos corrosivos pueden fugarse desde las baterías durante el almacenamiento y causar daño permanente al instrumento.

CHEQUEO PREVIA UTILIZACION

El usuario debe realizar los siguientes chequeos antes de comenzar un procedimiento de intubación.


- 1.- Chequee visualmente la hoja para detectar malformaciones o desgastes resultantes en daño mecánico.
- 2.- Mueva la hoja a la posición operativa y chequee que la luz de la lámpara brille de manera normal.

Un brillo bajo podría indicar que las baterías están cerca de agotarse.

En las áreas donde la intubación es rutinariamente realizada por ejemplo, en las salas de operaciones es prevenir, tener un instrumento de repuesto disponible dado que la vida de la batería es corta y difícil de predecir.

INSTRUCCIONES DE USO

Hoja Diamond:

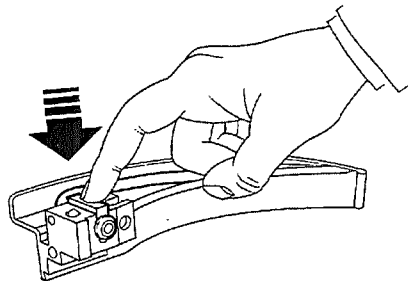


Chequee que la luz guía no protruya por encima del bloque.
Empuje completamente hacia abajo para asegurarlo.

Colocando la Hoja:

Adjunte la hoja al mango.

Mantenga la Hoja/mango como se muestra

Empuje la talón de la hoja con la visagra.

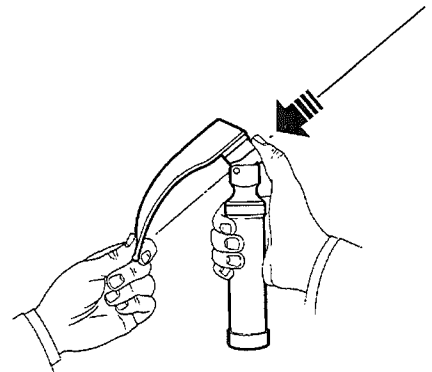

Para encender:

La lámpara de laringoscopio, se encenderá automáticamente cuando la hoja es movida hacia arriba para asegurarla en la posición operativa.


Para apagar:

Mueva la hoja desde la posición operativa.

Remueva la hoja:


Sujete el mango como se ilustra

Presione el talón de la hoja junto con la visagra.

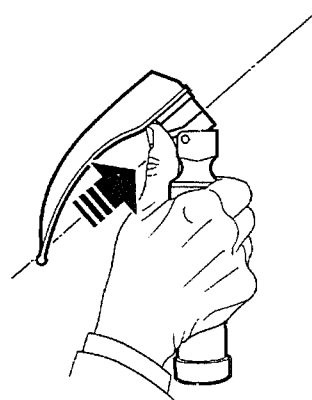**Utilizando la Hoja McCoy**

ADVERTENCIA: No apriete el nivelador cuando remueva la hoja

No aplique ninguna presión en la direcciones mostradas en la ilustración, lo cual podría forzar a la hoja y apartar el nivel. Daños en el sistema de unión puede ocurrir resultando en una acción incorrecta o del ajuste de la punta.

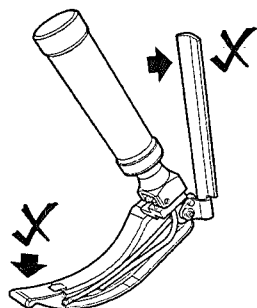

Coloque la hoja McCoy al mango – Vea las instrucciones operativas arriba.

El nivelador para operar la sección de la punta deberá ser extendido por detrás del mango.

El nivelador no debería ser tocado durante el proceso inicial de uso, hasta que la punta del laringoscopio haya sido insertada dentro de la vallécula.


Mueva el nivelador hacia el mango para elevar la punta de la hoja. Esto elevará la epiglotis, sin la necesidad de incrementar la fuerza referida a la parte principal de la hoja.

Libere el nivelador antes de operar la hoja.

Cambio de Batería

Desajuste la tapa terminal del mango, remueva las baterías (2).

Coloque 2 nuevas baterías estándar – LR14 (U11 OC)

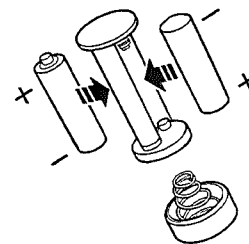

Stubby en Penlight – MN 1500 (AA).

PRECAUCION

Chequee la polaridad configuración como se ilustra


RUTINA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Reemplazo de la bombilla:

La bombilla tiene un diseño especial y solo el repuesto Penlon, se ajusta.

Use la bombilla Penlon, parte No. 50542 (paquete de 5)

Límpiese las manos antes de manejar la bombilla.

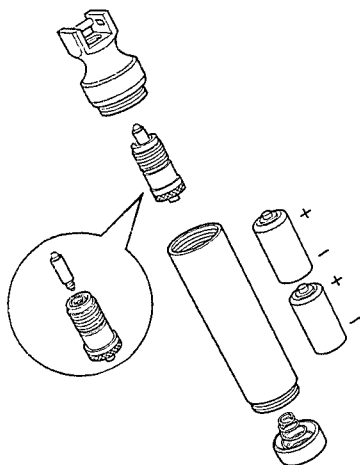

- 1.- Desajuste el mango
- 2.- Desajuste la cápsula de ensamblaje de la bombilla
- 3.- Desajuste el bulbo del bombillo
- 4.- Coloque una nueva bombilla y recoloque la cápsula de ensamblaje
- 5.- Coloque las baterías, el mango y la tapa y compruebe.
- 6.- Con la hoja asegurada en la posición operativa el bombillo debería encender.

Descripciones y Marcas

El talón de cada hoja de acero inoxidable está marcado para identificar el tipo de hoja y su tamaño.

La guía de luz es similarmente identificada como sigue:

Macintosh- MAC Miller- MIL Robertshaw- RSHAW Seward- SEW

El tamaño de la hoja está indicado por números desde el 0 (la hoja más pequeña) a 4 (la hoja más grande)

LIMPIEZA DESINFECCION Y ESTERILIZACION

Siempre cumpla con las normas locales de salud y regulaciones de seguridad durante esos operativos cuando emplee soluciones desinfectantes o esterilizantes los fabricantes recomiendan las concentraciones y los periodos de tiempo que tienen que ser observadas.


1.- Mangos-limpieza y desinfección

AVISO:

Antes de realizar la limpieza y desinfección del mango, remueva la base y las baterías del mango y la cápsula de la bombilla desde el bloque.

No someta a autoclave el ensamble del mango- vea Esterilización en la próxima página.

1. Desajuste el mango desde el bloque de la hoja
2. Remueva las baterías y el ensamblaje de la cápsula (lea la página previa)
3. Cepille el mango externamente utilizando un detergente apropiado.

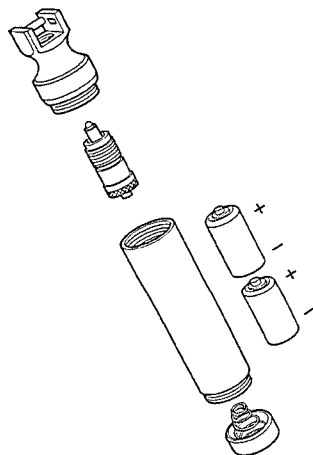

- 4.- Sumerja en un desinfectante apropiado siguiendo las instrucciones del fabricante
- 5.- Chequee que los mangos estén secos, tanto por dentro como por fuera antes de reinstalar la cápsula de las bombillas, las baterías y la tapa.

PRECAUCION

Chequee la configuración y la polaridad de las baterías como se ilustra.


- 6.- Calce una hoja la mango. Compruebe la unidad antes de su uso clínico

2.- Hojas


Limpieza y desinfección

PRECAUCION

La guía de ensamblaje de la rama rígida de la fibra óptica no debe ser removida. Esto dañará cualquiera de las otras fibras y dará como resultado una reducción en la transmisión de la luz.

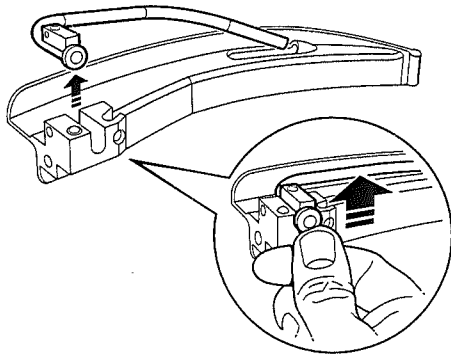


- 1.- Empuje el talón de la luz guía hacia arriba para desajustar el ensamblaje de la luz guía de la hoja
 - 2.- Cepille los componentes después de utilizarlos preferentemente debajo del chorro de agua. Enjuague profundamente
 - No use materiales abrasivos tales como los empleados para alambres
 - 3.- Limpie los componentes con una solución desinfectante.
- Reinstale la luz guía

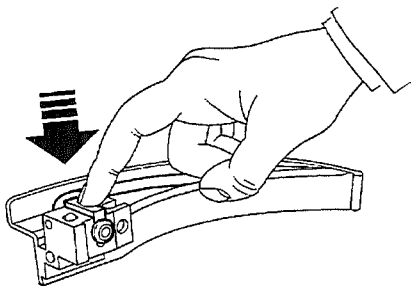


- 4.- Coloque la punta de la guía de luz en la talón de la hoja, luego empuje el talón de la luz guía firmemente dentro de la hoja.
- El talón debe estar completamente colocado en el talón de la hoja.

Mccoy

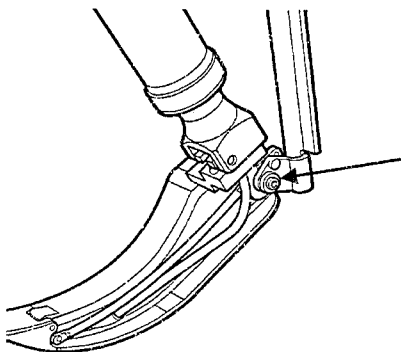

1.- Remueva el tornillo, para permitir remover del nivelador.

El mecanismo de nivelación de la hoja McCoy puede requerir articulación, antes la luz guía puede ser desajustada de la hoja.

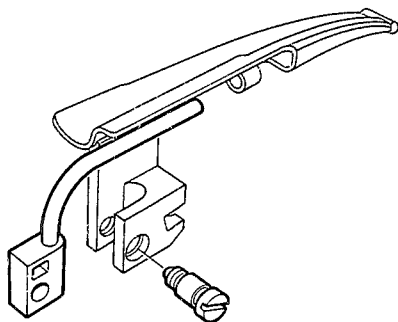

2.- Remueva el tornillo y desajuste el ensamblaje de la luz guía. de la hoja

3.- Cepille los componentes después de usarlos preferentemente debajo de un chorro de agua.

Enjuague completamente

No use materiales abrasivos tales como los empleados para alambres

4.- Limpie los componentes con una solución desinfectante

3 Mango y Hojas (esterilización)

Recomendamos:

Solución de ácido paracético o autoclave.

Aviso :

1.- Antes de esterilizar/ autoclave el mango remueva la base, las baterías y la cápsula de la bombilla del mango como se ilustra en las páginas previas.

2.- Hoja / guía de luz – desármelo antes del autoclave- vea la página previa

3.- Nota – Después de extensos procesos de esterilización, la salida de luz desde la rama de la fibra podría disminuir – Vea “Hojas, pulimento y reensamblaje”. abajo

A) Solución de ácido paracético

Escoja un producto apropiado a fin con la política de su hospital para esterilización (por ejemplo, uno del rango del Cidex)

Desarme como se detalla en Avisos arriba, y en la página previa, luego enjabone los componentes en la solución de ácido paracético.

Siga las recomendaciones del fabricante para la concentración de esta solución y el tiempo de enjuague

PRECAUCION

No exceda las recomendaciones del fabricante

B) Auclave

Desarme como se detalle en Avisos arriba y luego autoclave a 134-137 grado centígrados.


PRECAUCION

Cumpla con los tiempos recomendados localmente para autoclave

Hojas-pulir y reensamblar

1.- Después de limpiar y esterilizar las caras de la rama de la fibra, pueden ser pulidas con un baño seco y delicado antes de ser colocadas a la hoja

2.- Coloque la guía de luz a la hoja (Vea la página previa)

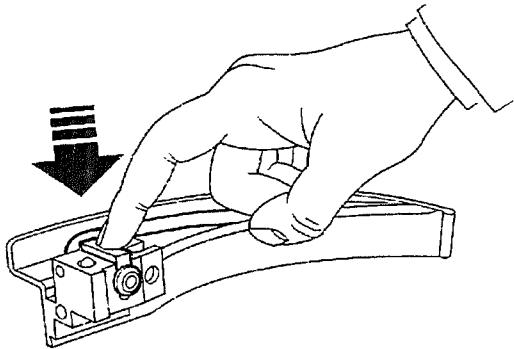

El talón tiene que estar completamente colocado en la ranura de la hoja.

Hoja McCoy – Vea la página previa

3.- Coloque la hoja al mango y compruebe la unidad antes de su uso

4.- El Uso de Las Máquinas de Lavado

1.- Siempre siga las instrucciones de los fabricantes de las máquinas de lavado acerca de la máquina que se ajuste al uso de componentes de fibra óptica.

Algunos fabricantes tienen programas especiales para componentes de fibra óptica.

Si las instrucciones de usuario provistas con la máquina no se refieren a instrumentos de fibra óptica, contacte al fabricante de máquinas de lavado antes de lavar laringoscopios con ramas de fibra óptica.

2.- No use una temperatura de lavado más allá de 60 grados centígrados

3.- No use agua pesada para el ciclo de enjuague , y no enjuague a una temperatura mayor de 60 grados centígrados.

NOTA:

Algunos fabricantes de máquinas de lavado recomiendan limpieza alcalina a baja temperatura, desinfección térmica y un enjuague final con agua completamente desionizada.

4.- La desinfección térmica y las fases de secado deben ser a temperaturas de menos de 85 grados centígrados y el tiempo debe estar en acuerdo a las regulaciones locales/ nacionales.

Catálogo No. 53042

Documento No. FL (G) 0107UI(Sp) Marzo 2007

Penlon Limited

Abingdon Science Park, Barton Lane, Abingdon, OX14 3NB, UK

Tel: 44 1235 547076

E: technicalsupport@penlon.co.uk

