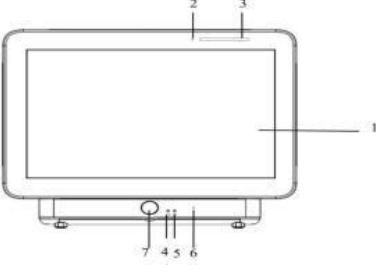
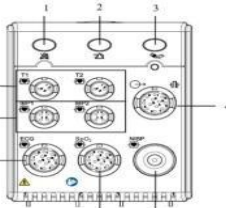


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 15 MES 03 AÑO 2023			

Nombre del equipo:	Monitor de signos vitales	Modelo:	P15	Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	BIOLIGHT	Clasificación del equipo:			DIAGNOSTICO

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	
 La serie P de monitores para Paciente (P12/P15/P18/P22), en adelante llamado el monitor, están destinados para ser usados para monitorear, desplegar, revisar, almacenar y mostrar alarmas de múltiples parámetros fisiológicos de Pacientes.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Voltaje de entrada: 100-240 V 2. Frecuencia: 50-60 Hz	1. Pantalla de visualización 2. Inducción de luz 3. Luz de alarma 4. Indicador de que el equipo esta conectado 5. Indicador de que el equipo esta cargando 6. Parlante de audio 7. Interruptor de corriente	
PARAMETROS DE MEDICIÓN DEL EQUIPO ECG, Frecuencia Cardíaca (FC), Frecuencia Respiratoria (RR), Temperatura (TEMP), Pulso y Saturación Oxígeno (SpO2), Frecuencia del Pulso (FP), Presión Arterial No Invasiva (NIBP), Dióxido de Carbono (CO2), Presión Arterial Invasiva (IBP), Cardiografía por Impedancia (ICG), Índice Biespectral (BIS), Electroencefalografía (EEG), Gas Anestésico (AG), Mecanismo Respiratorio (RM), Hemoglobina Total (SpHb).		1. Botón de pausa de alarmas 2. Botón que reinicia la alarma 3. Botón para iniciar NIBP 4. Conector multifuncional 5. Conector de Temperatura 6. Conector de IBP 7. Conector de ECG 8. Conector SPO2 9. Conector NIBP
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Para realizar la limpieza y desinfección del equipo, realice esta con el desinfectante aprobado por la institución o en caso de contingencia alcohol al 70%. Recuerde limpiar tanto el equipo como los accesorios de monitorización.	RECOMENDACIONES GENERALES 1. Procure mantener el equipo conectado a la red electrica 2. Procure no doblar ni retorcer los cables de accesorios de manera brusca 3. Realice la limpieza despues de cada uso del equipo.	
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1. Verifique el equipo se encuentre conectado a la red 2. Decida que variables seran monitoreadas del paciente 3. Instale los accesorios necesarios para la medición tanto en el paciente como en el equipo. 4. Verifique que las variables medidas son confiables 5. Si es necesario, modifique las variables medidas según la necesidad presentada 6. Si es necesario ajuste los paramaetros de las alarmas		
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA 1. Nunca limpie el monitor con materiales abrasivos. 2. Nunca sumerja ninguna parte del monitor en líquido ni permita que se filtre líquido en la carcasa. 3. No deje limpiadores ni desinfectantes en la superficie de ninguna parte del monitor. 4. Nunca desinfecte el equipo con formaldehidos.		

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.