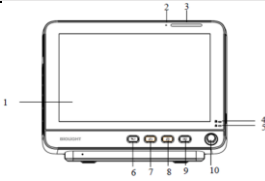


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: DÍA 22 MES 08 AÑO 2024			
Nombre del equipo:	Monitor multiparámetros de paciente	Modelo:	M10	Riesgo del equipo:	IIB	
Marca:	BIOLIGHT			Clasificación del equipo:	Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		RECOMENDACIONES		
 Monitor de signos vitales de última tecnología que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente, puede ajustarse a las características requeridas por el usuario. Estos son: ECG, Frecuencia Cardíaca (FC), Frecuencia Respiratoria (FR), Temperatura (TEMP), Saturación de Oxígeno del Pulso (SpO2), Frecuencia del Pulso (FP), Presión Arterial No Invasiva (PNI).		 1. Pantalla. 2. Sensor de luz ambiental: Por ejemplo, cuando el ambiente es oscuro, el brillo de la pantalla se puede ajustar automáticamente. 3. Alarma visual: La lámpara de alarma con diferente color y frecuencia de parpadeo indica el nivel de alarma técnica y alarma fisiológica: 4. Indicador de encendido/apagado 5. Indicador de carga de la batería 6. Botón PNI: Presione este botón para iniciar o detener la medición de PNI. 7. Botón de reinicio de alarma: Para reiniciar el sistema de alarma. 8. Botón pausar alarma: Para pausar las alarmas. 9. Botón congelar: Para congelar o descongelar la forma de la onda. 10. Perilla de control: Gire a la izquierda o derecha para mover el cursor. Presione para realizar una operación deseada, para ingresar datos o cambiar configuraciones.		1. Mantener conectado el equipo a la red eléctrica. 2. Colocar los accesorios siguiendo la guía de los cables. 3. No forzar ni arrancar los cables de los accesorios cuando no se desconectan del equipo. 4. Tener en cuenta los canales que estén activados para evitar confusiones en la temperatura y presión.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Monitor de diseño minimalista. 2. Medidas: 193mm X 288mm X 236mm 3. Peso: < 3kg 4. Multiparamétrico: ECG 3/5/6 derivaciones, FR, Resp, NIBP, SpO2, PR, 2- y Temp. 5. Escala de alerta temprana (EWS). 6. Escala de Glasgow (GCS). 7. Equipado con caja de almacenamiento de accesorios. 8. Pantalla LCD TFT 10.4" 9. Resolución 1024x600 pixeles. 10. Mejor vista con un ángulo de pantalla de 15°. 11. Alineación de los distintos puertos. 12. Múltiples modos de trabajo: -Botonera. -Ruleta. -Pantalla táctil (opcional). 13. Ajuste automático a la luz ambiental. 14. Batería de Litio Eco-Friendly: Batería de Litio 2500mAh estándar ≥ 4 horas.		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		DISTRIBUCIÓN DE LA PANTALLA  1. Área de información del paciente: Muestra el # de habitación, el # de cama, el nombre, categoría y estado del paciente. 2. Configuración actual. 3. Área de alarma técnica: Muestra las alarmas técnicas y mensajes de aviso. 4. Área de alarma fisiológica: Muestra los mensajes de alarma fisiológica de nivel medio y bajo. 5. Área de información del estado del sistema: Muestra el volumen de la alarma, red y estado de conexión de dispositivos de almacenamiento, batería y tiempo. 6. Área de forma de onda: Muestra las formas de onda de cada parámetro fisiológico. 7. Área de parámetros: Se compone de varias áreas de parámetros y muestra los números de medición para cada módulo de parámetros. 8. Área de llaves inteligentes: Muestra teclas inteligentes, estas teclas inteligentes se utilizan para realizar algunas		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E			CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
				VERSIÓN:		001	PAGINA	01	DE
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:		DÍA		MES	AÑO
						22	08	2024	
Nombre del equipo:	Monitor multiparámetros de paciente	Modelo:	M10	Riesgo del equipo:	IIB				
Marca:	BIOLIGHT			Clasificación del equipo:	Diagnóstico				
MODO MONITOR		MODO DEMO		SALIR DEL MODO NOCTURNO					
Es el modo de trabajo clínico más común para monitorear pacientes. Cuando se enciende el monitor, ingresa automáticamente al modo de monitor.		El monitor puede mostrar sus funciones principales cuando el paciente o el simulador de paciente no estén conectados. El modo Demo está protegido con contraseña. Siga los siguientes pasos para entrar al modo Demo: 1. Seleccionar (Menú Principal) →seleccione (Sistema)→seleccionar (Demo). 2. Ingrese la contraseña →seleccionar (OK). Apague y reinicie el monitor para salir del modo		1. Presione la Tecla rápida (Salir Modo Nocturno) o seleccione (Menú Principal)→de la columna (Pantalla) →seleccionar el botón (Salir Modo Nocturno). 2. En el cuadro emergente seleccionar (OK). NOTA: El monitor reanuda la configuración anterior después					
MODO DE ESPERA				MODO PRIVACIDAD					
Puede temporalmente detener el monitoreo de pacientes, sin apagar el monitor, entrando al modo de espera.				El monitor no muestra la información del paciente y los datos de monitoreo para proteger la información del paciente de los no clínicos, como los visitantes.					
ENTRAR AL MODO ESPERA		MODO NOCTURNO		ENTRAR AL MODO PRIVACIDAD					
Presione la tecla rápida(En Espera), o Seleccione (Menú Principal)→ seleccione(Paciente)→ seleccione el botón (En Espera), ó seleccione la tecla rápida (Gestión de Paciente)→(Liberar Paciente) dar de alta al paciente y luego entrar al modo de espera. El monitor se comporta de la siguiente manera después de ingresar al modo de espera: 1. Detiene la medición de todos los parámetros. 2. Desactiva todas las alarmas y mensajes. 3. Cambia el brillo de la pantalla al nivel más tenue		Es un modo especial de monitoreo clínico. En el modo nocturno, el volumen de alarma, el volumen QRS y el brillo de pantalla disminuyen automáticamente al nivel más bajo. Para evitar molestar al paciente, se puede usar el modo nocturno.		Seleccionar tecla rápida (Menú Principal)→seleccione (Pantalla) →seleccione(Modo Privacidad)→seleccionar(OK). El monitor tiene las siguientes características después de entrar al modo privacidad: -La pantalla se pone en blanco y muestra (Monitoreando)al mismo tiempo. -Todos los parámetros y la visualización de formas de onda son protegidas. -A excepción de la alarma de batería baja, el monitor desactiva el tono de alarma y la luz de alarma de todas las demás alarmas. -El monitor suprime todo el tono de aviso del sistema, incluido el tono del latido del corazón, el tono del pulso.					
SALIR DEL MODO ESPERA		ENTRAR AL MODO NOCTURNO		SALIR DEL MODO PRIVACIDAD					
Para salir del modo espera puede realizar las siguientes maneras:Seleccionar (Restablecer Monitor) para salir del modo espera y reanudar el monitoreo del paciente ó Seleccionar (Liberar Paciente) para dar de alta al paciente actual. Si el monitor ingresa automáticamente al modo de espera después de que un paciente es dado de alta, elija cualquiera de las siguientes formas para salir del modo de espera: -Seleccionar (Gestión de Paciente) para salir del modo espera y admitir un nuevo paciente. -Seleccionar (Monitor) para ingresar la información del paciente para admitir un nuevo paciente.		1. Seleccionar la Tecla rápida (Modo Nocturno) o seleccionar (Menú Principal) →seleccionar (Pantalla)→seleccionar (Modo Nocturno). 2. En el menú emergente, configure el modo nocturno. 3. Seleccione (Entrar al Modo Nocturno). La configuración predefinida del modo nocturno es la siguiente: -Brillo: 1 -Volumen de alarma: 2 -Volumen QRS: 1 -Tono táctil: Desactivado -Tono de finalización PNI: Desactivado		El monitor sale automáticamente del modo de privacidad en cualquiera de las siguientes situaciones: -El monitor se desconecta de la central de monitoreo. -Se produce una alarma de batería baja. También puede presionar manualmente en la pantalla (Salir del Modo Privacidad)para salir del modo privacidad.					
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:									
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.									
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica									
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo									
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.									
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.									
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas									
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.									