 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE Equidad. Calidad. Vida.	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO					
		VERSIÓN		PÁGINA		DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES		AÑO	




DESFIBRILADOR

MARCA: NIHON KOHDEN
MODELO: TEC-5531E


Recomendaciones antes de usar

- Verifique que el equipo se encuentre conectado a la toma eléctrica regulada, el cable de alimentación debe tener 3 terminales.
- Revise las conexiones, cables, sensores.
- Asegúrese que está usando los accesorios correspondientes al monitor que está a punto de usar.
- Si el equipo muestra evidencia de daños o errores, repórtelo.

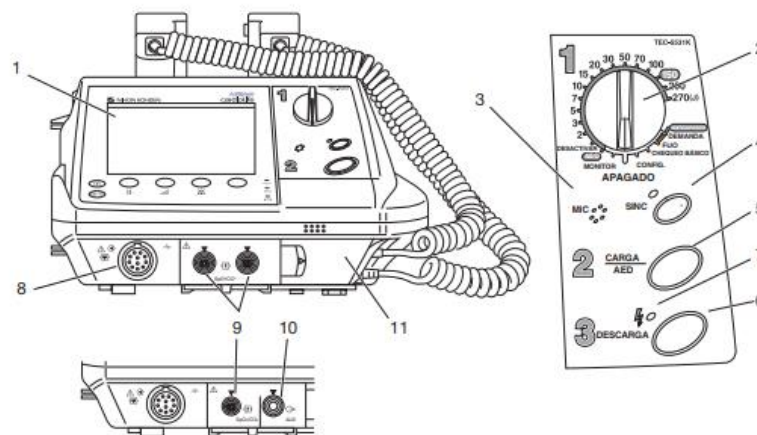


No.	Nombre	No.	Nombre
1	Pantalla LCD	7	Indicador de descarga
2	Control de selección de energía/modo	8	Conector de entrada de ECG
3	MIC	9	Conector de SpO2/CO2
4	Indicador/botón SINC	10	Conector UXOUT
5	Botón CARGA/AED	11	Conector de palas
6	Botón DESCARGA		

No.	Nombre
1	Pantalla LCD
2	Control de selección de energía/modo
3	MIC
4	Indicador/botón SINC

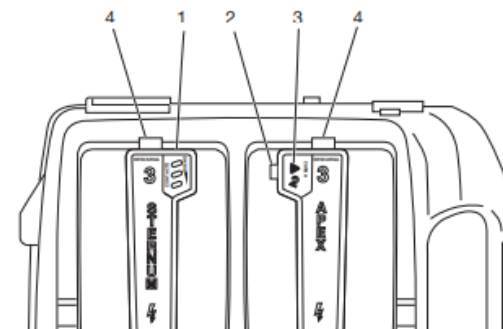

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
			VERSIÓN	PÁGINA	DE	
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

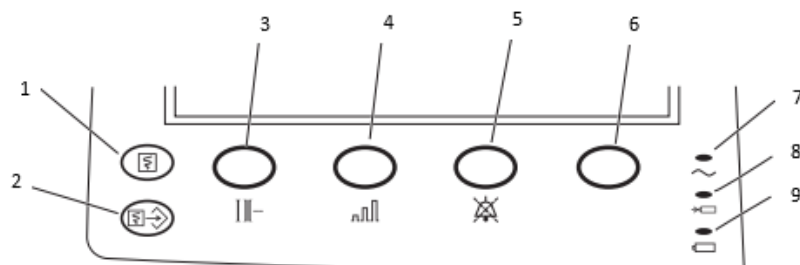

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Tecla de impresión	6	Tecla multifunción
2	Tecla de eventos	7	Indicador de CA
3	Tecla de derivación de ECG	8	Indicador de carga de la batería
4	Tecla de sensibilidad de ECG	9	Indicador de la batería completa
5	Tecla de silenciado de alarmas		

Prueba diaria


- Gire el selector de energía/modo a la posición CHEQUEO BASICO, aparecerá la pantalla de mantenimiento.
- Pulse la tecla OK para iniciar el mantenimiento.
- Siga las instrucciones en pantalla para las evaluaciones que requieran su participación.
- El equipo llevará a cabo algunas evaluaciones automáticas
- Oprima la tecla de confirmación o negación según corresponda en base al mensaje que aparezca en pantalla.

Cuando termine todas las comprobaciones, aparecerá el mensaje “Mantenimiento básico completado” en pantalla y se registraran los resultados de las comprobaciones en el papel de registro

Desfibrilación:

En primer lugar, gire la perilla para seleccionar el modo de operación.

- Extraiga las palas y colóquelas sobre el paciente como se indica continuación. Las palas poseen un indicador de impedancia, asegúrese que se encuentra iluminado en verde.

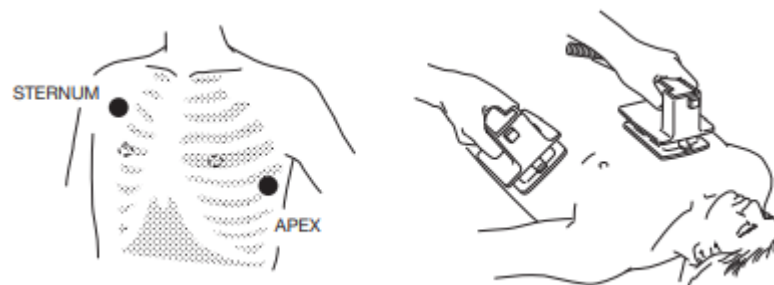

- Seleccione la energía a suministrar y cárguela haciendo uso del botón en la pala APEX o el botón CARGA/AED de la pantalla
- Descargue oprimiendo los botones DESCARGA en ambas palas simultáneamente.
- De ser necesario, repita la desfibrilación.

Para el modo de monitoreo, posicione la perilla en este modo y conecte los accesorios necesarios, el equipo empezara a monitorear.

Para el modo DEA, posicione la perilla en este modo y siga las indicaciones en pantalla.

SÍMBOLOS



Alarma desactivada



No cuenta con batería.



Alimentación restante inferior a 3 descargas de 270 J

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte/Accesorio	Proceso
Desfibrilador	● Retire la suciedad de la superficie exterior del desfibrilador, de las palas y la pasta de los electrodos de prueba con un paño suave humedecido con agua o alcohol desinfectante. ● Frote con un paño limpio y seco. No coloque <u>gasas</u> humedecidas con solución salina sobre los soportes de las palas.
Paletas y placas	● Limpie la pasta de los electrodos y las asas de las palas externas e internas con un paño suave humedecido en agua o alcohol desinfectante. ● Limpie con un paño limpio y seco.
Cable ECG	● Limpie la superficie del cable con un paño suave rociado con agua o agua con jabón neutro ● Friegue el cable con un paño suave rociado con desinfectante. ● Quite el desinfectante remante con un paño suave rociado con agua. ● Coloque el cable en un lugar refrigerado y a la sombra para que se airee.
Sensor SpO2	Se puede utilizar el método del cable ECG.

RECOMENDACIONES:

- Mantenga el monitor/desfibrilador y accesorios libres de polvo y suciedad.
- Utilice solo los implementos recomendados para su limpieza.
- Salvo se indique lo contrario, no sumerja ningún componente del monitor en ningún líquido.
- No permita que el líquido se filtre a la carcasa.
- Inspeccione el monitor/desfibrilador y accesorios reutilizables después de terminar la limpieza.
- Seguir procedimiento según lo establecido en la institución.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

FALLA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN POR REALIZAR
El equipo no enciende.	Mala conexión a la corriente eléctrica y descarga de la batería.	Antes de usar el equipo asegúrese que se encuentra correctamente conectado a un tomacorriente regulado.
	Daño en el circuito interno del equipo que no permite el paso del fluido eléctrico.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
Los accesorios no calzan fácilmente en el equipo	Es probable que se estén usando los accesorios de otro equipo que no son compatibles o se estén colocando de forma incorrecta.	Asegúrese de que esté usando los accesorios correspondientes al equipo. Si son correctos los accesorios, asegúrese que esté siguiendo las guías para la correcta conexión.
Medición falsa de los parámetros	Ruptura o falso contacto de los cables.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias.
	Incorrecta colocación de los electrodos ECG	Rectifique la posición y fijación de los electrodos sobre el paciente.
Deterioro de la salud del paciente.	Mal funcionamiento o daño en las alarmas auditivas y visuales.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
Quemaduras	Aumento de la resistencia por electrodos en mal estado o sin gel	Asegúrese de seguir el proceso establecido, reporte el evento ocurrido con el paciente para su tratamiento.
Inadecuado suministro de la descarga al paciente.	Mal estado o deterioro del equipo y sus componentes.	Reporte el daño en el equipo para tomar las medidas necesarias
	Selección inadecuada de la energía necesaria.	Asegúrese de seguir el proceso establecido para la selección de energía, rectifique los valores de energía y repita la descarga si es necesario.
El equipo no está listo para su uso al momento requerido	Mal manejo del equipo y proceso, desconexión del fluido eléctrico y fallas en la batería o deterioro del equipo.	Asegúrese de seguir los procesos establecidos para el uso y mantenimiento del equipo. Ubique el desfibrilador de remplazo más cercano para aplicarlo en el paciente.