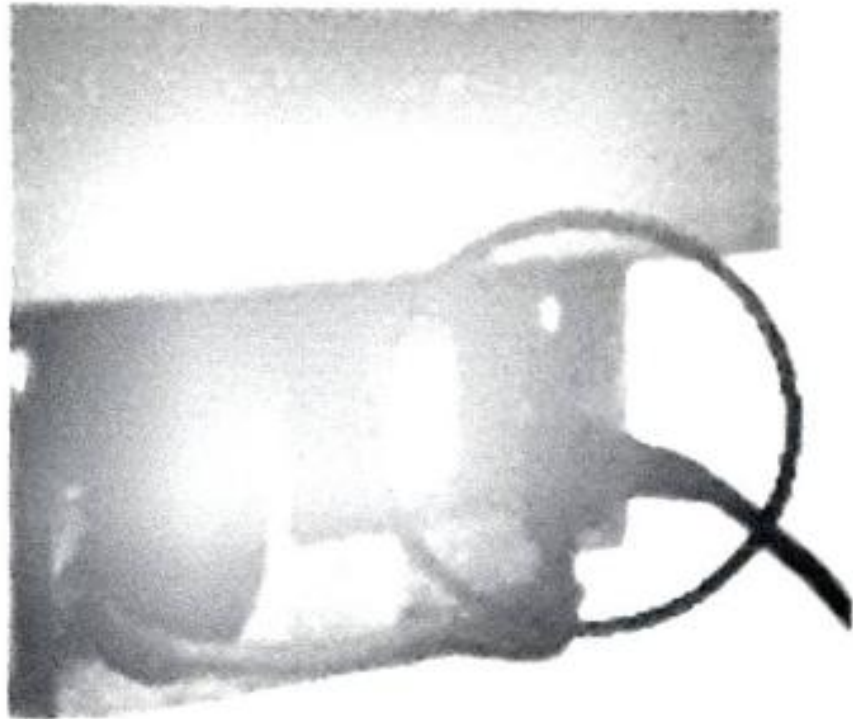
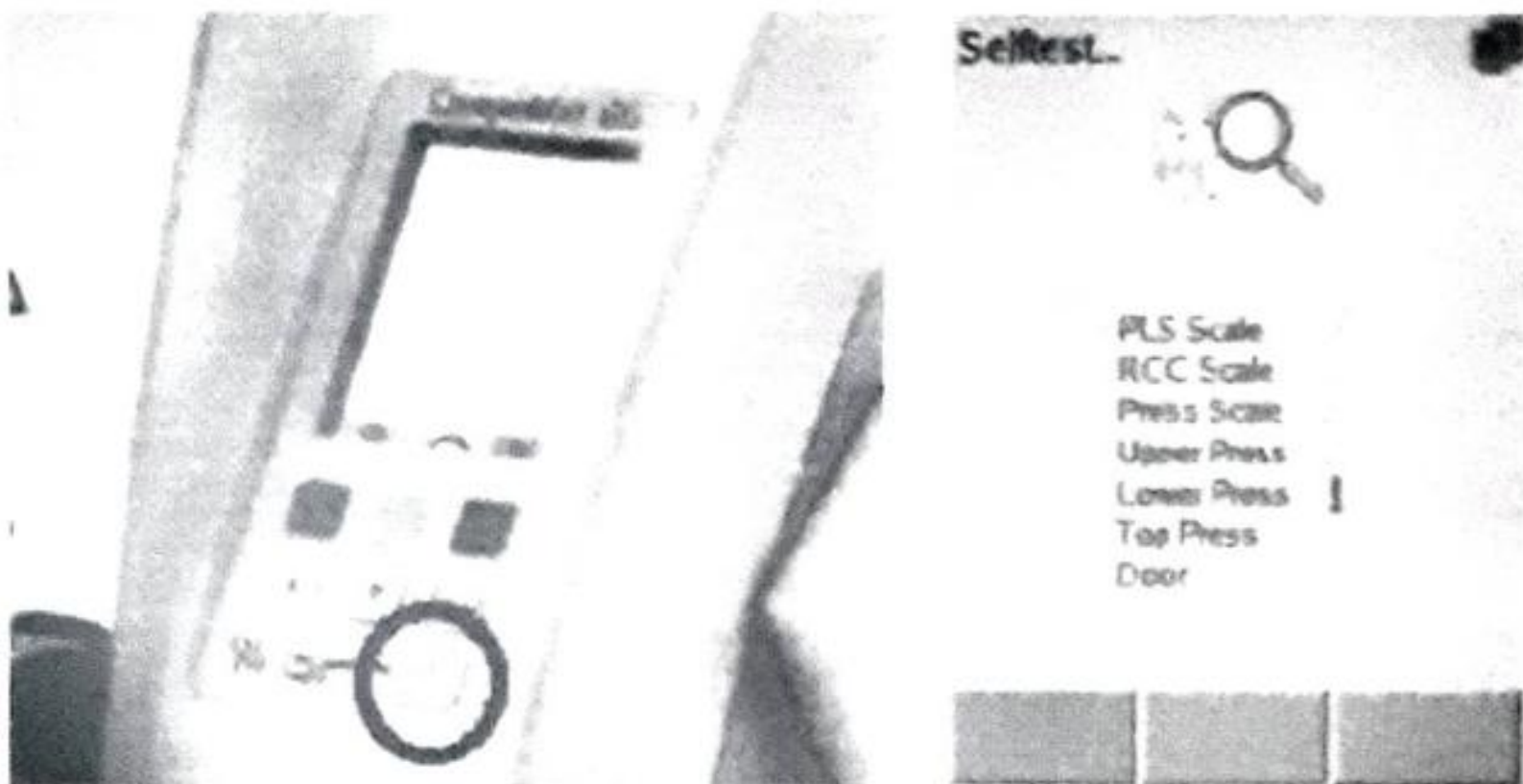
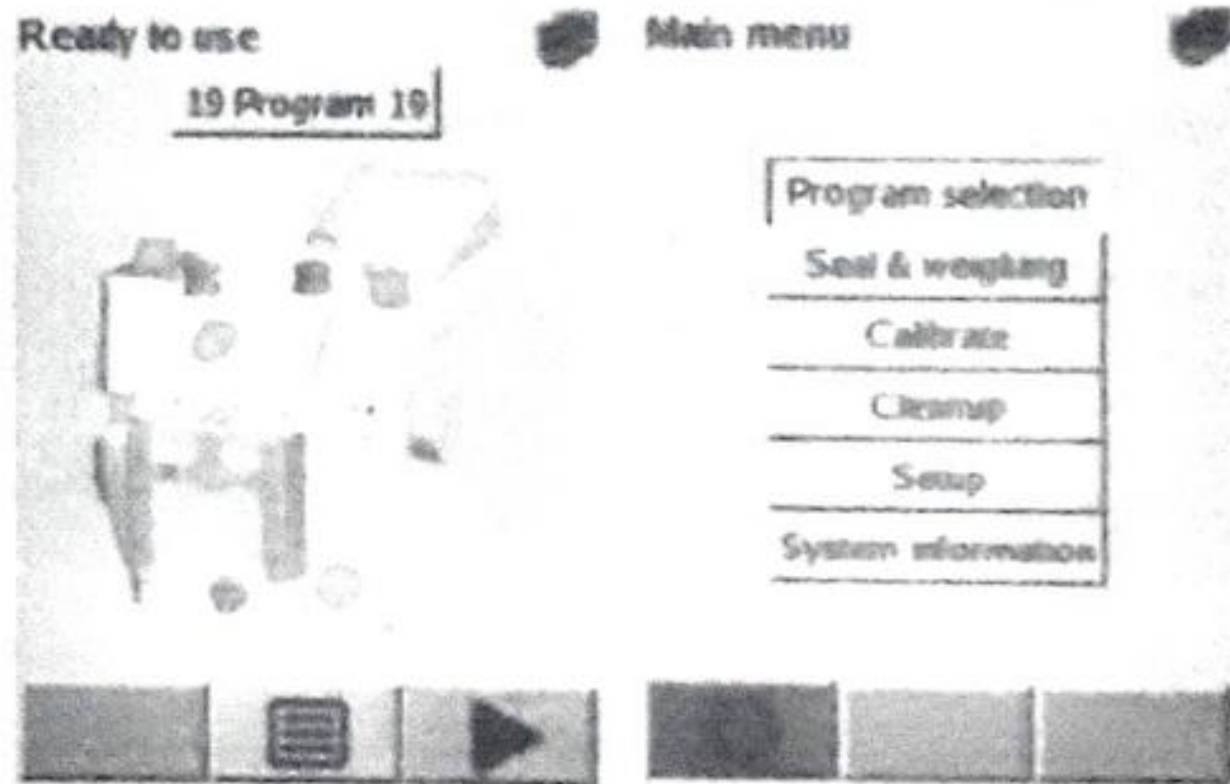
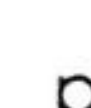
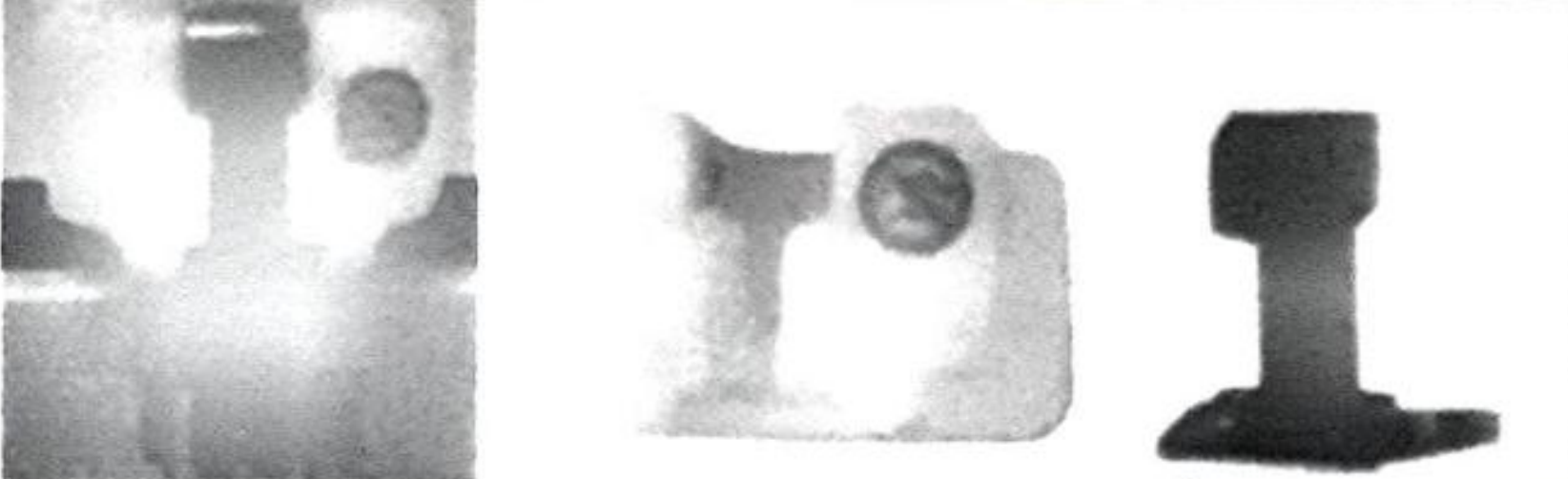
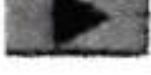


Ref. Guía Rápida de Utilización Compomat G5

1. Verifique que el Compomat G5 se encuentre conectado a una red eléctrica. La conexión se encuentra en la parte de atrás del equipo. Luego encienda el equipo del botón de encendido ubicado arriba del cable de alimentación. También active el CompoMaster en el computador para evitar pérdida de información.	
2. Encienda ahora el Compomat G5 del botón de encendido ubicado en la parte frontal del equipo. Tras el encendido, el CompoMat G5 realiza un autotest. Verifique que el autotest haya cumplido con con todos los requisitos para poder utilizar la tecnología. Todos los ítems deben aparecer con un visto bueno de color verde.	
3. Al aparecer la siguiente imagen en la pantalla ya puede escoger el programa deseado. Presione el botón amarillo que lo llevará al menú principal. En el menú principal presione el botón "Seleccionar Programa" (Program selection)	
4. Pulse sobre las teclas    para desplazarse en las diferentes opciones y escoja un programa de la lista según el protocolo que requiera de fraccionamiento.	5. Para confirmar presione  y luego  para regresar al menú principal.
6. Revise en la imagen principal (dependiendo del programa que escoja) las pinzas por las que tendrá que ubicar las tubuladuras de las bolsas a fraccionar. Las que deberá utilizar en cada programa aparecen de color verde. De esta manera sabrá que las tubuladuras quedarán instaladas de la correctamente.	

7. Si está utilizando bolsa Compoflow, asegúrese de retirar la guía fija metálica ubicada en los abridores Compoflow de la siguiente manera, antes de colgar las bolsas en los pines de sujeción.	
8. Ahora, introduzca la bolsa con la cánula situada dentro del abridor Compoflow (CF), las mordazas cierran perfectamente en paralelo sin dejar huecos visibles. Fíjese muy bien en la ubicación de esta parte de la bolsa en todos los abridores CF del equipo.	
9. Si el sistema Compoflow que contiene la bolsa no se coloca correctamente en el abridor CF, el sistema del Compomat G5 no podrá romper automáticamente las cánulas, evitando el paso de los líquidos por las tubuladoras y arrojando una alarma de error. Verifique esta instalación antes de continuar con el fraccionamiento de las bolsas.	
10. Ahora ubique la bolsa de plasma en la pinza metálica de la balanza PLS dentro del desaireador hasta el tope, y ubique la tubuladura dentro del cabezal de la pinza.	
11. Coloque la bolsa de Glóbulos rojos en la balanza RCC, y ponga la tubuladura dentro del cabezal de la pinza como aparece en la imagen.	
12. Después de ubicar la bolsa presione el botón  e introduzca los datos que el sistema solicita con el lector de código de barras.	13. Al terminar de introducir los datos, automáticamente el Compomat G5 iniciará con el fraccionamiento de la unidad. Tenga cuidado al cerrarse la puerta.
14. Antes de finalizar el procedimiento el equipo le pedirá pesar en las balanzas los componentes sanguíneos fraccionados. Espere a que se establezca el valor en gr de la balanza de PLS que aparece en la pantalla y presione .	15. Haga el mismo procedimiento con el peso en gr que aparece en la pantalla correspondiente a la balanza de RCC y presione .