


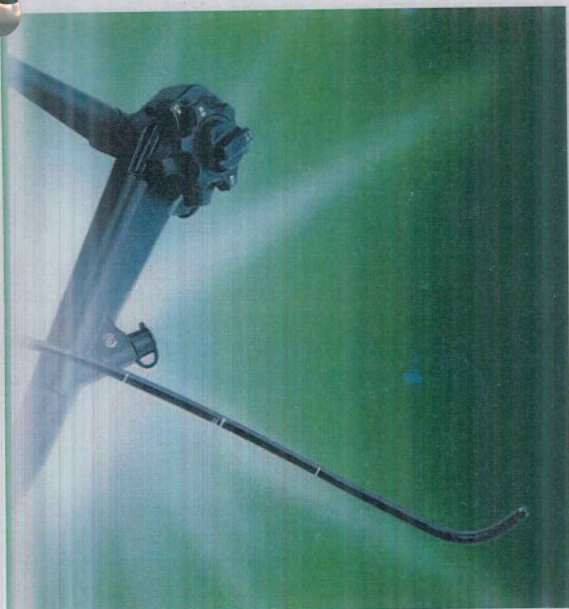

EG-580NW2

VIDEOENDOSCOPIO

FUJIFILM

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

Esta guía rápida
contiene información
importante para el
manejo adecuado y
limpieza de los
endoscopios EG-
580NW2 series marca
FUJIFILM.

JOMEDICAL S.A.S.
Carrera 7 # 124-25
Bogotá, Colombia.

www.jomedical.com

PBX: 6375177

Fax: 6295958

INFORMACIÓN GENERAL

Uso destinado

El Videoendoscopio EG-580NW2 es un endoscopio para el tracto gastrointestinal superior destinado a la observación, diagnóstico y tratamiento endoscópico de la cavidad nasal, la faringe, la laringe, el esófago, el estómago y el duodeno, y a la observación y diagnóstico de la cavidad oral en centros sanitarios bajo el control de un médico.

Durante la Operación del Endoscopio

- El Endoscopio es un instrumento de precisión. La aplicación de una fuerza o impacto anormal sobre la parte de inserción, parte flexible o en el extremo distal puede lesionar el interior del paciente o dañar el instrumento. Al encontrar cualquier resistencia, deberá insertarse lentamente. No forzar la introducción. No inserte ni doble el Endoscopio sin asegurar el área de visión en el monitor.
- Al sujetar el Endoscopio, sosténgalo por la parte de control. Al manipularse por la parte de inserción o parte flexible del conductor de luz, se hace difícil sostener y puede ejercerse una fuerza anormal causando falla del instrumento.
- Utilizar guantes de caucho durante la manipulación del Endoscopio para prevenir cualquier infección o cargas estáticas.

Ambiente adecuado de trabajo

Temperatura: +10 a +40°C

Humedad relativa: 30 a 85% Nota


Presión atmosférica: 70 a 106 kPa


DESCRIPCIÓN DE PARTES DEL EQUIPO


Este producto se compone de las partes siguientes.

[Nota 1] Utilice el procesador para asignar funciones a cada uno de los interruptores.

Para obtener información detallada, consulte el manual de operación del procesador.

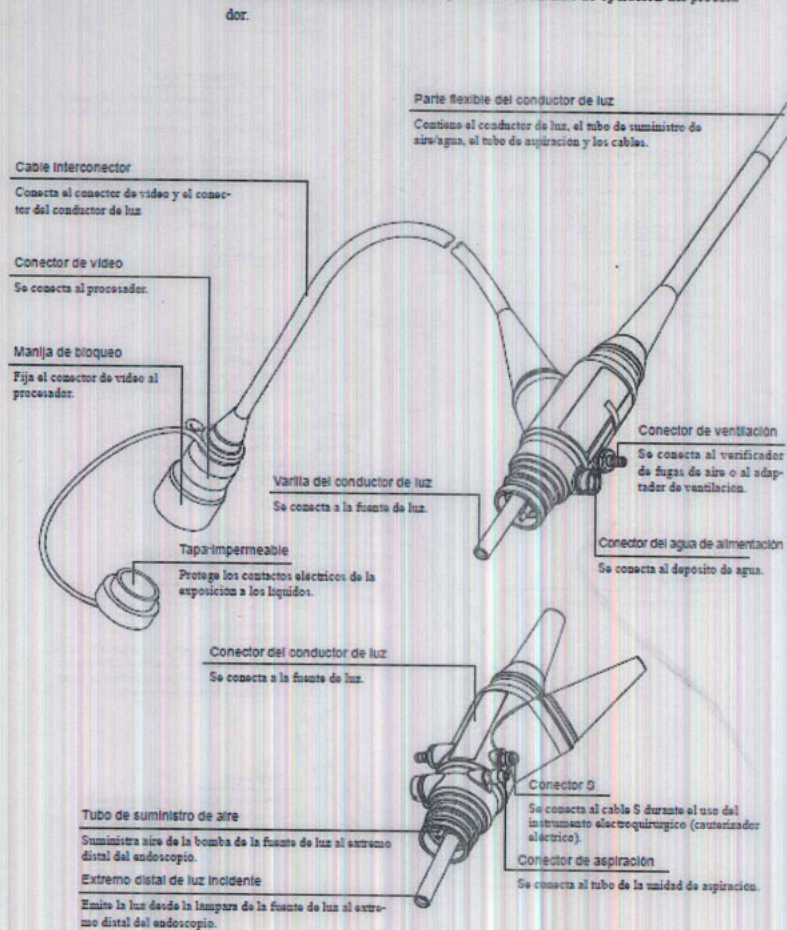

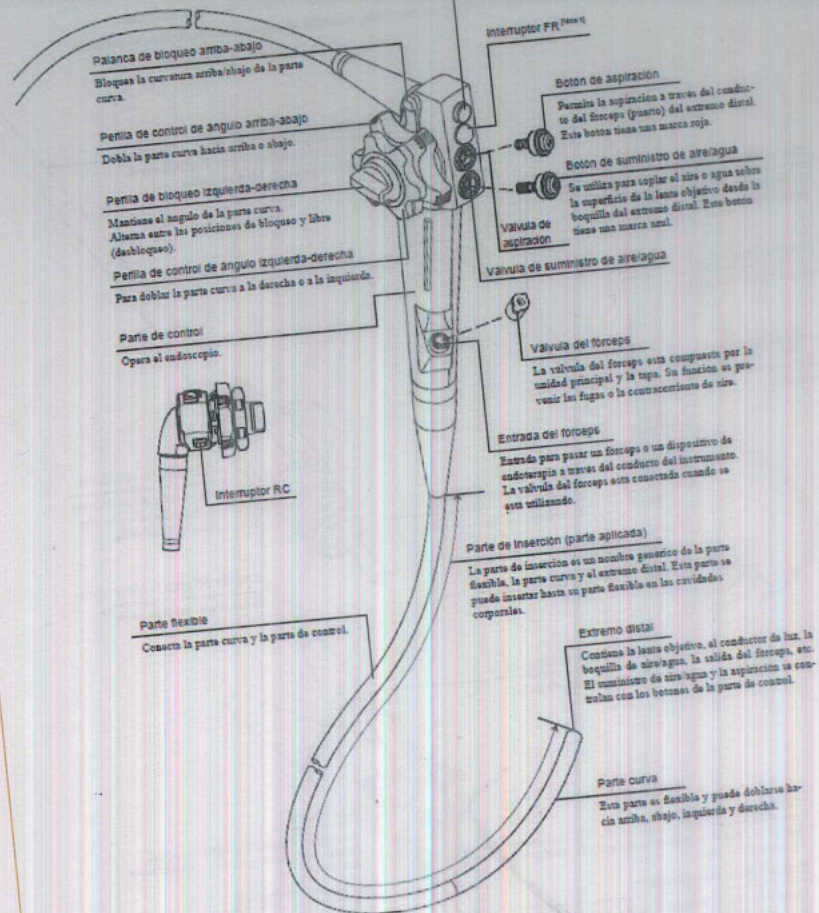

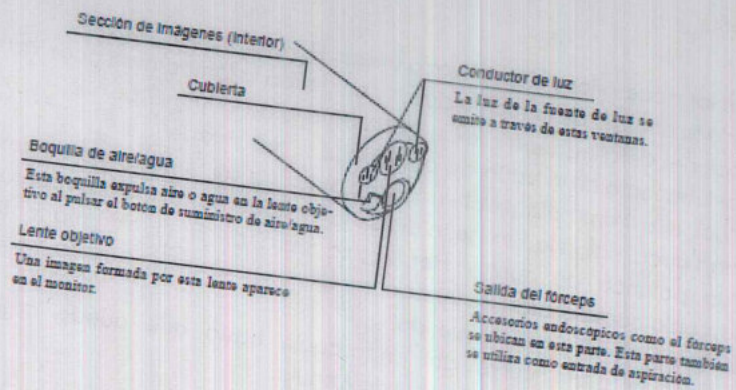

[Nota]: para información detallada de cada una de las partes y funciones del equipo remítase al manual de operación

MÉTODO DE USO

- Prepare los accesorios y dispositivos para utilizar. Ej. Fórceps, boquilla, etc.
- Conecte la energía de la fuente de luz y encienda la lámpara de acuerdo a las instrucciones detalladas en el manual de usuario de la fuente de luz.
- Aplicar lubricante en la parte de inserción (si se requiere)
- Introducir el extremo distal del endoscopio realizando la observación desde la cavidad bucal hacia la faringe, o desde la cavidad nasal hacia la nasofaringe.
- Gire la palanca de control de Angulo para dirigir el extremo distal del endoscopio hacia el área de interés.
- Realice el procedimiento requerido
- Enderezar la parte curva del endoscopio hasta que quede casi recta accionando la palanca de control de Angulo.
- Extraiga lentamente el endoscopio

GUÍA DE REPROCESAMIENTO

[Nota:] Este producto no está esterilizado. Al usarse el equipo por primera vez, deberá realizarse la desinfección o la esterilización apropiada para la aplicación.

Para realizar un reprocesamiento efectivo del endoscopio se debe realizar Lavado Preliminar (realizado al costado de la cama inmediatamente después del uso del Endoscopio), el cual consta de:

- Secado y limpieza exterior de la parte de inserción
- Lavado del conducto de aspiración (con aire y líquido de limpieza)
- Desmontaje del endoscopio de la unidad de procesamiento

Después de realizado el proceso de lavado preliminar se debe seguir el procedimiento de desinfección y/o esterilización descrito en el manual de limpieza y desinfección del endoscopio.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

- Nombre del modelo: EG-580NW2
- Número de serie:
- Fecha de compra: