

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: ELECTROBISTURI	CÓDIGO: NA
	MARCA: VALLEYLAB	VERSIÓN: 1
	MODELO: SSE2L	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023

USO DEL EQUIPO




Dispositivo medico quirurgico que por medio de eléctrica se utiliza para cauterizar, sellar vasos sanguíneos, detener o reducir el sangrado, este equipo utiliza modos como bipolar y monopolar para realizar diferentes procedimientos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Modalidad de corte de salida de 300 vatios
- Medidas de frecuencia de 140 kHz $\pm$ 20 kHz.
- Medida de corriente de 3ma máximo
- Indicadores de volumen de 65 dB
- Requerimientos de alimentación de 85 a 135 V
- Fugas de baja frecuencia entre 50-60 Hz
- Forma de onda bipolar y de corte de 510 KHz

PARTES DEL EQUIPO

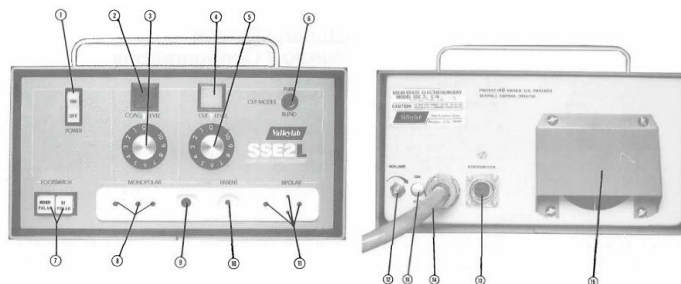

1. Botón de ON/OFF
2. Indicador de coagulación activo
3. Perilla de nivel de coagulación
4. Indicador de corte activo
5. Perilla de nivel de corte
6. Botón para modo de corte puro/blender
7. Botones para seleccionar control de pie monopolar o bipolar
8. Accesorio para control de pie o lápiz monopolar
9. Accesorio para activar demás receptores
10. Accesorio para placa de paciente de retorno
11. Accesorio para control de pie o lápiz bipolar
12. Control de volumen del equipo
13. Accesorio para interruptor de pie
14. Cable de poder AC
15. Ventilador del equipo
16. Interruptor de encendido de seguridad

MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

MODO DE CORTE PURO O COAGULACIÓN:



1. Encienda el equipo
2. Conecte el instrumento monopolar a utilizar
3. Seleccón el botón de control de pie monopolar
4. Seleccione el botón en la opción de corte puro
5. Ajuste con la perilla el nivel de corte requerido
6. Recuerde que entre menos potencia se utilice más seguridad tendrá el paciente.

MODO DE BLENDER:



1. Encienda el equipo
2. Conecte el instrumento monopolar a utilizar
3. Seleccón el botón de control de pie monopolar
4. Seleccione el botón en la opción de blend
5. Ajuste con la perilla el nivel de corte requerido
6. Recuerde que entre menos potencia se utilice más seguridad tendrá el paciente.

MODO MONOPOLAR:



1. Conectar el pedal en su toma correspondiente en la parte posterior del generador.
2. .En caso de ser necesario puede utilizar un accesorio de activación manual o una pieza de mano CUSA en la parte frontal del generador.

  	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: ELECTROBISTURI	CÓDIGO: NA
	MARCA: VALLEYLAB	VERSIÓN: 1
	MODELO: SSE2L	FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2023

</