


GUIA RAPIDA TENSIOMETRO TRANSPORTE/PARED

Identificación de partes:

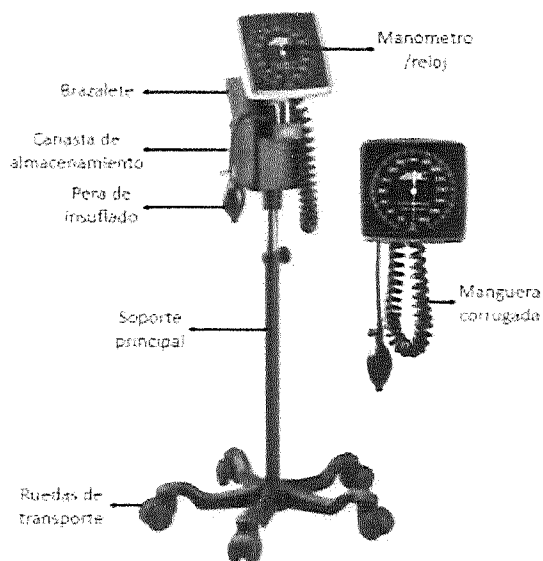

Modo de uso:

Procedimiento de Medición

1. Posición del Paciente

El paciente debe sentarse o acostarse cómodamente. El brazo debe estar totalmente apoyado sobre una superficie plana a nivel del corazón. (Si la posición del brazo varía o no está nivelada con el corazón, los valores de medición obtenidos no serán consistentes con la verdadera presión arterial del paciente).

Cuando está sentado, el paciente debe tener la espalda y el brazo apoyados y sus piernas no deben ser cruzadas.

El paciente debe relajarse antes de la medición cómodamente durante cinco (5) minutos y debe abstenerse de hablar o moverse durante la medición. El observador debe ver el manómetro en una línea directa para evitar "error de Parallax".

2. Aplique el manguito

Coloque el brazalete sobre el brazo superior desnudo con la marca de la arteria colocada directamente sobre la arteria braquial. El borde inferior del manguito debe colocarse aproximadamente (1 ") a una pulgada (2-3cm) por encima del pliegue antecubital. Envuelva el extremo del manguito que no contiene la vejiga alrededor del brazo cómodamente y suavemente y enganche las tiras adhesivas

3. Inflar el manguito

Cierre la válvula girando el tornillo en sentido horario. Palpar la arteria radial mientras se infla el manguito. Asegúrese de inflar el manguito rápidamente apretando el bulbo rápidamente. Inflar el manguito 20-30 mmHg por encima del punto en el que el pulso radial desaparece.

4. Coloque el estetoscopio

Coloque la pieza de pecho en el espacio antecubital debajo del manguito, distal al braquio. No coloque la pieza debajo del brazalete, ya que esto impide una medición precisa. Utilice el lado de campana de un estetoscopio combinado para una detección más clara de los sonidos de Korotkoff (pulso) de tono bajo.

5. Desinflar el manguito

Abra la válvula para desinflar el manguito gradualmente a una velocidad de 2-3 mmHg por segundo.

6. Medición

Registrar la aparición de los sonidos de Korotkoff como la presión sistólica, y la desaparición de estos sonidos como presión diastólica. (Algunos profesionales de la salud recomiendan registrar diastólica 1 y diastólica 2. Diastólica se produce en la fase 4).

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado

Asegúrese de hacer uso correcto de los frenos del carro de transporte, con el fin de evitar caídas del equipo

No exceda los pesos de carga de la canasta de almacenamiento, esto podría ocasionar el quiebre del material

Almacenamiento

NOTA: Este producto mantendrá las características de seguridad y rendimiento especificadas a temperaturas que oscilan entre 10 ° C y 40 ° C (50 ° F a 104 ° F) con un nivel de humedad relativa de 15% a 85%. Este dispositivo se puede almacenar de forma segura a temperaturas que oscilan entre - 4 ° F (-20 ° C) y 131 ° F (55 ° C) con una humedad relativa del 90%.

Limpieza y Desinfección del Manguito

- Limpie con un detergente suave y una solución de agua. Enjuague.
- Limpie con Enzol según las instrucciones del fabricante. Enjuague.
- Limpie con alcohol isopropílico al 70%.
- Lave con detergente suave en agua tibia, ciclo de lavado normal. Retire primero la vejiga.
- El manguito es compatible con 5 ciclos de lavado.