

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: NEUMOINSUFLADOR	CÓDIGO: NA
	MARCA: COVIDIEN	VERSIÓN: 1
	MODELO: F104	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

USO DEL EQUIPO



Dispositivo médico que utiliza Co2 por medio de una sonda para expandir áreas para facilitar las cirugías de laparoscopia, el funcionamiento se basa en expandir y disminuir flujos y presiones dentro de las cavidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- Caudal de 40 L/m
- Calefacción de gas integrada
- Rango de presión de 1-30 mm HG

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIB de alto riesgo.


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN




La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%, la manguera de calentamiento se esteriliza normalmente en autoclave hasta 100 veces.

PARTES DEL EQUIPO

DELANTERA:

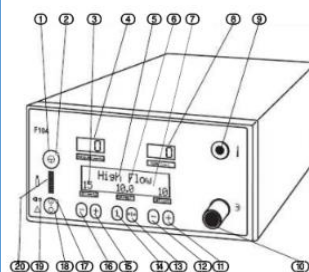

TRASERA:

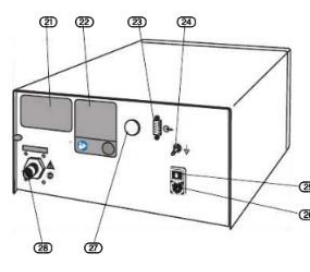

DELANTERA:

1. Botón de inicio y parada de insuflación
2. Indicador funcionamiento
3. Indicador presión nominal
4. Indicador presión real
5. Indicador de errores
6. Indicador de consumo gas
7. Indicador caudal nominal
8. Indicador caudal real
9. Conexión de calefacción gas
10. Conexión de tubo insuflación
11. Botón de aumento de caudal gas nominal
12. Botón de disminución de caudal gas nominal
13. Botón de RESET
14. Botón de menú
15. Botón de aumento de presión nominal
16. Botón de disminución de presión nominal

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Encienda el equipo
2. Conecte el CO2 al suministro de gas trasero
3. Abra la tubería de CO2
4. Verifique que el equipo supere el test automático de encendido
5. Verifique el encendido de los indicadores de AC y funcionamiento
6. Verifique que la presión del gas nominal se encuentre llene o con la presión suficiente para el procedimiento
7. Conecte el tubo de insuflación ítem 10

PRESELECCIÓN DE PRESIÓN NOMINAL:





1. Seleccione el valor de presión nominal entre 1-30 mm HG ítem 15-16
2. Si es necesario aumentar la presión nominal a ≥ 15 mm HG, deje presionado el botón de aumentar por 3 segundos y cuando deje de parpadear seleccione la presión deseada

PRESELECCIÓN DE CAUDAL NOMINAL:



1. Seleccione el valor de caudal nominal entre los valores de fábrica máximos y mínimos de 40L ítem 11-12
2. Verifique que el indicador de funcionamiento este encendido
3. Si el caudal nominal inicial es inferior o igual a 5 L/m se mostrara en el equipo "Veress"

 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE CENTRO CARDIOLOGÍA	 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES UAM	 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD RESOLUCIÓN 9677 ABRIL 2013 - 2014	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
			EQUIPO: NEUMOINSUFLADOR	CÓDIGO: NA
			MARCA: COVIDIEN	VERSIÓN: 1
			MODELO: F104	FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2023

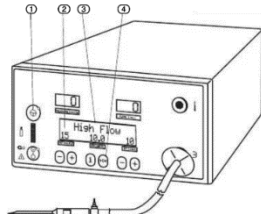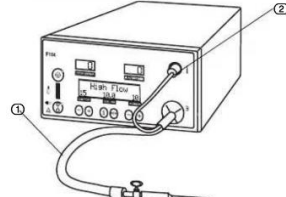TEST DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO: 1. Asegúrese que el suministro de gas esté conectado y abierto 2. Encienda el equipo del botón de ON/OFF 3. Verifique que el equipo supere su auto test de encendido 4. Conecte el dispositivo con un filtro hidrófobo, un tubo de insuflación y una cánula 5. Seleccione la presión nominal a 15 mm HG y caudal de gas de 1 6. Pulse el botón RESET y verifique que en la pantalla aparece 0.0 7. Pulse el botón de START 8. Verifique que el equipo insufla 9. Verifique que aparece en pantalla el mensaje “oclusión” presión real=0 y caudal=0 10. Pulse el botón STOP y retire la cánula y ocluya el tubo de insuflación para verificar posibles fugas en los circuitos.  17. Indicador de Stand by del equipo 18. Botón de ON/OFF 19. Indicador de conexión de AC 20. Indicador de suministro de gas PARTE TRASERA: 21. Placa de características del equipo 22. Placa de datos específicos del equipo 23. Interfaz de servicio 24. Conexión para accesorio de equipotencial 25. Portafusibles 26. Enchufe del equipo 27. Interfaz del equipo 28. Conexión del gas de CO2 POSIBLES ALARMAS Y ERRORES  <table><tr><td>Gas insuficiente</td><td>Verifique que el cilindro de CO2 se encuentre cargado para su correcto funcionamiento y verifique el estado del indicador de consumo de gas.</td></tr><tr><td>Oclusión</td><td>Verifique que no hay oclusión en el tubo de insuflación o la cánula</td></tr><tr><td>Contaminación</td><td>El tubo de insuflación tiene líquido.</td></tr></table> 4. Si el caudal nominal es mayor a 5 L/m se mostrara “Hight Flow”, pulse el botón de iniciar ítem 1. CONEXIÓN DEL TUBO DE GAS CALENTADOR:  1. Conecte el filtro y el tubo de calefacción ítem 9 2. Conecte el enchufe del tubo calentador con la conexión de calefacción de gas 3. Conecte el tubo de insuflación a la conexión de la cánula 4. Seleccione el botón de START para calentar automáticamente el gas  INICIO DE INSUFLACIÓN:  1. Seleccione la tecla de START para iniciar insuflación 2. Verifique que el valor de consumo de gas que aparece en pantalla sea el deseado 3. Verifique que el valor de caudal real que aparece en pantalla sea el deseado.	Gas insuficiente	Verifique que el cilindro de CO2 se encuentre cargado para su correcto funcionamiento y verifique el estado del indicador de consumo de gas.	Oclusión	Verifique que no hay oclusión en el tubo de insuflación o la cánula	Contaminación	El tubo de insuflación tiene líquido.
Gas insuficiente	Verifique que el cilindro de CO2 se encuentre cargado para su correcto funcionamiento y verifique el estado del indicador de consumo de gas.					
Oclusión	Verifique que no hay oclusión en el tubo de insuflación o la cánula					
Contaminación	El tubo de insuflación tiene líquido.					