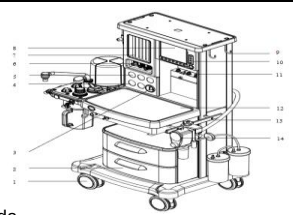
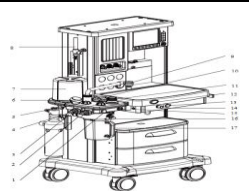
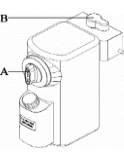
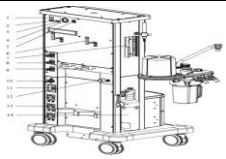
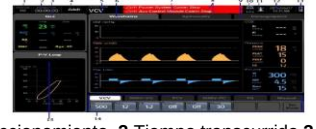


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>2</td> <td>MES</td> <td>09</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2024</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	2	MES	09	AÑO	2024	
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	2	MES	09														
AÑO	2024																
Nombre del equipo:	Máquina de anestesia	Modelo:	EX-35	Riesgo del equipo:	IIB												
Marca:	WATO			Clasificación del equipo:	Tratamiento												
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTE FRONTAL DEL EQUIPO		PARTES DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN													
 El equipo de anestesia está diseñado para proporcionar anestesia por respiración a pacientes durante una intervención quirúrgica. Debe ser utilizado sólo por personal de anestesia cualificado que haya recibido la formación adecuada para su uso.		 1.Rueda 2.Cajon 3.Interruptor del sistema 4.Indicadores de presión de las botellas 5.Indicadores de presión de los tubos 6.Controles de flujo 7.Caudalímetro 8.Pantalla 9.Gancho para la placa superior 10.Panel de control del ventilador anestésico 11.Colector 12.Mesa de trabajo 13.Tirador 14.Dispositivo de succión de presión negativa		 1.Conector del sensor O2 2.Conector de inspiración 3.Conector de espiración 4.Válvula de retención inspiratoria 5.Válvula de retención espiratoria 6.Indicador de presión de las vías respiratorias 7.Lojamiento del fuelle 8.Suministro de O2 auxiliar 9.Brazo de la bolsa 10.Interruptor de ventilación por bolsa o mecánica 11.Válvula APL (límite de presión de las vías respiratorias, del inglés Airway Pressure Limit) 12.Botón de flujo rápido (flush) de O2 13.Interruptor ACGO (salida de gas común auxiliar, del inglés Auxiliary Common Gas Outlet) 14.Salida ACGO independiente 15.Conector del cable del sensor de O2 16.Manija giratoria 17.Recipiente de absorbente de CO2													
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																	
1.Tamaño: 1.375 x 715 x 620 mm (alto x ancho x fondo) (sin incluir el sistema de respiración) 2.Peso: Menor a 120 kg (sin vaporizadores ni botellas) 3.Pantalla: 10.4" 4.Batería: 90min 5.Resolución pantalla: 800x600 pixeles																	
ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO		 El vaporizador se puede montar en el colector. A. Control de concentración: Pulse y gire el control de concentración para definir la concentración de agente anestésico. B. Palanca de bloqueo: Gire la palanca de bloqueo A en el sentido de las agujas del reloj para sujetar el vaporizador en su sitio.															
1. Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra. 2. Revise que el equipo este correctamente conectado al suministro de gas. 3. Asegúrese que los vaporizadores se encuentren bien ajustados cuando se realicen las pruebas y antes de cada intervención. 4. No adopte controles de flujo a la fuerza. 5. No realice calibraciones de flujo cuando el equipo se encuentre operando.																	
				LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN													
				1.No limpie el monitor con material abrasivo. 2. En caso de utilizar desinfectantes líquidos, retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco. 3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo. 4. Llevar registro de limpieza y desinfección. adecuadamente mínimo una vez al día. 5. Utilizar alcohol al 70% como producto de contingencia.													
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																	
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																	
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																	

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 2	MES: 09	AÑO: 2024
Nombre del equipo:	Máquina de anestesia	Modelo:	EX-35		Riesgo del equipo:	IIB
Marca:	WATO			Clasificación del equipo:	Tratamiento	
PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO		PRUEBAS DEL SISTEMA		VENTILACIÓN POR CONTROL DE VOLUMEN (VCV)		
 - Conector de red - Conector DB9 - Interfaz de interconexión del equipo. - Ventilador - Altavoz - Gancho de bobinado del cable - Carril guía - Conectores de suministro de gas - Soportes para botellas - Entrada de CA - Ruptor (interruptor de alimentación) - Conector - Tomas de corriente auxiliares		La intervención del usuario no es requerida 100% en esta etapa. El sistema verifica las funcionalidades básicas del sistema: comunicación con los subsistemas, la integridad de la memoria interna y las conexiones de gas, mostrando un progreso de las mismas pruebas: PRUEBAS DEL FUELLE - ponga el sistema en espera y ponga el interruptor en la opción de ventilación mecánica. - Ponga los controles de flujo al mínimo. - Conecte la pieza en Y, ocluya la salida de gas de la pieza en Y. - Pulse el botón de Flush O2. - Verifique el funcionamiento del fuelle por medio del ciclaje de la máquina, si este fuelle baja, compruebe PRUEBAS DE VENTILACIÓN MANUAL - Ponga el sistema en espera. - Conecte la pieza en Y. - Ajuste la válvula APL en 75 cmH2O. - Conecte la bolsa de respiración manual. - Ajuste los controles de flujo a cero. - Verifique que el interruptor se encuentre en ventilación manual. - Pulse el botón de flush de O2 entre 25 a 35 cmH2O. - Compruebe el funcionamiento del fuelle. - Presione continuar en la pantalla. PRUEBAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA - Ponga el sistema en espera y conecte la pieza en Y. - Ajuste los controles de flujo en cero. - Verifique que el interruptor se encuentre en ventilación mecánica y pulse flush de O2 hasta que se llene todo. - Compruebe el funcionamiento del fuelle y del equipo.		Es un modo de ventilación totalmente mecánico. En modo VCV, cada vez que se inicia la ventilación mecánica, se suministra gas al paciente a un flujo constante, que alcanza el valor de VC preestablecido dentro del tiempo de suministro del gas. VENTILACIÓN POR CONTROL DE PRESIÓN (VCP) En el modo VCP, cada vez que se inicia la ventilación mecánica, Pvr aumenta rápidamente hasta el valor de Plimit VENTILACIÓN INTERMITENTE SINCRONIZADA(SIMV) SIMV-VC: Se suministra ventilación controlada por volumen a paciente por fases en el intervalo preestablecido. SIMV-PC: Se suministra ventilación controlada por presión al paciente por fases en el intervalo preestablecido. VENTILACIÓN CON PRESIÓN DE SOPORTE (PSV) Es un modo de respiración auxiliar que requiere que la respiración espontánea del paciente active la ventilación mecánica. CONEXIÓN PARA MEDICIÓN DE CO2 - Una el colector de agua al fijador del colector. - Conecte e instale el módulo de CO2. - Verifique su correcto funcionamiento. - Verifique que la línea de CO2 se encuentra instalada de manera correcta. - En caso de ser necesario revise la trampa de agua del equipo. EN CASO DE ACTIVACIÓN DE ALARMAS Compruebe el estado del paciente, determine el parámetro de alarma, Identifique el origen de la alarma, realice las acciones pertinentes para eliminar la alarma, compruebe el funcionamiento del fuelle, revise el estado de batería del equipo.		
PANEL DE CONTROL						
 - Gas de accionamiento. - Tiempo transcurrido. - Área de gas. - Tamaño del paciente. - Ventilación actual. - Formas de onda. - Pestaña espirometría. - Área de mensajes de alarma. - Ficha demografía. - Icono de silencio de alarma. - Icono de calentador del sistema de respiración. - Fecha y hora. - Icono de estado de la fuente y de la batería. - Modo ventilación. - Área de espirometría.						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						