

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	




VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE


MARCA: MAGNAMED
MODELO: OXYMAG

Recomendaciones antes de usar


- Verifique que el equipo esta apagado. Realice la inspección visual del equipo y sus componentes para identificar la integridad de estos.
- Verifique que todos los componentes del equipo están conectados correctamente.
- Realice el **test inicial** oprimiendo el botón de TEST en la pantalla de inicio y siguiendo las indicaciones en pantalla.

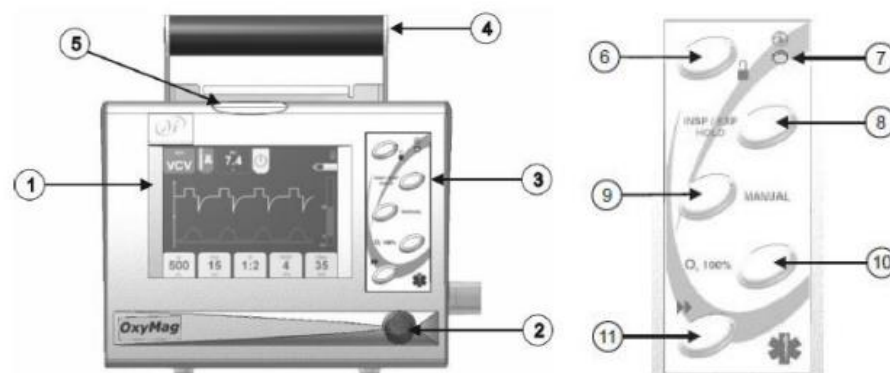

No.	Nombre	No.	Nombre
1	Display con touch screen	7	LED conexión a la red eléctrica(Verde)
2	Botón para girar y confirmar	8	Techa HOLD (Pausa)
3	Teclado	9	Tecla manual
4	Agarradera	10	Tecla O ₂ 100%
5	Luz indicadora de alarma (rojo)	11	Tecla pagina
6	Bloqueo de pantalla sensible al tacto		

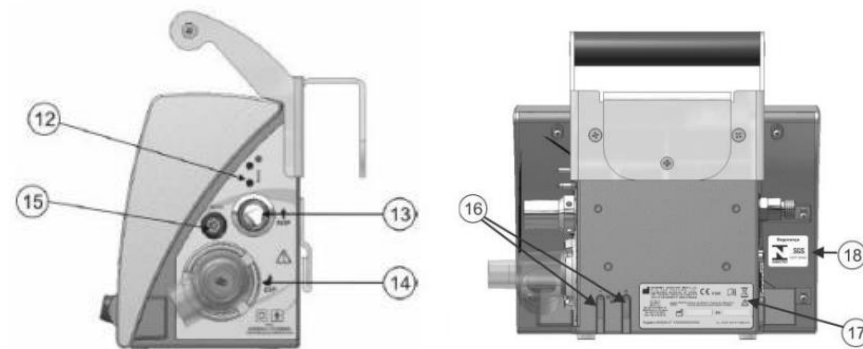

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

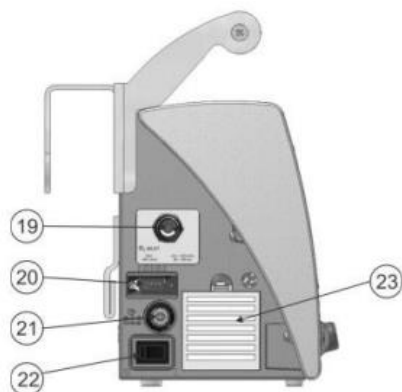

No.	Nombre	No.	Nombre
12	Conexión del sensor de flujo	18	Sello Inmetro
13	Conector 22M/15F del flujo inspiratorio	19	Entrada de oxígeno
14	Válvula espiratoria	20	Conexión serial
15	Conector del sensor de CO ₂ o sensor SpO ₂	21	Entrada +12V fuente AC/ED externo
16	Conector de alimentación eléctrica – Base	22	Llave encendido/apagado
17	Etiqueta	23	Filtro de entrada de aire

MODO DE OPERACIÓN.

- Encienda el ventilador y verifique que se emiten tres “beeps” y que la luz indicadora de alarma fue accionada.
- Seleccione el tipo de paciente a través de las figuras correspondientes mostradas en pantalla. Tenga en cuenta que los valores suministrados cambian dependiendo del paciente como se muestra a continuación:

Parametro	Tipo de paciente		
	Neonatal	Infantil	Adulto
Pinsp	15 cmH ₂ O	15 cmH ₂ O	-
Frec	40 min ⁻¹	22 min ⁻¹	17 min ⁻¹
Tinsp	0.5 s	-	-
PEEP	5 cmH ₂ O	5 cmH ₂ O	5 cmH ₂ O
Flujo	6 L. min ⁻¹	-	-
FiO₂	80 %	80%	-
Disparo Flujo	OFF	OFF	OFF
Disparo Presion	OFF	OFF	OFF
Tiempo de subida	-	0,1 s	-
Vt	-	-	350 mL
Relacion I:E	-	1:2	1:2
Pmax	-	-	35 cmH ₂ O
Pausa	-	-	30%
Tiempo de flujo	-	-	Cuadrado

- Presione el botón de modalidad de ventilación **VCV** para presentar la pantalla de selección de modalidad
- Presione el botón de modalidad deseada.
- Para modificar un parámetro, presione el botón correspondiente. El parámetro se volverá amarillo y permitirá su modificación. Gire el botón en sentido horario o anti-horario para aumentar o reducir su valor. Para confirmar de un toque al botón del parámetro que está siendo ajustado.
- En caso de ser necesario, presione el botón ALARM para ajustar las alarmas.
- En caso de ser necesario, presione el botón CONFIG para modificar: altura del paciente, encender/apagar NIV o VNI con el uso de mascara, encender/apagar la compensación del blender externo, conectar/desconectar la función suspiro, seleccionar el idioma del equipo, ajustar el volumen y las unidades de presión o visualizar los datos del último TEST, horas de uso del equipo y más información.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Parte	Limpieza
Dispositivo	Limpiar las partes externas del equipo con un paño limpio y suave, humedecido en solución germicida. Una vez limpio, secar con un paño limpio y suave.

RECOMENDACIONES:

- El equipo y sus partes debe pasar por un proceso de limpieza cada vez que sea utilizado.
- Desmontar todos los componentes que entran en contacto con los gases respiratorios antes de realizar su limpieza y desinfección.
- Tener cuidado que ningún residuo del producto de limpieza se acumule en las conexiones del equipo.
- Seguir el procedimiento recomendado por la institución.

ADVERTENCIAS:

- No utilizar agentes abrasivos.
- No utilizar alcohol para limpiar las partes de plástico.
- No sumergir el equipo en ningún líquido.
- No sumergir los sensores en agua, solventes o solución de limpieza.
- No esterilice por irradiación, vapor o esterilización por oxido.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

FALLA	DESCRIPCION
Flujo O2	Fallo de flujo. Verificar que la presión de entrada de oxígeno esta entre 60 y 150 psi, de lo contrario no usar el equipo.
Sensor interno	Falla en el control de flujo. Contacte a asistencia técnica.
Flujo aire + O2	Falta de flujo. Verificar que la presión de entrada de oxígeno esta entre 60 y 150 psi, de lo contrario no usar el equipo.
Célula de O2	No para garantía en la medida de O2. Contacte a asistencia técnica.
Sensor proximal.	Verifique las conexiones del circuito respiratorio y del sensor de flujo. Este fallo hará que haya una variación de hasta 10% en las medidas de volumen suministradas y solo serán monitoreados los parámetros Pmax, PEEP, Pplat, Pmean y el grafico de presión x tiempo.
Válvula espiratoria	Falla en el monitoreo y control de la presión. Verifique el posicionamiento de la membrana de la válvula espiratoria. Si el fallo persiste, no usar el equipo.
Sensor de presión	

ALARMA	DESCRIPCIÓN
Batería baja	Indica que la batería interna está finalizando su carga. Disponga de los medios adecuados de soporte de ventilación para el paciente.
Apnea	Se dispara cuando ha transcurrido un tiempo desde la última inspiración superior al ajustado. Verifique el estado del paciente.
Obstrucción	Hay una obstrucción en el circuito respiratorio que impide la completa espiración del paciente. Verifique el estado del paciente y el circuito.
Desconexión	Hay una desconexión en el circuito respiratorio que impide ventilar en forma adecuada al paciente. Verifique el estado del paciente, el circuito y sus conexiones.
Presión máxima alta/baja	La presión de la ventilación superior o está por debajo del valor ajustado como límite de alarma. Verifique el estado del paciente.
Volumen alto/bajo	El volumen medido supero o es menor al valor ajustado como límite de alarma. Verifique el estado del paciente.
FIO2 Alto/bajo	El valor de FIO2 medido supero o es menor al valor ajustado como límite de alarma. Verifique el estado del paciente.
FC alta/baja	El valor de FC medido supero o es menor al valor ajustado como límite de alarma. Verifique el estado del paciente.