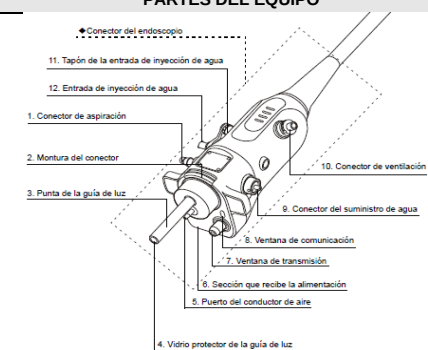
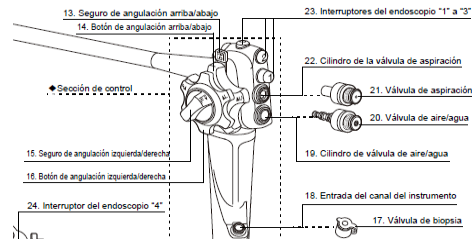
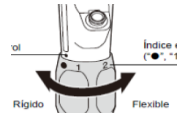
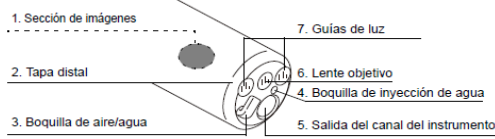
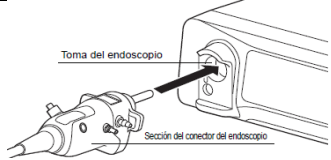


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012 VERSIÓN: 001														
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN: <table border="1"> <tr> <td>PAGINA</td> <td>01</td> <td>DE</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>15</td> <td>MES</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>AÑO</td> <td colspan="3">2023</td> </tr> </table>				PAGINA	01	DE	01	DÍA	15	MES	03	AÑO	2023	
PAGINA	01	DE	01														
DÍA	15	MES	03														
AÑO	2023																
Nombre del equipo:	VIDEOGASTROSCOPIO	Modelo:	EG-760Z / EG-760R		Riesgo del equipo:	IIA											
Marca:	FUJIFILM				Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO											
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO													
 Dispositivo medico de diagnostico y tratamiento para el tracto gastrointestinal superior destinado a la observación, diagnóstico y tratamiento endoscópico de la faringe, la laringe, el esófago, el estómago y el duodeno.																	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																	
1. Dirección de visualización: Frontal		1. Conector de aspiración		13. Seguro de angulación arriba/ abajo													
2. Campo de visión: 140º		2. Montura del conector para la fuente de luz		14. Botón de angulación arriba/ abajo													
3. Rango de Observación Normal: 3 - 100mm		3. Punta de la guía de luz		15. Seguro de angulación izquierda/ derecha													
4. Diámetro de canal de trabajo: 2.8 mm		4. Vidrio protector de la guía de luz		16. Botón de angulación izquierda/ derecha													
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		5. Puerto de conducto de aire		17. Válvula de biopsia													
1. Lavado preliminar del colonoscopio con jabon enzimático.		6. Sección que recibe alimentación		18. Entrada del canal del instrumento													
2. Desmontaje del endoscopio de la unidad.		7. Ventana de transmisión		19. Conexión de valvula de aire/ agua													
3. Realizar el procedimiento de desinfección /o esterilización.		8. Ventana de comunicación		20. Válvula de aire/ agua													
4. Realizar la pre limpieza del equipo.		9. Conexión para válvula de suministro de agua		21. Válvula de aspiración													
5. Realizar las pruebas de fuga correspondientes.		10. Conexión para válvula de aire		22. Conexión de válvula de aspiración													
6. Realizar limpieza mecanica del equipo.		11. Tapón de entrada de inyección de agua		23. Interruptores de endoscopio 1 a 3													
7. Realizar desinfección de alto nivel del equipo.		12. Entrada de inyección de agua		24. Interruptor de endoscopio N° 4													
8. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución.		PRECAUCIONES GENERALES		AJUSTE DE FLEXIBILIDAD DEL EQUIPO													
		1. Asegurese de que no se adhiera la humedad o sustancias extrañas al conector del endoscopio con la fuente de luz.															
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:																	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.																	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica																	
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo																	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.																	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.																	
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas																	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.																	

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
				15	03	2023		
Nombre del equipo: VIDEOGASTROSCOPIO		Modelo:	EG-760Z / EG-760R		Riesgo del equipo:		IIA	
Marca: FUJIFILM				Clasificación del equipo:		DIAGNOSTICO		
PARTES DEL EXTREMO DISTAL DEL ENDOSCOPIO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO				
		1. Realice la inspección del extremo distal, realizando pruebas de funcionamiento y verificación de la punta: Revisando que no presente rasguños, grietas ni anomalías. 2. Gire los seguros de angulación para realizar diferentes pruebas de funcionamiento. 3. Coloque la válvula de biopsia en la entrada del canal del instrumento del endoscopio. 4. Coloque la válvula de aspiración en la conexión del equipo, alinee las dos crestas metálicas de la válvula de aspiración con los dos orificios de conexión y empuje la válvula con firmeza. 5. Conecte la válvula de aire/agua en la conexión del equipo y empuje la válvula con firmeza. 6. Coloque el tubo J en el endoscopio después de conectar el endoscopio a la fuente de luz.		10. Encienda el carro, el procesador, la fuente de luz y el monitor. 11. Realice pruebas básicas para visualizar que la imagen se este entregando de manera correcta en el monitor. 12. Coloque al paciente de forma adecuada siguiendo los protocolos de la institución. 13. Dirija el extremo distal del endoscopio hacia el lugar de la biopsia y realice el procedimiento requerido. 14. Realice las tomas necesarias para el estudio. 15. Endurezca la parte curva del endoscopio hasta que quede casi recta accionando las perillas de control de Angulo. 16. Extraiga lentamente el equipo, después de terminar el estudio.				
1. Sección de imágenes 2. Tapa distal 3. Boquilla de aire/ agua 4. Boquilla de inyección de agua 5. Salida del canal del instrumento 6. Lente objetivo 7. Guías de luz								
PASOS A SEGUIR ANTES DE UTILIZAR EL VIDEOGASTROSCOPIO				ALARMAS Y POSIBLES ERRORES				
1. Prepare los equipos y accesorios del mismo.		7. Inserte el conector del endoscopio en la toma de la fuente de luz del endoscopio con la etiqueta. donde el nombre de modelo este orientado hacia arriba		No hay imagen en el monitor de video. Imagen oscura en la pantalla		Los equipos no estan conectados a la red electrica. El endoscopio no está conectado correctamente a la fuente de luz. El nivel de brillo está ajustado en la posición "MIN" El modo iris está ajustado en "MAXIMO"		
								
ACCESORIOS QUE VIENEN CON EL EQUIPO								
1. Válvula de irrigación aire/agua AW-603		8. Alinee la clavija del conector del suministro de agua del endoscopio con la ranura en el conector del tanque de agua.		El equipo no ajusta la flexibilidad		La sección de inserción está doblada.		
2. Válvula de succión SB-605		9. Coloque el tanque de agua en la posición especificada.		No se pueden grabar las imágenes		El grabador de imágenes no está conectado.		
3. Válvula de tapón de biopsia FOV-DV7								
4. Adpatador CAP auxiliar								
5. Kit de lavado								
6. Válvula de lavado de seguridad								
7. Cepillos cortos y largos de limpieza								
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:								
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.								
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica								
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo								
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.								
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.								
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas								
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.								