

GUIA RAPIDA TIVATO 700

Mover el equipo

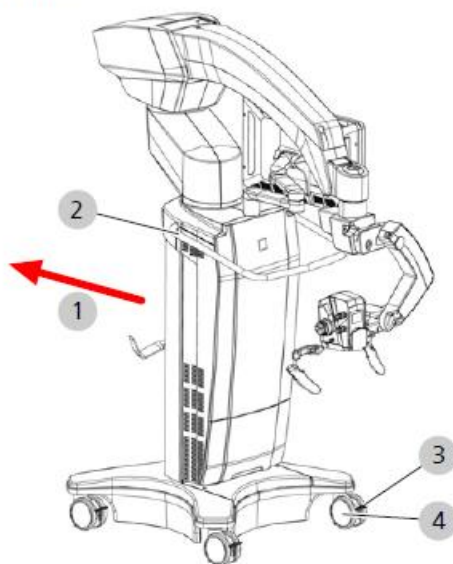


Fig. 64: Mover el equipo

1	Dirección hacia la que se tiene que empujar 	2	Empuñadura de transporte
3	Frenos	4	Rueda orientable

1. Agarre el equipo por la empuñadura de transporte.
2. Suelte todos los frenos.
3. Empuje el equipo con cuidado hasta alcanzar una posición adecuada para usted.
4. Fije la posición con todos los frenos.
5. Compruebe si el equipo está fijamente asentado. Empuje y tire de la empuñadura de transporte.

Desde 1957



We make it visible.

Colocar SMARTDRAPE

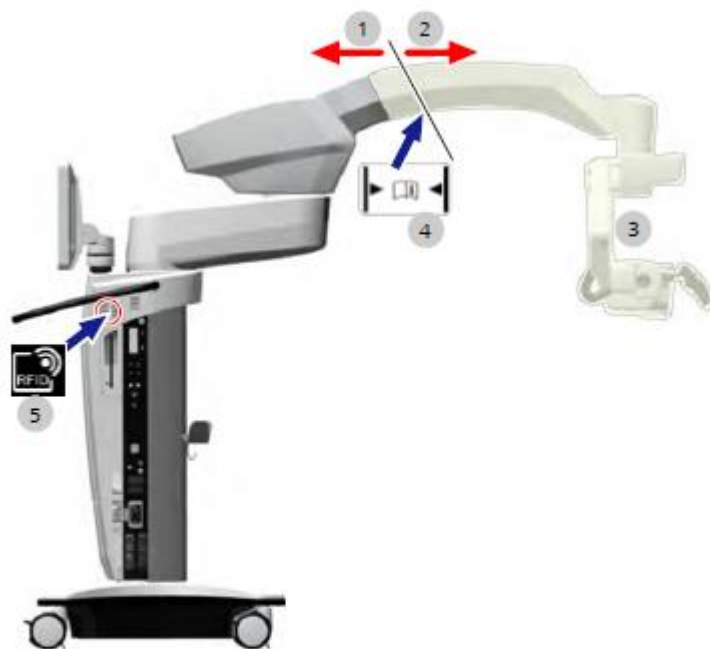


Fig. 68: Colocar SMARTDRAPE

1	Área inestéril	2	Área estéril
3	Zona efectiva del sistema de aspiración de drapes	4	Marca: Cerrar aquí SMART-DRAPE herméticamente
5	Lector RFID		

Autobalance

1. Autobalance de todo el equipo: Toque en la pantalla táctil el botón [Sistema] en el menú adicional "Manejo avanzado".
2. Autobalance Drape (equilibrado del 3): Toque en la pantalla táctil el botón [Drape] en el menú adicional "Manejo avanzado".

Con un equipo correctamente equilibrado podrá mover el microscopio quirúrgico casi sin aplicar fuerza.

Configurar empuñaduras

En el menú "Empuñaduras" puede asignar funciones específicas a los botones.

Los ajustes realizados en el menú "Empuñaduras" sólo son válidos para el usuario actual.

1. Toque  Ajustes →  Manejo → Empuñaduras.



2. Para asignar una función a una tecla: Toque la letra correspondiente, p. ej. [A].
⇒ En el campo de selección de la derecha aparece un campo con las funciones disponibles.
3. Toque la función que quiera asignar a la tecla.
⇒ Se adopta la función y se muestra junto al símbolo de la tecla.
4. Las funciones de zoom y enfoque de los dos interruptores basculantes pueden intercambiarse y cambiar la dirección (+/-).
5. Toque los símbolos de interruptor basculante [E-F], [G-H].
⇒ En el campo de selección de la derecha aparecen las funciones disponibles.
6. Toque una función que quiera asignar al interruptor basculante.

Desde 1957



We make it visible.

Administrar pacientes

La administración de pacientes se realiza exclusivamente de forma externa por medio de un dispositivo USB, a través de un disco duro integrado opcional o a través de una conexión a una red.

En el menú "Paciente" se pueden gestionar datos de pacientes. En el menú de pacientes se pueden guardar, exportar y borrar imágenes, vídeos y datos.

Añadir pacientes

- ☒ Hay una memoria conectada (memoria USB, disco duro integrado opcional) o se ha establecido conexión con una red.

1. Pulse el botón [Paciente] en la barra de estado.

⇒ Se muestra el menú "Paciente".

2. Pulse el botón [Añadir paciente] .

⇒ Se muestra el menú "Crear paciente nuevo".

3. Toque el campo respectivo: [Nombre, Apellidos, Sexo, Fecha de nacimiento, Patient ID, Comentario ...].

⇒ Se muestra el teclado virtual.

4. Introduzca los datos de paciente que desee.

Si se indica la fecha en un formato incorrecto, en la pantalla táctil aparecerá el siguiente aviso: "Formato erróneo. Utilice MM.DD.AAA."

5. Pulse el botón [Listo].

⇒ Se guardan los datos de paciente del paciente actual.

6. Para cerrar el menú "Paciente": Pulse el botón [Paciente] o el botón  en la barra de menú.