


7 27 1 4 646 1046
7 27 1 4 655 0145
Taxis 21 Rte. 29 21
Bogotá D.C. - Colombia
servicio@novatecnica.com.co



NIHON KOHDEN

GENERALIDADES

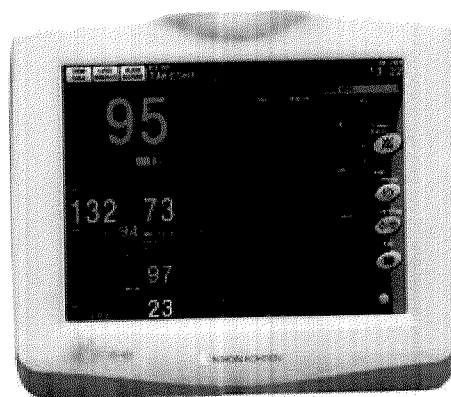

DESCRIPCIÓN DE PANELES

Indicador de alarma

Parpaden la luz en rojo o en amarillo, o se enciende en color amarillo o azul de acuerdo con los valores de la alarma. Parpadea la luz verde en sincronización con el pulso o el QRS del paciente.

Pantalla táctil

Muestra los datos de la monitorización. Si toca una tecla o los datos en la pantalla, cambia la pantalla visualizada y los valores.

Interruptor de encendido


Pulse para encender el monitor. Cuando apague el monitor, mantenga pulsada la tecla durante más de un segundo.

Lámpara de alimentación

Se enciende cuando la alimentación de la batería está encendida.

Lámpara de alimentación de red
Se enciende cuando el cable de alimentación está conectado entre la toma de alimentación de CA y la salida de CA.

Luz de batería
Indica el estado del paquete de batería en el soporte del paquete de batería.

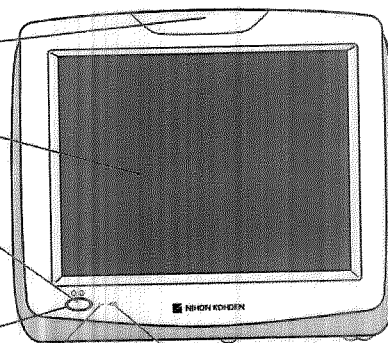


T 57+1+660 1000
F 57+1+660 8145
Fax 57+1+660 8145
Bogotá D.C. - Colombia
ventas@novatecnica.com.co
CARTO MATEMÁTICA




NIHON KOHDEN


PANEL LADO IZQUIERDO

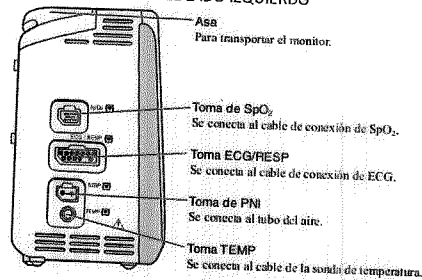

PANEL LADO DERECHO

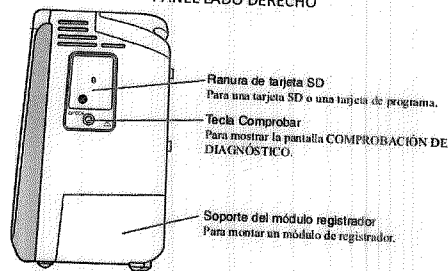

PANEL TRASERO

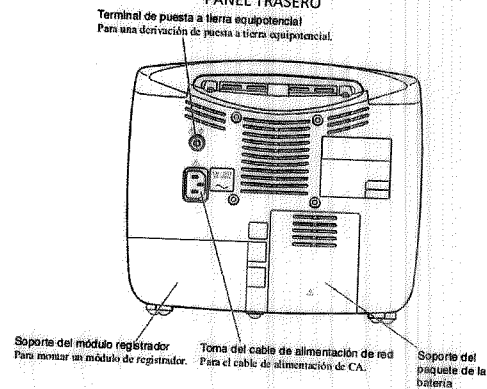

T 576 1 4 646 1045
F 576 1 4 655 6145
Buenos Aires 30 30 22
Buenos Aires, Argentina
ventas@novatecnica.com.ar


GRUPO MAQUET



NovaTécnica S.A.


MENU GUIA

Cuando se genera una alarma técnica durante la monitorización, la tecla Guía aparece en la parte superior de la pantalla. Toque la tecla para abrir el menú Guía asociado a la alarma.

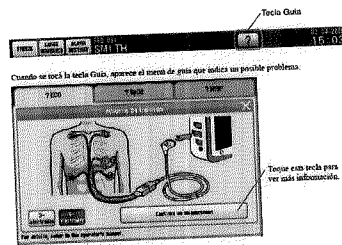

Parámetros de Monitorización

MONITORIZACIÓN ECG

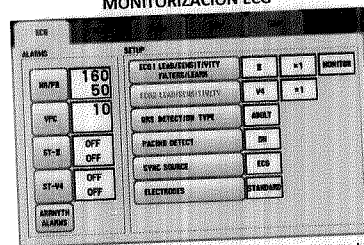

Conecte los electrodos al paciente, conecte la derivación de los electrodos a éstos y al cable de conexión de ECG y conecte el cable de conexión de ECG a la toma de ECG/RESP del panel del lado izquierdo del monitor.

Para obtener un ECG estable:

- Afeite el exceso de pelo.
- Frote la piel del paciente con un trozo de algodón en los puntos en que van conectados los electrodos.
- Si la piel está sucia, límpiela con jabón y agua. Séquela bien.
- Limpie la piel del paciente con un trozo de algodón humedecido con alcohol. Séquela bien.


NIHON KOHDEN

MONITORIZACION

1. Seleccione el cable de paciente.
2. Conecte el cable de paciente con el cable de conexión de ecg y éste con el conector ecg/resp del monitor.

Ubicación de los electrodos

Símbolo	Posición del electrodo
R	Fosa infraclavicular derecha
RA	Fosa infraclavicular izquierda
L	Fosa infraclavicular izquierda
LA	Costilla más baja en la línea axilar anterior izquierda
F	
LL	

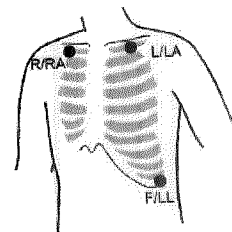

Coloque los electrodos desechables en el paciente y conecte el cable de paciente a los electrodos. Procedimiento:

- a. Abra el paquete de electrodos y saque el electrodo.
- b. Retire el papel de la parte posterior del electrodo. Tenga cuidado de no tocar la parte adhesiva.
- c. Coloque el electrodo en la piel que habrá limpiado previamente. Evite zonas con piel arrugada o irregular.
- d. Una el cable de paciente que está conectado al monitor al electrodo.
- e. Fije el cable de paciente a la piel con esparadrapo dejando cable de sobra entre el esparadrapo y el electrodo. De este modo se evitará que el cable de paciente se mueva si se mueve el paciente.


COMIENZA LA MONITORIZACIÓN.
REALICE LOS AJUSTES NECESARIOS.

T 32+1 + 646 1045
F 32+1 + 615 5145
Bom 22 Rm 30 23
Bogotá D.C. - Colombia
ventas@novatecnica.com.co




NIHON KOHDEN

PANTALLA DE INICIO

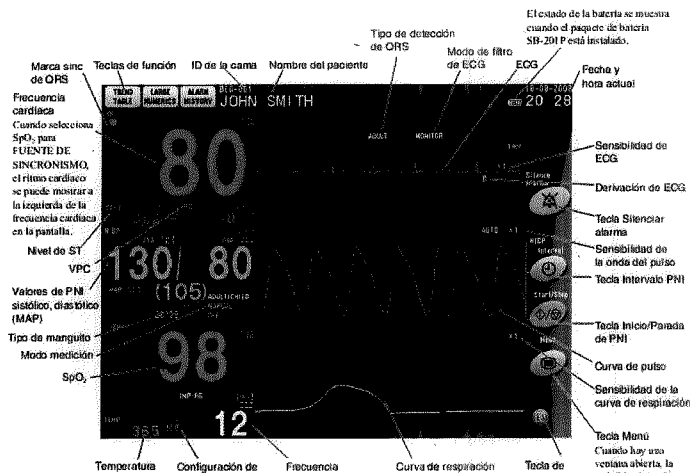

MENU

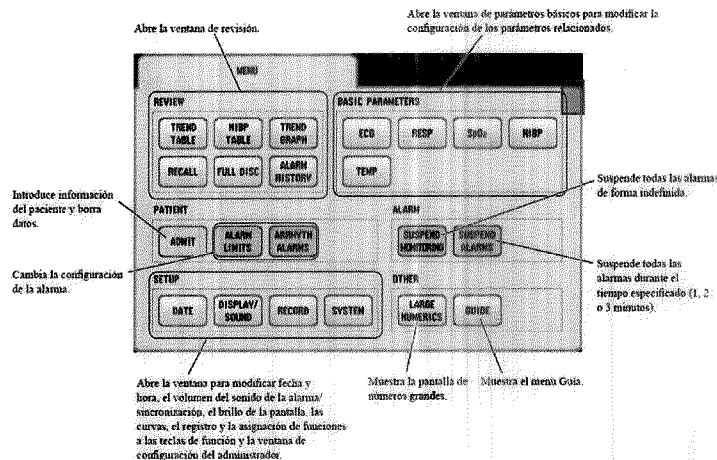

TIPOS DE MEDICIÓN

· MEDICIÓN MANUAL

• MEDICIÓN MANUAL
Para empezar la medición de PSNI en el modo Manual, pulse la tecla PSNI START/STOP. Se realizará una única medición que se inicia y se detiene automáticamente. Para cancelarla, pulse de nuevo esta tecla durante la medición.

· MEDICIÓN CONTINUA (STAT)

· MEDICIÓN CONTINUA (STAT)
Para iniciar la medición de PSNI en el modo STAT, pulse la tecla PSNI START/STOP. La medición se repetirá continuamente durante 15 minutos. Para detenerla (cancelar) dentro de los 15 minutos, pulse de nuevo esta tecla.


· MEDICIÓN AUTO

• **MEDICIÓN AUTO**
El modo Auto funciona cuando se selecciona uno de los intervalos de tiempo.


5. Comience el proceso de medición.

PANTALLAS DE REVISIÓN DE DATOS


Tabla de tendencias

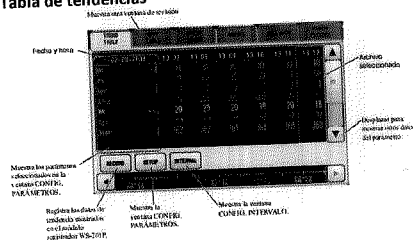


Ventana Tabla PNI

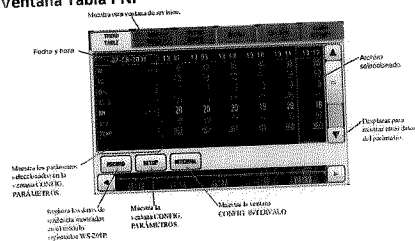

Ventana Consultar

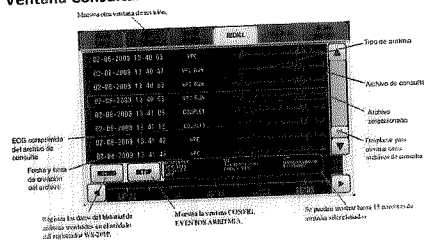

Ventana FullDisclosure

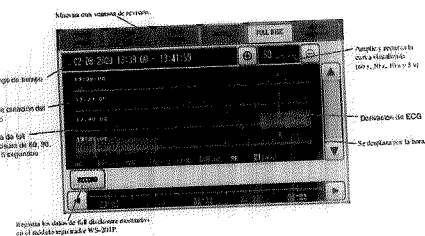


T 52-1-446 1046
F 52-1-455 0145
Tél: 23 96 39 21
Fax: 23 96 39 21
www.novatecnica.com.co


Novatecnica S.A.



MONITORIZACIÓN DE LA RESPIRACIÓN

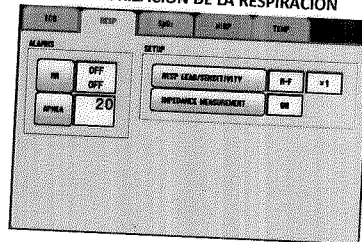

El monitor permite medir la frecuencia respiratoria por dos métodos: el método de impedancia y el método de termistor.

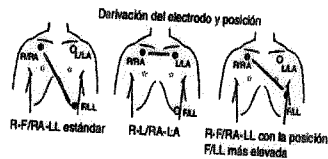


MÉTODO DE IMPEDANCIA

En el método de impedancia, la respiración se mide y se monitoriza fijando los electrodos de ECG al paciente.

1. Seleccione el cable de paciente.
2. Conecte el cable de paciente al cable de Conexión de ECG y éste al enchufe ECG/RESP del monitor.
3. Coloque los electrodos desechables en el paciente y fije el cable del paciente a los electrodos
4. Se inicia la monitorización.

MONITORIZACIÓN SPO2

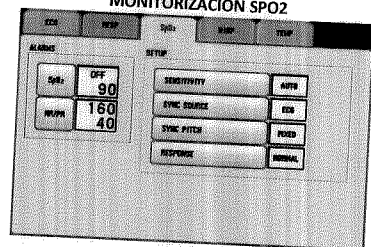


NIHON KOHDEN

1. Seleccione el sensor (sonda).
2. Conecte la sonda la sonda al cable de Conexión de SpO2 y el cable de conexión de SpO2 al conector de SpO2 del monitor.

Modelo	Sujeto (peso)	Lugar de acoplamiento
Sonda de dedo TL-201T	Adultos, niños (peso de más de 20 kg)	Dedo
Sonda multiusito TL-220T	Adultos, niños (peso de más de 3 kg)	Dedo de la mano o del pie
	Neonatos (peso inferior a 3 kg)	Empeine o planta

3. Fije la sonda al paciente.
4. Se inicia la monitorización.


MONITORIZACIÓN NIBP

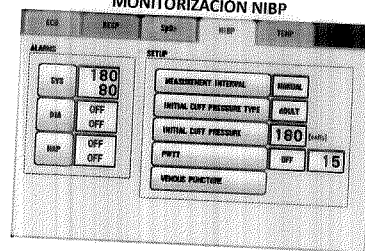

1. Elija el brazalete.

Manguito	YP-960T	Anchura (cm)	Circunferencia apt
Para bebés	YP-961T	5	8 a 12
	YP-962T	7	12 a 16
Para niños	YP-963T	10	15 a 23
	YP-964T	13	21 a 30
Para adultos	YP-965T	15	26 a 36
Para los ancianos	YP-966T	19	33 a 45

2. Conecte el brazalete con el tubo de aire y éste al conector PNI (presión no invasiva o nibr) del monitor.
3. Coloque el brazalete en el paciente.

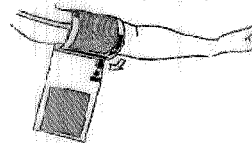

4. Configure los valores necesarios.



LIMPIEZA Y DESINFECCION

PVM 2700 - BSM 3000 - BSM 6000

LIMPIEZA

Limpie la superficie del monitor todos los meses con un paño suave humedecido con jabón neutro, agua o alcohol (de 76,9 a 81,4% por vol.) y, a continuación, séquela con un paño o un trapo seco. Quite el polvo del altavoz y de los orificios de ventilación de los paneles con un trozo de algodón.

Limpie la pantalla táctil utilizando un paño suave humedecido con detergente neutro y escurrido.

NOTA:

- No utilice un trapo áspero.
- No utilice detergentes ácidos o alcalinos, ni alcohol que no sea etanol o isopropil.

PRECAUCIÓN

Antes de proceder con el mantenimiento, la limpieza o la desinfección, apague la alimentación del monitor de cabecera y desconecte el cable de alimentación del interruptor de red. La no observancia de estas instrucciones puede producir una descarga eléctrica y que el monitor central no funcione adecuadamente.

PRECAUCIÓN

Si se derrama por accidente líquido en el monitor, póngalo fuera de servicio y póngase en contacto con el representante de Nihon Kohden. El monitor debe estar limpio y seco, y debe haber probado su seguridad y funcionamiento.

PRECAUCIÓN

No desmonte nunca ni repare el monitor. El desmontaje y la reparación debe realizarlas personas de servicio cualificado.

PRECAUCIÓN

Deshágase del monitor de cabecera, de las opciones y los accesorios tal y como especifica Nihon Kohden. De lo contrario, provoca infección o contaminación medioambiental.

PRECAUCIÓN

- No utilice líquidos volátiles, como disolventes o bencina, debido a que provocarán que los materiales se fundan o se agrieten.
- No permita que se introduzca agua en el interior del monitor.
- No esterilice nunca el monitor puesto que los materiales podrían deformarse, agrietarse o decolorarse.

DESINFECCIÓN

Para desinfectar la superficie exterior del monitor de cabecera, límpiela con un paño no abrasivo humedecido con cualquiera de los desinfectantes que se indican a continuación. Utilice la concentración recomendada.

- * Desinfectante Concentración (%)
- * Solución de gluconato de clorhexidina 0,5
- * Solución de clorhidrato de benzalconio 0,2
- * Solución de glutaraldehído 2,0
- * Clorhidrato de benzalconio 0,2
- * Clorhidrato de alquildiaminoetilglicina 0,5

Realizó: Ing. Alejandro Velandia Escobar