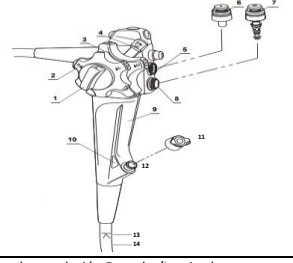
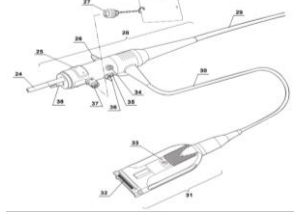
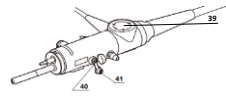
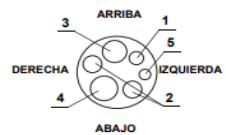
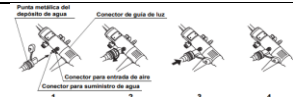
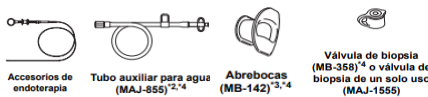
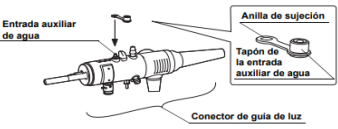
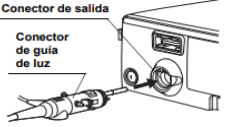
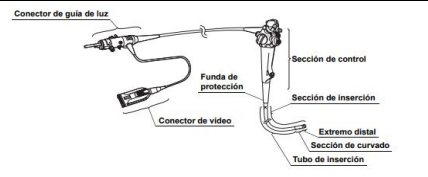


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 03	AÑO: 2023
Nombre del equipo:	Videocolonoscopio	Modelo:	CF-H170L	Riesgo del equipo:	IIA	
Marca:	OLYMPUS			Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO: SECCIÓN DE CONTROL		PARTES DEL EQUIPO: CONECTOR DE GUÍA DE LUZ Y DE VIDEO			
 Dispositivo médico de diagnóstico y tratamiento indicado para su uso en endoscopia y cirugía endoscópica en el tracto gastrointestinal inferior (incluidos ano, recto, colon sigmoide y válvula ileocecal).						
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Dirección de visualización: Frontal 2. Campo de visión: 140º 3. Rango de observación normal: 2 - 100mm 4. Longitud de trabajo: L: 1680 mm I: 1330 mm 5. Diametro de canal de trabajo: 3.7 mm	1. Freno de angulación Derecha/Izquierda 2. Mando de control de angulación Derecha/Izquierda 3. Mando de control de angulación Arriba/Abajo 4. Freno de angulación Arriba/Abajo 5. Cilindro de aspiración 6. Válvula de aspiración (MH-443) 7. Válvula de aire/agua (MH-438) 8. Cilindro de aire/agua 9. Empuñadura 10. Código de colores: muestran la compatibilidad de los accesorios: * Azul: GIF-XP170N * Amarillo: GIF-H170 * Naranja: CF-H170L/I 11. Válvula de biopsia. 12. Entrada del canal de biopsia. 13. Marca de límite de la sección de inserción.		24. Guía de luz. 25. Modelo y número de serie del equipo. 26. Conector de aspiración. 27. Tapón ETO (MB-156): Se utiliza en caso de esterilización, envío. 28. Conector de guía de luz. 31. Conector de video. 32. Clavijas de contacto. 33. Marca UP (Debe mirar hacia arriba cuando este conectado). 34. Montaje del conector del cable S. 35. Conector paara entrada de aire. 36. Conector para suministro de agua. 37. Conector de ventilación. 38. Conexión para insuflación de aire. PORTE TRASERA DEL EQUIPO (CF-H170L/I) 39. Chip de RFID: Identificación del equipo. 40. Entrada auxiliar de agua. 41. Tapón para la entrada auxiliar de agua.			
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1. Lavado preliminar del colonoscopio con jabon enzimático. 2. Desmontaje del endoscopio de la unidad. 3. Realizar el procedimiento de desinfección /o esterilización. 4. Realizar la pre limpieza del equipo. 5. Realizar las pruebas de fuga correspondientes. 6. Realizar limpieza mecanica del equipo. 7. Realizar desinfección de alto nivel del equipo. 8. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución.	PRECAUCIONES GENERALES 1. Asegurese de que no se adhiera la humedad o sustancias extrañas al conector del endoscopio con la fuente de luz.					
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA: 02	DE: 02	
			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 03	AÑO: 2023
Nombre del equipo:	Videocolonoscopia	Modelo:	CF-H170L	Riesgo del equipo:	IIA	
Marca:	OLYMPUS			Clasificación del equipo:	DIAGNÓSTICO	
PARTES DEL EXTREMO DISTAL DEL ENDOSCOPIO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
		2. Inspeccione toda la sección de inserción del tubo del endoscopio así como el lente del objetivo ni las lentes guía de luz y la pipeta de aire/agua en el extremo distal . 3. Inspeccione el mecanismo de ajuste de la flexibilidad realizando diferentes pruebas y comprobando que la marca sea claramente visible.		10. Empuje el conector de vídeo en el enchufe del conector de vídeo, hasta que haga clic. 11. Coloque el tubo para suministro de agua en el conector de alimentación de agua, gire la punta metálica del depósito de agua 90° en el sentido de las agujas del reloj para alinear los canales.		
1. Pipeta de aire/agua.		4. Gire los seguros de angulación para realizar diferentes pruebas de funcionamiento.				
2. Lentes guía de luz.		5. Coloque la válvula de aspiración alineando los dos vástagos metálicos situados en la parte inferior de la válvula de aspiración con los dos orificios del cilindro de aspiración.		12. Si se requiere el conexión auxiliar de agua, abra el tapón indicado en el punto 8. y gire el tubo auxiliar hasta que llegue al tope.		
3. Lente del objetivo.		6. Coloque la válvula de aire/agua asegurándose que se adapta correctamente sin que el revestimiento se deforme.		13. Realice inspección del sistema endoscópico (Imagen, interruptores remotos, insuflación de aire, función limpieza lente objetivo, suministro de agua, aspiración, canal de trabajo).		
4. Salida del canal de biopsia.		7. Instale la válvula de biopsia en la entrada para el canal de biopsia del endoscopio.		14. Utilice el equipo siguiendo los protocolos de la institución.		
5. Canal auxiliar de agua.		8. Coloque la anilla de sujeción en la entrada auxiliar de agua del conector de la guía de luz, si el tapón de la entrada auxiliar de agua no está colocado.		15. Al finalizar el procedimiento, desactive primero la función del zoom eléctrico, utilice la válvula de aspiración para los desechos acumulados y desplace los frenos de alineación a la posición "F" para liberar el freno.		
PASOS A SEGUIR ANTES DE UTILIZAR EL COLONOSCOPIO				16. Para CF-H170L/I extraiga el endoscopio observando siempre la imagen. Si utiliza un tubo de protección extraiga el endoscopio junto con el tubo.		
1. Prepare los equipos y los accesorios del mismo.						
		9. Mientras sostiene el conector de vídeo con una mano, inserte el conector de guía de luz en el conector de salida del procesador de vídeo CV-170.		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES		
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		Asegurese que la del conector de hacia 		La imagen no es nítida. Las lentes del objetivo del extremo distal del endoscopio están sucias. Inyecte agua para eliminar mucosidades, etc		
1. Realice la inspección del endoscopio, realizando pruebas de funcionamiento y verificación de la punta: Revisando que no presente rasguños, grietas ni anomalías.				La imagen es demasiado clara o demasiado oscura. Ajuste la configuración del procesador.		
				El equipo no ajusta la flexibilidad. La sección de inserción está doblada.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						