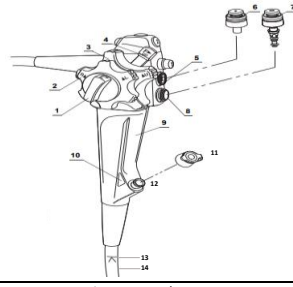
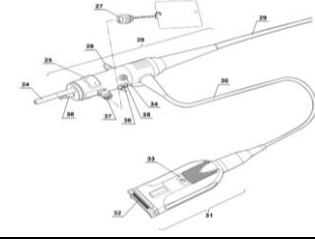
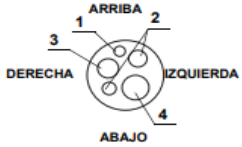
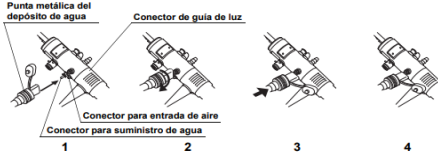
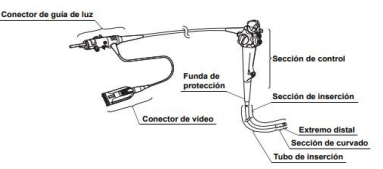
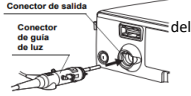


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 03	AÑO: 2023
Nombre del equipo:	VideogastroscoPIO	Modelo:	GIF-H170		Riesgo del equipo:	IIA
Marca:	OLYMPUS				Clasificación del equipo:	DIAGNOSTICO
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO: SECCIÓN DE CONTROL		PARTES DEL EQUIPO: CONECTOR DE GUÍA DE LUZ Y DE VIDEO		
 Dispositivo médico de diagnostico y tratamiento indicado para su uso en endoscopia y cirugía endoscópica en el tracto gastrointestinal superior (incluidos esófago, estómago y duodeno).						
		1. Freno de angulación Derecha/Izquierda 2. Mando de control de angulación Derecha/Izquierda 3. Mando de control de angulación Arriba/Abajo 4. Freno de angulación Arriba/Abajo 5. Cilindro de aspiración 6. Válvula de aspiración (MH-443) 7. Válvula de aire/agua (MH-438) 8. Cilindro de aire/agua 9. Empuñadura 10. Código de colores: muestran la compatibilidad de los accesorios: * Azul: GIF-XP170N * Amarillo: GIF-H170 * Naranja: CF-H170L/I 11. Válvula de biopsia. 12. Entrada del canal de biopsia. 13. Marca de límite de la sección de inserción. 13. Sección de inserción.		24. Guía de luz. 25. Modelo y número de serie del equipo. 26. Conector de aspiración. 27. Tapón ETO (MB-156): Se utiliza en caso de esterilización, envío. 28. Conector de guía de luz. 31. Conector de video. 32. Clavijas de contacto. 33. Marca UP (Debe mirar hacia arriba cuando este conectado). 34. Montaje del conector del cable S. 35. Conector para entrada de aire. 36. Conector para suministro de agua. 37. Conector de ventilación. 38. Conexión para insuflación de aire. 39. Chip de RFID: Identificación del equipo.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1. Dirección de visualización: Frontal 2. Campo de visión: 140° 3. Rango de observación normal: 2 - 100mm 4. Longitud de trabajo: 1030 mm 5. Diametro de canal de trabajo: 2.8 mm		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 1. Lavado preliminar del colonoscopio con jabon enzimático. 2. Desmontaje del endoscopio de la unidad. 3. Realizar el procedimiento de desinfección /o esterilización. 4. Realizar la pre limpieza del equipo. 5. Realizar las pruebas de fuga correspondientes. 6. Realizar limpieza mecanica del equipo. 7. Realizar desinfección de alto nivel del equipo. 8. La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución.		PRECAUCIONES GENERALES 1. Asegurese de que no se adhiera la humedad o sustancias extrañas al conector del endoscopio con la fuente de luz.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	02	DE	02
FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS			FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
					15	03	2023	
Nombre del equipo:	VideogastroscoPIO	Modelo:	GIF-H170		Riesgo del equipo:			IIA
Marca:	OLYMPUS				Clasificación del equipo:			DIAGNOSTICO
PARTES DEL EXTREMO DISTAL DEL ENDOSCOPIO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO				
		2. Inspeccione toda la sección de inserción del tubo del endoscopio así como el lente del objetivo ni las lentes guía de luz y la pipeta de aire/agua en el extremo distal . 3. Inspeccione el mecanismo de ajuste de la flexibilidad realizando diferentes pruebas y comprobando que la marca sea claramente visible.						
1. Pipeta de aire/agua.				12. Realice inspección del sistema endoscópico (Imagen, interruptores remotos, insuflación de aire, función limpieza lente objetivo, suministro de agua, aspiración, canal de trabajo).				
2. Lentes guía de luz.		4. Gire los seguros de angulación para realizar diferentes pruebas de funcionamiento.		13. Utilice el equipo siguiendo los protocolos de la institución.				
3. Lente del objetivo.				14. Al finalizar el procedimiento, desactive primero la función del zoom eléctrico, utilice la válvula de aspiración para los desechos acumulados y desplace los frenos de alineación a la posición "F" para liberar el freno.				
4. Salida del canal de biopsia.				15. Para el GIF-H170 extraiga el endoscopio con cuidado del paciente observando siempre la imagen endoscópica. Retírele el abre bocas al paciente tras la endoscopia transoral.				
PASOS A SEGUIR ANTES DE UTILIZAR EL COLONOSCOPIO		5. Coloque la válvula de aspiración alineando los dos vástagos metálicos situados en la parte inferior de la válvula de aspiración con los dos orificios del cilindro de aspiración.						
1. Prepare los equipos y los accesorios del mismo.  Accesorios de endoterapia  Abrebocas (MB-142)^{3,4}  Válvula de biopsia (MB-358)⁴ o válvula de biopsia de un solo uso (MAJ-1555)		6. Coloque la válvula de aire/agua asegurándose que se adapta correctamente sin que el revestimiento se deforme.						
 Válvula de aire/agua (MH-438)⁴  Válvula de aspiración (MH-443)⁴ 1 Monitor 2 Videoprocesador 3 Bomba de aspiración 4 Endoscopio¹ 5 Recipiente de agua		7. Instale la válvula de biopsia en la entrada para el canal de biopsia del endoscopio.						
		8. Mientras sostiene el conector de video con una mano, inserte el conector de guía de luz en el conector de salida del procesador de video CV-170.						
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		Asegure que la marca "UP" conector de video mire arriba.		No se visualiza la imagen.		Reinicie el procesador de video y vuelva a insertar el conector de video hasta que haga clic.		
1. Realice la inspección del endoscopio, realizando pruebas de funcionamiento y verificación de la punta: Revisando que no presente rasguños, grietas ni anomalías. 				La imagen no es nítida.		Las lentes del objetivo del extremo distal del endoscopio están sucias. Inyecte agua para eliminar mucosidades, etc		
		10. Empuje el conector de video en el enchufe del conector de video, hasta que haga clic.		La imagen es demasiado clara o demasiado oscura.		Ajuste la configuración del procesador. Limpie la lente guía de luz.		
		11. Coloque el tubo para suministro de agua en el conector de alimentación de agua, gire la punta metálica del depósito de agua 90° en el sentido de las agujas del reloj para alinear los canales.		El equipo no ajusta la flexibilidad.		La sección de inserción está doblada.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:								
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.								
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica								
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo								
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.								
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.								
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas								
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.								