



BLENDER CON FLUJOMETRO SENCILLO


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN:

1. Deslice el soporte en la ranura ubicada en la parte posterior del blender, de esta manera podrá montarlo en el atril.
2. Conecte las mangueras de aire y oxígeno al blender en sus entradas correspondientes; los extremos de las mangueras deben ir conectados a una fuente de suministro de gases regulada entre 30-75 psi o 2-5 Bar. O a 50 psi o 3.5 Bar
3. Conecte el circuito de paciente a la salida del flujometro.

ATENCION: Tenga cuidado de nunca bloquear las aberturas de la alarma; el equipo debe estar ubicado de forma tal que esto nunca suceda.

INSTRUCCIONES DE USO:

Manipule las perillas hasta alcanzar los niveles de %O₂ y flujo deseados.

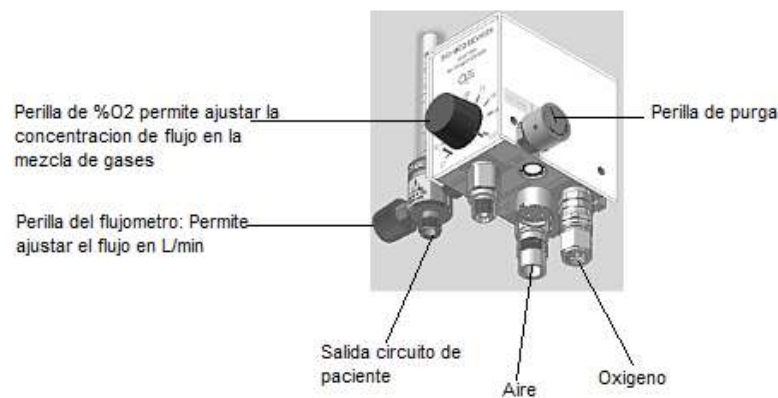

ATENCION: No fuerce las perillas no las salidas o entradas de los gases para evitar daños en el dispositivo.

Adicionalmente, chequee la conexión de las mangueras antes de cada uso para verificar su estado.

ALARMAS:

La alarma acústica se enciende en caso de detectarse baja presión en la alimentación de los gases, o al presentarse una diferencia de presiones entre aire y oxígeno mayor a 1 bar.

En caso de presentarse una alarma, verifique:

- Que el blender esté conectado correctamente a la alimentación de aire y oxígeno
- La presión de los gases de alimentación
- Si se usan cilindros de gas, chequee que no están vacíos y que las presiones de salida de aire y oxígeno de los cilindros sean iguales.



Bio-Med Devices, Inc.
61 Sound View Road
Guilford, CT 06437 USA
1-800-224-6633
1-203-458-0202
Fax 1-203-458-0440
Website: www.biomeddevices.com
Email: custserv@biomeddevices.com

