



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E

FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS

CODIGO:

FOR-GLO-MAB-012

VERSIÓN:

001

PAGINA

01

DE

01

FECHA DE EMISIÓN:

DÍA

MES

AÑO

15

03

2023

Nombre del equipo: **REGULADOR DE CO2**

Modelo: **GW-100**

Riesgo del equipo:

IIA

Marca: **FUJIFILM**

Clasificación del equipo:

DIAGNOSTICO

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO



Este producto está diseñado para ser utilizado en el suministro de CO2 gas y agua en combinación con el sistema endoscópico bajo la supervisión de un médico, permitiendo mayor facilidad en los procedimientos ya que permite que los organos internos se vuelvan más flexibles.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Voltaje de alimentación: 100-240 V
2. Dimensiones: 145 x 170 x 390 mm
3. Peso: 6 Kg
4. Presión máxima de gas: 65Kpa
5. Presión máxima de agua: 65Kpa
6. Tipo de gas a usar: CO2
7. Endoscopios compatibles: 600/500/400/200


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. Limpie el tanque de agua con el producto utilizado en la institución.
2. Coloque una jeringa llena de agua en la parte de conexión del tubo de gas.
3. Inyecte agua a través de la pieza de conexión del tubo de gas en el tubo de gas utilizando la jeringa.
4. Sumerja el tubo de gas para realizarse la limpieza.
5. Realice el trabajo de desinfección para el tubo de gas y tanque de agua.


PARTES DEL EQUIPO

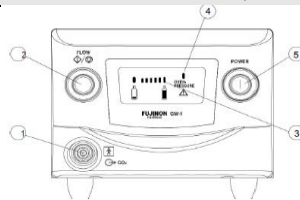

1. Conector de suministro de gas CO2
2. Interruptor del suministro de gas
3. Indicador del nivel de gas
4. Led indicador de sobrepresión del equipo
5. Interruptor de alimentación

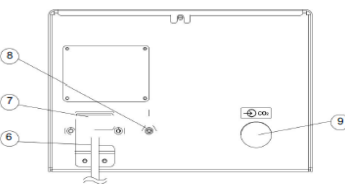

6. Cable de poder
7. Portafusibles T3.15A L 250V
8. Terminal equipotencial
9. Puerto de conexión de la manguera de gas

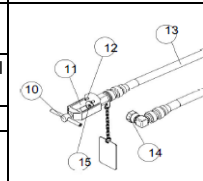

10. Manija
11. Adaptador al cilindro
12. Pin alineador
13. Manguera
14. Conector de la manguera de gas en el panel posterior del equipo.
15. Glandula de empaque

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Verifique que no haya fluido de corriente
2. Conecte la manguera de alta presión a la manguera de gas en el puerto del equipo
3. Conecte la manguera de alta presión al cilindro de gas.
4. Conecte el equipo a la red electrica
5. Conecte el tanque de reservorio de agua
6. Conecte el tubo de gas al equipo
7. Presione el interruptor de encendido
8. Compruebe que el zumbador comienza a sonar y el LED en el indicador de gas se vuelve naranja.
9. Gire la válvula del cilindro de gas CO2 en el sentido de las agujas del reloj para abrirla
10. Verifique que el LED verde en el indicador de gas esté encendido.
11. Verifique que la indicación de sobrepresión no esté parpadeando.
12. Encienda el interruptor de suministro de gas en la unidad principal para comenzar a suministrar CO2.
13. Presione el botón Gas / Water hasta la mitad cuando suministre CO2 gas
14. Después del examen, presione el interruptor de suministro de gas nuevamente para detener el suministro de gas CO2

MÉTODOS DE LIMPIEZA APLICABLES

EQUIPO/ ACCESORIO	METODO DE LIMPIEZA	METODO DE DESINFECCIÓN
1. Unidad principal	Paño de limpieza	Paño de limpieza
2. Tanque de agua	Paño de limpieza	Química/ autoclave
3. Tubo de gas	Paño de limpieza	Química/ autoclave

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

1. **Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
2. **Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
3. **Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
4. **Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
5. **Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
6. **Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
7. **Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.