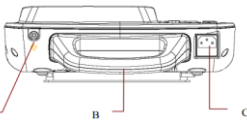
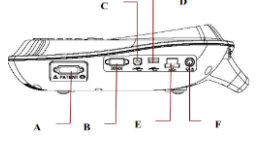


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 15	MES: 10	AÑO: 2024
Nombre del equipo:	ELECTROCARDIOGRAFO	Modelo:	SE-601		Riesgo del equipo:	Ila
Marca:	EDAN		Clasificación del equipo:		DIAGNÓSTICO	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		ADVERTENCIAS		
 El uso de electrocardiógrafo es adquirir señales de ECG de pacientes pediátricos y adultos a través de la superficie corporal con electrodos de ECG. Puede ayudar a los usuarios analizar y diagnosticar la enfermedad del corazón.		 A. Recorte (Impresión) B. Indicadores C. Pantalla D. Teclado  A. Terminal de equalización de potencial B. Manija C. Zócalo de alimentación principal  A. Entrada de cable a paciente B. Puerto serial 1 C. Entrada USB 1 (Opcional) D. Entrada USB 2 (Opcional) E. Net Puerto F. Zócalo Externo Entrada/Salida		-Evitar salpicaduras de líquidos y el exceso de temperatura. -No utilice el equipo en el medio ambiente polvoriento con mala ventilación o en presencia de corrosión. -Asegúrese de que no hay una intensa fuente de interferencia electromagnética de todo el equipo, como transmisor de radio o teléfono móvil, etc. -Antes de su uso, el equipo, cable de paciente y los electrodos deben verificarse		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				MODO AUTO		
1. Peso: 3,0 kg incluyendo papel y batería. 2. Dimensiones: 322 mm x 310 mm x 101 mm. 3. Pantalla: 5,7" TFT táctil (640 x 480). 4. Entrada externa: 100 kΩ, sensibilidad 100 mm/mV ±5 %. 5. Salida externa: 100 Ω, sensibilidad 1 V/mV ±5 %.				Los grupos de derivadas transmitirán automáticamente de acuerdo a la secuencia de las derivadas cuando este imprimiendo.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				PASOS DEL MODO AUTO		
La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. Nota: Apague la potencia antes de la limpieza y desinfección. Si se utiliza la red de suministro, el cable de alimentación debe ser retirado de la toma de corriente.				1. Coloque la información del paciente antes de imprimir. 2. Entre el modo de trabajo en la configuración de la interface para seleccionar Modo Auto, Estilo Auto y modo de Muestra. 3. Introduzca en la configuración las derivadas principales y las secuencias. 4. Al terminar la configuración de parámetros salga de configuración de ventana. 5. Presione la tecla START/STOP para comenzar la impresión. 6. Se apagará automáticamente después de terminar la impresión del ECG. Presionando START/STOP durante el curso de la impresión puede parar la impresión		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente las características del equipo y las condiciones especiales de funcionamiento si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO:		FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN:	001	PAGINA	01	DE	01
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA	MES	AÑO	
				15	10	2024		

Nombre del equipo:	ELECTROCARDIOGRAFO	Modelo:	SE-601	Riesgo del equipo:	Ila
Marca:	EDAN			Clasificación del equipo:	DIAGNÓSTICO

MODO MANUAL		PASOS DEL MODO RITMO		PASOS DEL MODO RR	
Los usuarios pueden determinar qué grupo de derivadas debe grabarse y configurar los parámetros de acuerdo con los diferentes grupos.		1.Introduzca la información del paciente antes de la grabación. 2.Introduzca el modo de trabajo de configuración de interfaz para seleccionar el modo de Ritmo, Ritmo y Estilo Ritmo. 3. Oprima derivada en la configuración de la interface para seleccionar la derivada ritmo. 4.Después de finalizada la configuración de los parámetros, salga de la ventana de configuración. 5.Pulse la tecla STAR/STOP y la pista de información "de Muestreo" le mostrará la información, a la vez el tiempo de muestreo será contado. Cuando el tiempo de muestreo llega a 60s en un solo estilo de derivada o 20s en tres estilos de derivadas; comienza a imprimir. 6.Se apagará automáticamente después de imprimir la forma de onda del ECG en derivada ritmo. Presionando START/STOP durante el curso de la impresión puede parar la impresión.		1.Entre información del paciente antes de la impresión. 2.Entre al modo configuración para seleccionar modo RR 3.Entre a configuración de las derivadas para seleccionar una derivada en la zona de ritmo, Derivada 1. 4.Después de terminar la configuración de los parámetros , salga del sistema configuración de ventana. 5.Presione la Tecla START/STOP para empezar a contar el tiempo de muestreo, cuando llega el tiempo de 180 sg. Comienza a imprimir 6. El se apagará automáticamente después de que el análisis RR este completamente impreso. Si presiona START/STOP otra vez durante el curso de la impresión, se puede detener la	
PASOS DEL MODO MANUAL				1mV/Copia	
1. Entrada de información del paciente antes de la impresión. 2. Introduzca la instalación en modo de interfaz de trabajo para seleccionar el modo manual, Manual de Estilo y Estlo manual. 3.Introduce el programa de instalación principal para configurar la interfaz de secuencias de plomo. 4.Después de terminar la configuración de parámetros, salir de la ventana de configuración del sistema. 5.Pulse la tecla Tab para seleccionar el grupo de cabeza que se va a grabar. 6.Pulse la tecla START/STOP para comenzar la impresión. 7.Presione la tecla START/STOP para detener la impresión en el momento que usted lo desee. 8.Si pulsa START/STOP de nuevo en el curso de la grabación puede detener la grabación.				Presionando la Tecla 1mV/Copy puede copiar los datos del ECG registrados por ultima vez. Durante el curso de la impresión oprimiendo la tecla START/STOP otra vez usted puede detener la impresión.	
MODO DE RITMO		MODO RR		IDENTIFICACIÓN DE CARGA	
Los usuarios pueden Imprimir 60s de forma de onda de ECG de la derivada de ritmo en un estilo de derivada o 20s de forma de onda de ECG de ritmos de plomo en forma de onda de ECG de la derivada ritmo en estilo de tres derivadas.		Los usuarios pueden seleccionar un lugar para grabar su forma de onda de ECG 180s, y RR RR Histograma gráfico de tendencias. Nota: En el R-R modo, los usuarios no pueden ajustar la velocidad. La constante de velocidad es 25 mm / s, porque al grabar en el modo de RR, la onda del ECG es comprimido a una tercera parte de la longitud de onda.		 Total carga  Carga baja  Batería debil -Mantenga conectado el equipo a la red eléctrica, así la batería se recarga automáticamente. -La luz indicadora de la batería de recarga y el indicador de suministro serán encendidos al mismo tiempo.	

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:	
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.	
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describira detalladamente las características del equipo y las condiciones especiales de funcionamiento si aplica	
3. Partes del equipo: Se ilustrara y se enumerara las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo	
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describira el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.	
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describira la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.	
6. Alarmas y posibles errores: Se describira de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas	
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.	