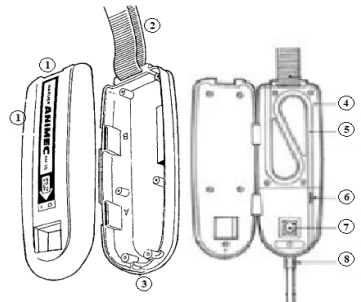


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:	DÍA: 28	MES: 09	AÑO: 2023

Nombre del equipo:	Calentador de sangre/infusión	Modelo:	Tipo AM-25	Riesgo del equipo:	Moderado - BF
Marca:	Eltec			Clasificación del equipo:	I

DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO	PARTES DEL EQUIPO	MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO
 Equipo diseñado para calentar sangre y soluciones de infusión previo a su administración al paciente. Su objetivo es prevenir la hipotermia inducida por transfusión, asegurando que los líquidos se administren a una temperatura óptima.		Modo de Calentamiento Continuo: Calienta a una temperatura preestablecida. Modo de Calentamiento por Demanda: Calienta solo cuando detecta un flujo a través del tubo.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Limpieza: Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie externa del equipo. No sumerja el equipo en agua ni permita que el líquido penetre en las aberturas del dispositivo. Desinfección: Utilice una solución desinfectante suave utilizada en la institución. Aplique la solución con un paño y asegúrese de cubrir todas las áreas del equipo, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES Alarma de temperatura alta: Indica que el líquido está siendo calentado a una temperatura superior a la recomendada. Alarma de temperatura baja: Señala que el líquido no está alcanzando la temperatura deseada. Alarma de flujo bajo: Indica que el líquido no está fluyendo al ritmo deseado. Error de sensor: Señala un problema con uno de los sensores del equipo. Error de alimentación: Indica un problema con la fuente de alimentación del equipo.
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO 1. Conecte el equipo a la fuente de alimentación 2. Encienda el equipo utilizando el interruptor de encendido/apagado. El equipo comenzará a calentarse y estará listo para su uso una vez que alcance la temperatura deseada. 3. Fije el sensor térmico en el tubo y conéctelo al termómetro para preparar la medición de temperatura. 4. Acople el tubo con el sensor térmico al ANIMEC, asegurándose de que los sensores estén en las posiciones indicadas. - Si utiliza una bomba de infusión, configure la tasa de flujo según las necesidades del paciente. Si no dispone de una bomba de infusión, puede usar el método de goteo libre, pero asegúrese de que la tasa de flujo esté dentro del estándar de 4.5 ± 0.5 ml/min. 5. Comience la infusión del líquido y monitoree la temperatura del líquido. La temperatura del agua calentada debe estar dentro de $35^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$. 6. Una vez finalizada la administración del líquido, apague el equipo utilizando el interruptor de encendido/apagado.	1. Cubierta: Carcasa externa del equipo que protege los componentes internos. 2. Cinturón de suspensión: Correa que permite sostener el equipo en una posición adecuada durante su uso. 3. Cuerpo principal: Estructura central del equipo donde se encuentran la mayoría de los componentes internos. 4. Placa calefactora: Para calentar la infusión en el tubo 5. Canal del tubo: Puesta del tubo dentro del canal en forma de "s" 6. Sensor de temperatura: Detecta la temperatura del efluente en el punto de salida del dispositivo 7. Interruptor de encendido: Pulse el botón para encender o apagar la alimentación principal 8. Cable eléctricos. Accesorios y consumibles: - Tubos de diferentes tamaños: Dependiendo del modelo del equipo, se utilizan tubos de diferentes diámetros (3.0 – 4.0 mm o 4.1-5.0 mm) para administrar los líquidos. - Cable de alimentación. - Filtros y conectores	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Tamaño del Tubo: 3.0 – 4.0 mm y 4.1-5.0 mm Capacidad de flujo de 1-12 ml/min Requerimientos de Energía: - Para operaciones a 230V: $230\text{V} \pm 10\%$ ~ (AC) con una frecuencia de 50/60 Hz y un consumo máximo de 60 VA - Para operaciones a 115V: $115\text{V} \pm 10\%$ ~ (AC) con una frecuencia de 50/60 Hz y un consumo máximo de 100 VA. Método de Calentamiento: Sistema de Intercambio de Calor Seco Condiciones de Operación: Temperatura operativa: $0-40^{\circ}\text{C}$. Humedad relativa: $30-95\%$. Dimensiones Físicas: 176 x 65 x 36 mm Peso: 560g

El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:

- Definición de uso del equipo:** En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.
- Especificaciones técnicas:** En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica
- Partes del equipo:** Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo
- Modos de operación del equipo:** En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.
- Limpieza y desinfección:** En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.
- Alarmas y posibles errores:** Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas
- Pasos de operación del equipo:** Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.