


SIEMENS Cios Select

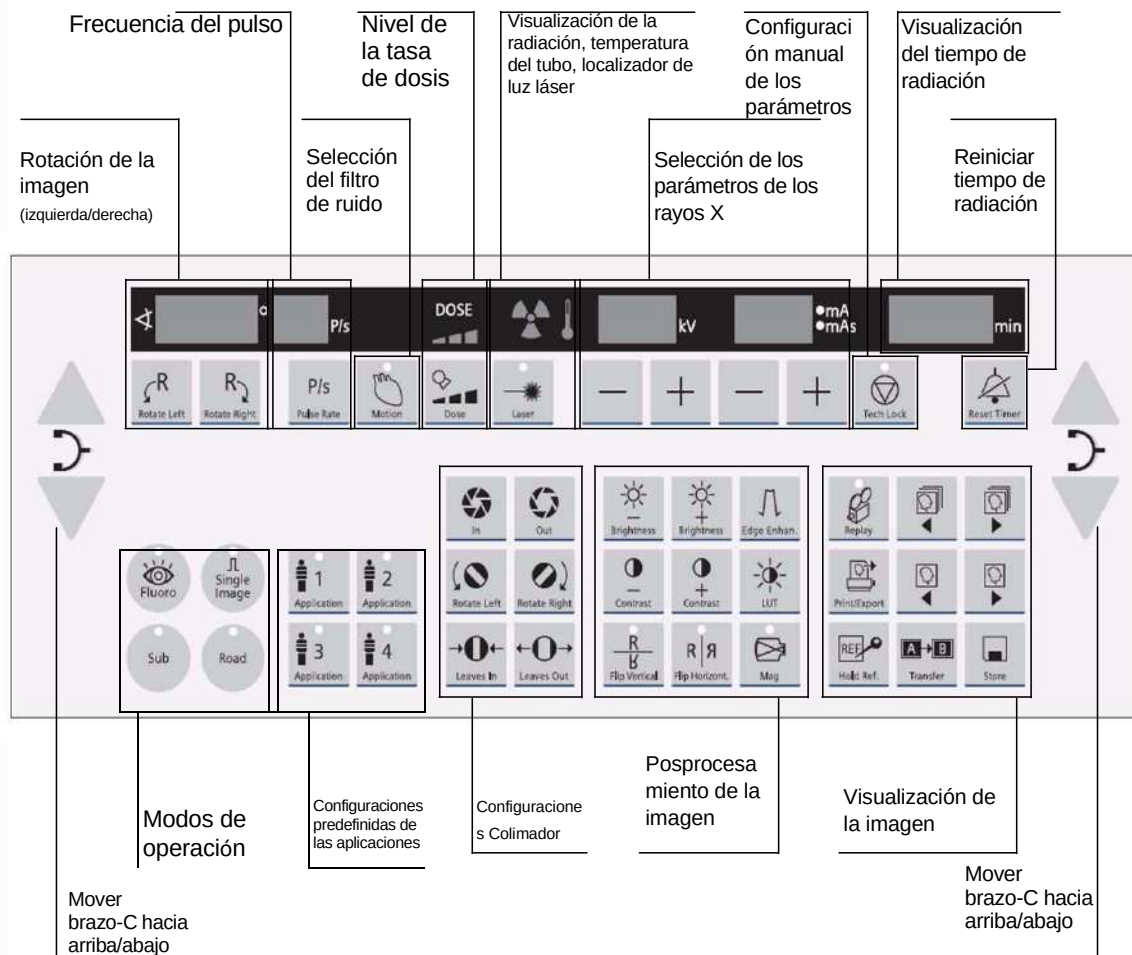

Para obtener información detallada por favor remítase al Manual del Operador del Sistema.
XPR2-140.640.01.0102 ©Siemens Healthcare GmbH 2016. Todos los derechos reservados.

Encendiendo el Cios Select

Botón de ENCENDIDO en el sistema del brazo-C

Preparación

Registrar paciente (desde el teclado del carro del monitor)

Seleccionar aplicación (desde el teclado del carro del monitor)
Seleccionar modo de Fluoroscopia, Imagen individual, Sustracción (opcional) u Hoja de Ruta (opcional)

Posicionar utilizando el localizador de luz láser

Examen

Liberar radiación

Utilizar el interruptor de mano o de pie

Optimización de la exposición:

Diagrama del iris, colimador de ranura

Configuraciones manuales de los parámetros de los rayos X

Posprocesamiento de la imagen:

Brillo, Contraste, LUT (tabla de consulta), Realce de bordes

Voltear y Rotar imagen

Documentación:

Almacenar imagen, almacenar escena (sostener durante > 2 s)
Utilizar el interruptor de mano como opción
Mover escena/imagen hacia atrás /delante

Apagando el Cios Select

Cerrar paciente

Botón de APAGADO en el sistema del brazo-C