

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO		
		EQUIPO: INCUBADORA
MARCA: DAVID		CÓDIGO: NA
MODELO: YP-90		VERSIÓN: 1
		FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2022

USO DEL EQUIPO




Dispositivo empleado para dar soporte vital a los bebés recién nacidos, bien sean prematuros o a término, que no estén preparados para adaptarse al medio extrauterino.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mantener el equipo conectado a la red eléctrica, la cual tenga conexión a tierra
- Evite la radiación directa del sol y otra fuente infrarroja la cuales pueden causar sobrecalentamiento del bebé
- Agregue agua destilada en la incubadora hasta la línea límite y así se evita la pérdida de agua del infante.
- Recuerde revisar constantemente los valores de humedad del equipo.

PARTES DEL EQUIPO

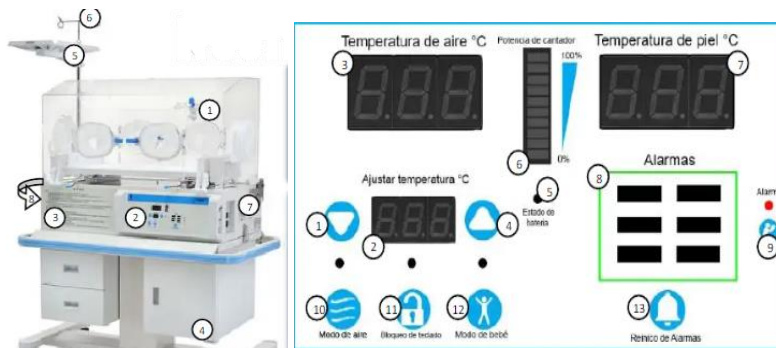

Partes del equipo delanteras:

1. Compartimento para el bebé
2. Panel de control del equipo
3. Base de la incubadora
4. Gabinete móvil de la incubadora
5. Repisa de la incubadora para accesorios
6. Atril
7. Alimentación y sensores para el bebé
8. Suministro de O₂ y H₂O

Partes del panel de control:

1. Botón para disminuir la temperatura
2. Indicador control de temperatura
3. Indicador de temperatura del aire
4. Botón para aumentar temperatura
5. Indicador del estado de la batería del equipo

PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO

1. Verifique que el equipo esté conectado a la red eléctrica
2. Verifique que los accesorios de monitoreo estén conectados
3. Verifique que los frenos estén activados
4. Adicionar el agua destilada en el compartimento de suministro del equipo
5. Revise los filtros de aire del equipo
6. Accione el botón de ON/OFF
7. Configurar los parámetros según sean necesarios
8. Mantener el compartimento del bebé lo más cerrado posible.



ADVERTENCIAS DE USO DEL EQUIPO


1. No excederse ni limitarse a la medida de H₂O del equipo
2. Evite las altas temperaturas
3. Evite ubicar el equipo cerca de gases medicinales
4. Evite ubicar el equipo cerca de campos electromagnéticos
5. Evite usar extensiones de conexión

	GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO	
	EQUIPO: INCUBADORA	CÓDIGO: NA
	MARCA: DAVID	VERSIÓN: 1
	MODELO: YP-90	FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2022

PRINCIPIO DE CONTROL DE TEMPERATURA

El funcionamiento de control de temperatura dentro de la cámara se logra por medio del sistema de circulación forzada de aire:

1. El aire exterior se filtra
2. Fluye a través del calentador
3. El aire entra a la cámara a través del puerto de entada
4. Ese aire baja directamente al motor de ventilador
5. Se convierte en flujo de aire, y este llega al tanque de agua
6. Finalmente, entrara a la cámara de vapor sobre el agua.

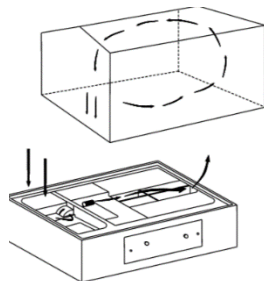

6. Indicador de la potencia de calefacción
7. Indicador de temperatura de la piel del bebe
8. Indicador clasificación de alarmas
9. Indicador de alarmas de sistema
10. Botón para activar el modo de aire de la incubadora
11. Botón para bloquear el teclado
12. Botón para activar el modo de bebe de la incubadora
13. Botón para reiniciar las alarmas

NIVELES DE ALARMA



ALARMA POR FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA	Activa un indicador, especificando que el suministro de potencia no está disponible
ALARMA POR DESVIACIÓN DE TEMPERATURA	Indica que los valores de temperatura no están en los rangos normales
ALARMA POR SOBRECALENTAMIENTO	Indica que los motores no están trabajando
ALARMA POR FALLA EN EL SENSOR	Si se activa este indicador, comunicarse con el área de mantenimiento.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS



Clasificación IIA de Riesgo moderad.



MODOS DE TRABAJO

1. **MODO AIRE:** Control de la salida del calentador por el sensor de T° aire.
2. **MODO BEBÉ:** Control de la salida del calentador por el sensor de T° de la piel.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO

La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%.

ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



1. No limpie el monitor con material abrasivo.
2. En caso de utilizar Klorkleen + Vital Care retirar el exceso del producto en la pantalla con otro trapo seco.
3. No vierta líquidos directamente sobre el equipo.
4. Llevar registro de limpieza y desinfección adecuadamente mínimo una vez al día.