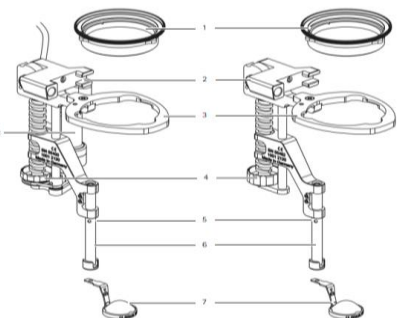
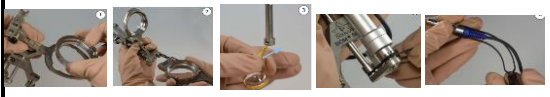


	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:		DÍA: 13	MES: 08
Nombre del equipo:	Oftalmoscopio binocular indirecto	Modelo:	Biom 5m SDI4m		Riesgo del equipo:	I
Marca:	Oculus			Clasificación del equipo:	Diagnóstico	
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
 El BIOM 5 se utiliza para la observación sin contacto de intervenciones en el segmento posterior del ojo. Su diseño único ofrece una visión de alta definición y amplio campo, principalmente en cirugías de vítreo, con un lente reductor que optimiza la visión de la retina y el limbo sin necesidad de reenfocar.				Limpieza: Utiliza agua fría y pistola de agua. Coloque la BIOM® 5 en agua fría durante cinco minutos, debe estar completamente cubierto. Enjuague los huecos, juntas y cavidades (los lugares marcados) durante 15 segundos con la pistola de agua.  Esterilización: Autoclavado de vapor a 134°.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		1. Lente reductora (no incluida en el volumen de suministro del Biom). 2. Cuerpo con mecanismo de basculamiento. 3. Portallente. 4. Rueda de enfoque. 5. Marca de control. 6. Portallupa con pasador de seguridad. 7. Lupa de oftalmoscopia (no incluida en el volumen de suministro del Biom®). 8. Módulo de accionamiento (solo Biom® 5c y Biom® 5cl).		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES		
1. Largo x ancho x alto: 63 x 112 x 110-145mm 2. Altura total aprox. 123-158 mm 3. Carrera del perno de seguridad aprox. 29 mm 4. Peso aprox. 250 g 5. Lente reductora aprox. 30 g 6. Lupa frontal en función aprox. 3 — 10 g"				1. El pasador de seguridad se queda trabado: Realizar una limpieza mecánica cuidadosa y retirar el cuerpo extraño. 2. El adaptador baila: Apretar los tornillos con un destornillador adecuado. 3. Imagen cortada o descentrada: Realizar un montaje correcto. 4. Imagen turbia: Limpiar las superficies de vidrio. 5. Imagen borrosa: Enfocar. 6. Ángulo de cobertura del fondo insuficiente: Reducir la distancia mediante el enfoque del microscopio. 7. Reflejos intensos sobre el ojo o la lupa: Apagar iluminación.		
MONTAJE		RECOMENDACIONES		PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO		
1. Monte la lente reductora, gire la lente reductora hacia la derecha hasta el tope. 2. Inserte la placa adaptadora hasta el tope. 3. Inserte la lupa hasta el tope. 4. Monte la correa de transmisión. 5. En primer lugar fije la guía para cable al conector. Pase a continuación el resto de la semiabertura por encima del cable. 		Antes de cada uso compruebe: 1. El estado técnico del aparato es correcto. 2. El estado de todas las conexiones y fijaciones desmontables es seguro. 3. La ranura receptora de cola de milano para el adaptador del microscopio está fijada con seguridad. 4. No monte nunca el BIOM® 5 por encima del paciente.		1. Esterilizar todas las partes del sistema. 2. Se ensambla fuera del espacio donde se encuentre el paciente. 3. Probar el funcionamiento del dispositivo. 4. Centrar y colocar en posición inicial el XY y el foco del microscopio. 5. Realizar parfocalización del microscopio antes de utilizar el Biom.		
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						