

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO			
		VERSIÓN		PÁGINA	DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO




ELECTROCARDIÓGRAFO

MARCA: FUKUDA
MODELO: CARDISUNY C120

Recomendaciones antes de usar

- Asegúrese que no falte ningún elemento del equipo ni que estén dañados.
- Asegúrese de que no haya humedad presente en el equipo al momento de utilizarlo.
- Si el equipo se encuentra muy sucio con polvo encima, límpielo antes de usarlo.
- Asegúrese que el equipo este correctamente conectado al tomacorriente de pared.
- Limpie bien las áreas donde irán los electrodos en la piel y aplique la crema conductora sobre la cara de contacto de los electrodos.

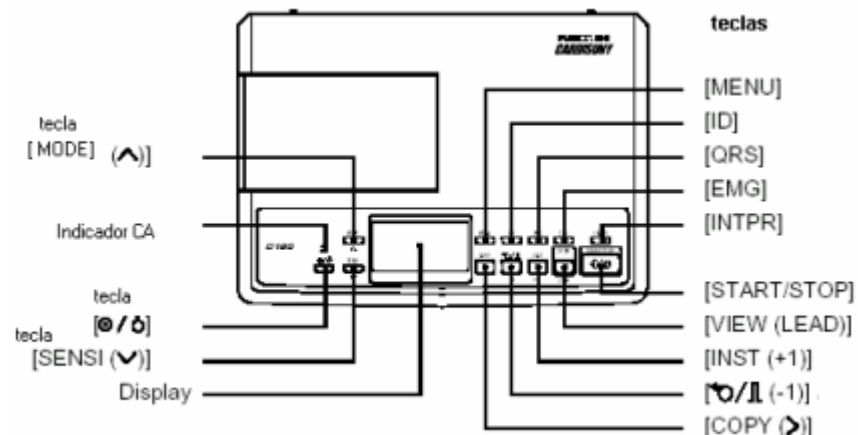


No.	Nombre	No.	Nombre
1	Modo de registro	5	Velocidad de registro
2	Indicador de sensibilidad	6	Tipo de filtro
3	Frecuencia cardíaca	7	Otras indicaciones
4	Símbolo de la batería		

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

Colocación de electrodos:

Coloque los electrodos de extremidades en las áreas mas suaves de la piel justo debajo de las muñecas y los tobillos.

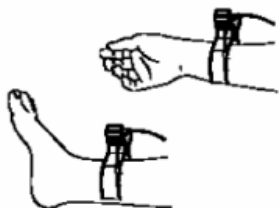

Posicione los electrodos de pecho acordes a la figura de la izquierda.

Registro automático:

- Seleccione el modo de registro automático utilizando la tecla [MODE (^)]
- Seleccione los mandos utilizando la tecla [VIEW (LEAD)] y controle la onda en la pantalla. Altere la configuración de sensibilidad y filtro como le sea apropiado para la onda mostrada.
- Se muestra “OK” a la derecha de la pantalla una vez que se obtuvo la onda. Presione la tecla [START/STOP]
- Se analizará la onda obtenida y se imprimen tanto la onda como los resultados del análisis en el formato preestablecido.
- Después de imprimir, el display vuelve a la pantalla de visualización.

Registro manual:

- Presione la tecla [MODE (^)] y seleccione el modo de registro manual.
- Seleccione los mandos utilizando la tecla [VIEW (LEAD)] y controle la onda en la pantalla. Altere la configuración de sensibilidad y filtro de acuerdo con la onda que se muestra.
- Presione la tecla [START/STOP] para comenzar el registro.
- Presione la tecla [VIEW (LEAD)] y seleccione los mandos.
- Presione la tecla correspondiente a la función que quiera llevar a cabo:
 - La tecla **[C/L (-1)]** registra la onda calibrada.
 - La tecla **[INST (+1)]**: cambia al modo instantáneo mientras esta presionada.
 - La tecla [EMG] cambia la configuración del filtro muscular.
 - La tecla [QRS] selecciona la sensibilidad de detección de QRS.
 - La tecla [SENSI] cambia la sensibilidad.
- Una vez se registró la onda necesaria, presione la tecla [START/STOP] para detenerlo.

Nota: Para llevar a cabo un **Registro de emergencia** presione la tecla [START/STOP] mientras mantiene presionado la tecla **[C/L (-1)]**. El display cambia a la pantalla de registro de emergencia y comienza el registro manual para tres canales.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES		AÑO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

RECOMENDACIONES:

- Corte la energía y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el equipo.
- En la medida de lo posible siga el protocolo recomendado por la institución.
- Limpie la superficie suavemente con un lienzo suave y seco. Si está muy sucio humedezca el lienzo con agua o con detergente suave diluido y elimine el exceso de líquido antes de usarlo. Asegúrese de que ningún líquido penetre en el dispositivo.
- La suciedad de la impresión se adhiere a la unidad de calor después que la tapa termina haya sido utilizada por un largo tiempo. Quite la suciedad con una gasa humedecida en alcohol puro.
- Limpie los electrodos y cable paciente a profundidad con agua con jabón para remover cualquier remanente de crema y séquelo bien antes de almacenarlo.
- Desinfecte pasándole suavemente un desinfectante como alcohol al 70%.

ADVERTENCIA:

- No sumerja en líquido limpiador, agua caliente, vapor o aire caliente.
- No utilice tiner o benceno ya que dañara la superficie del equipo.

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA “ E.S.E	CÓDIGO				
		VERSIÓN		PÁGINA		DE
	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO	

FALLAS MÁS FRECUENTES.

Cuando se activen las alarmas en el equipo, siga los pasos que se especifican a continuación y actúe según corresponda:

1. Compruebe el estado del paciente
2. Identifique el parámetro por el que se ha activado la alarma y la categoría de esta
3. Identifique la causa de la alarma
4. Lleve a cabo las acciones pertinentes para erradicar la causa de las alarmas

Falla	Posible causa	Solución
Check lead	El electrodo resaltado está suelto	Revise los electrodos
Low voltage	No se puede detectar un QRS durante un periodo de 5 segundos	
Noise	Se realiza una “Reexaminación” debido a la inclusión de ruido	Detenga el registro usando la tecla [START/STOP]. El display cambia a pantalla de visualización. Revise los electrodos y el paciente antes de volver a registrar. Si la amplitud de QRS es muy baja, presione la tecla [HIGH] para ajustar la sensibilidad.
Drift (II)	Se dio una evaluación de la “Reexaminación” o “Technical defect” debido a una desviación en la línea de base	
R-Low	No se pudo detectar un QRS o la QRS detectada no fue constante por menos de dos latidos	Al presionar la tecla [VIEW (LEAD)] continua el registro. Se imprimirá como comentario el error.
RA-LA Reverse?	Los electrodos de los brazos se encuentran en la posición contraria.	Detenga el registro, revise la posición de los electrodos de las extremidades, rectifique si es necesario y presione la tecla [VIEW(LEAD)] para continuar el registro.
Saturation	El amplificador está saturado debido al excesivo potencial de polarización que impide obtener el ECG.	Revise los electrodos y al paciente. Reemplace con nuevos electrodos si es necesario.
Drift	Ocurrió un salto en la línea de base mientras se obtenía el ECG durante el registro de control de arritmia	Realice un control de arritmia si se habían obtenido más de 10 segundos de onda antes de que ocurriera el error
Lead error	Se soltó un electrodo mientras se obtenía el ECG durante el registro de control de arritmia	Revise los electrodos y el paciente antes de reanudar el registro
Paper error	Se termino el papel milimétrico o no está cargado de manera apropiada	Cargue el papel milimétrico específico de manera correcta
Fold error	El papel milimétrico no está colocado de manera correcta	