



CALLE 53 No. 4º-69 OFICINA 504 BOGOTÁ, D.C. -- COLOMBIA
C. C. LA QUINTA LOCAL 246 TEL. (8) 2663759 -- IBAGUE
www.gxcmedicals.com

REPORTE DE SERVICIO

HUV0033

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA		
CIUDAD:	CALI	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2020
EQUIPO:	VENTILADOR MECÁNICO	MODELO:	LUFT 3 AP
MARCA:	LEISTUNG	INVENTARIO:	
SERIE:	N02048	HORA DE INICIO:	
SERVICIO:	UCI ADULTO	UBICACIÓN:	AISLAMIENTO

TIPO DE SERVICIO: REVISIÓN POR REPORTE DE FALLAS DURANTE GARANTÍA**INSPECCIÓN INICIAL**

Se realiza revisión del equipo para iniciar ejecución de protocolo de mantenimiento preventivo.

PROCEDIMIENTO REALIZADO

Ajuste electrónico por software
Revisión de ausencia de fugas
Revisión de presión de válvula T con escape (60 cmH2O)
Revisión de flujos por aire y oxígeno
Revisión de puntos de apertura
Trazado de curvas de flujo por aire y oxígeno
Trazado de curva por PEEP

CANTIDAD	REPUESTOS UTILIZADOS

OBSERVACIONES

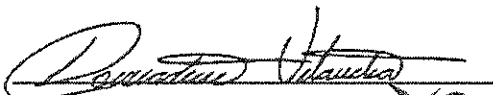
Se realizan pruebas de funcionamiento y verificaciones cumpliendo el protocolo de fábrica, se calculan porcentajes de error para verificar la diferencia de la medición vs el error max permitido dispuesto por fábrica, se adjuntan mediciones a este reporte.

Realizado Por:

Firma

Nombre

Cargo

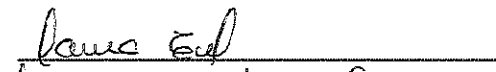

Donnadine Velandia Alvarado
Ingeniera Biomédica

**Recibido Por:**

Firma

Nombre

Cargo


Laura Esada Gómez
Inf Biomédica

Bogotá, 15 de Noviembre de 2020

Ingeniera Natalia Pedreros

Hospital Universitario del Valle Evaristo Garcia

Cali

ASUNTO: INFORME DE VISITA POR REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO.

Cordial saludo,

GYC Medicals SAS en compañía de Leistung ingeniera S.R.L realizamos visita de verificación de condiciones de los equipos de la institución desde el 5 al 13 de noviembre del año en curso con el fin de dar solución a los inconvenientes que se han presentando en cuanto al funcionamiento y operación de los ventiladores mecánicos Leistung modelo Luft3 AP, para ello contamos con una ingeniera biomédica que se encargó de realizar procesos de ajuste electrónico a través de software, adicionalmente realizó revisión de ausencia de fugas, presión correcta en la válvula T con escape, revisión de flujos, revisión de punto de apertura de las válvulas proporcionales de aire y oxígeno, trazado de curvas de flujo por aire y oxígeno y trazado de curva de PEEP, de acuerdo al análisis anterior hecho con cada equipo se hizo la corrección pertinente que el equipo requiriese, después de realizados los chequeos, cada equipo se puso en funcionamiento teniendo un tiempo mínimo de ciclado de al menos 2 horas recomendadas por fábrica para asegurar y verificar el continuo uso del ventilador con ausencia de cualquier tipo de falla.

Durante los días 12 y 13 de noviembre, Leistung ingeniería S.R.L. muestra el alto nivel de compromiso disponiendo un representante de fábrica, el sr. Rodrigo Sapia, quien realiza revisiones a través de mediciones de cada uno de los equipos de la institución verificando que, en cada punto de medición el valor entregado por el equipo fuese menor al error máximo permitido descrito por fábrica ($\pm 4 \text{ ml} + 15\%$ del volumen programado referido en la página 21 del manual de usuario), estas mediciones fueron realizadas con equipo patrón, analizador de flujo y presión de gases Fluke VT 650 SN: 4200017 con calibración vigente realizada por Set y Gad, la tabla de mediciones se encuentra adjunta a este documento

Es importante aclarar que cada uno de los procedimientos realizados sobre los ventiladores corresponden a lo reglamentado, están bajo directriz del fabricante y fueron avalados por el delegado de fábrica.

Así mismo se realizó reunión con la ing Natalia Pedreros, la ing Laura Escobar, el ing. Cristian Molina y el dr coordinar de fisioterapeuta Alvaro Arias, para socializar los trabajos realizados a los equipos, se brindó



Centro comercial la quinta local 246
Tel (8) 2 66 37 59 Ibagué/ Tolima

Calle 40 N° 25 07 Barrio La Soledad
Tel (1) 3 22 41 75 Bogotá D.C

capacitación al personal presente, se expresó que las fallas presentadas en algunos equipos pudieron darse por la logística de traslado del equipo, reiteramos también nuestra compañía y entera disposición con la institución.

Para concluir, enviamos al ing. Cristian Molina, para que comparta y divulgue al personal convocado a la reunión, carta donde se informa que se realizarán capacitaciones de manejo del equipo con nuestra Fisioterapeuta al personal de la institución, para ello se deben recibir disponibilidades de los grupos a capacitar.

Atentamente,

MIGUEL FELIPE CONTRERAS BARRAGAN
Representante Legal

Laura Escobar.
Ing. Biomédica

Lectura realizada 400 ml, error permitido 4 ml+/- 15% (64 ml)
lectura máxima 464 ml lectura mínima 336 ml

Serie	Vol	21 %	% error	50 %	% error	100 %	% error
M02974	0,40	0,390	2,5 %	0,350	12,50 %	0,393	1,75 %
N02095	0,40	0,391	2,25 %	0,378	5,50 %	0,394	1,50 %
N02028	0,40	0,370	7,5 %	0,340	15,00 %	0,380	5,00 %
M02966	0,40	0,372	7 %	0,349	12,75 %	0,419	-4,75 %
N02091	0,40	0,350	12,5 %	0,340	15,00 %	0,390	2,50 %
M02992	0,40	0,340	15 %	0,338	15,50 %	0,401	-0,25 %
N02027	0,40	0,415	-3,75 %	0,376	6,00 %	0,408	-2,00 %
N02045	0,40	0,365	8,75 %	0,370	7,50 %	0,410	-2,50 %
N02081	0,40	0,363	9,25 %	0,361	9,75 %	0,402	-0,50 %
N02031	0,40	0,391	2,25 %	0,375	6,25 %	0,390	2,50 %
N02100	0,40	0,350	12,5 %	0,348	13,00 %	0,394	1,50 %
N02099	0,40	0,372	7 %	0,359	10,25 %	0,413	-3,25 %
N02020	0,40	0,381	4,75 %	0,363	9,25 %	0,415	-3,75 %
N02010	0,40	0,370	7,5 %	0,357	10,75 %	0,411	-2,75 %
N02055	0,40	0,387	3,25 %	0,375	6,25 %	0,420	-5,00 %
M02430	0,40	0,387	3,25 %	0,362	9,50 %	0,415	-3,75 %
N02052	0,40	0,361	9,75 %	0,351	12,25 %	0,390	2,50 %
M02839	0,40	0,381	4,75 %	0,377	5,75 %	0,417	-4,25 %
M02950	0,40	0,354	11,5 %	0,349	12,75 %	0,462	-15,50 %
M02938	0,40	0,371	7,25 %	0,357	10,75 %	0,398	0,50 %
N02011	0,40	0,396	1 %	0,411	-2,75 %	0,463	-15,75 %
N02048	0,40	0,404	-1 %	0,405	-1,25 %	0,458	-14,50 %

Serie	Vol	21 %	% error	50 %	% error	100 %	% error
M02932	0,40	0,394	1,5 %	0,383	4,25 %	0,434	-8,50 %
N02085	0,40	0,391	2,25 %	0,382	4,50 %	0,420	-5,00 %
M02955	0,40	0,363	9,25 %	0,370	7,50 %	0,395	1,25 %
M02983	0,40	0,395	1,25 %	0,383	4,25 %	0,425	-6,25 %
N02042	0,40	0,423	-5,75 %	0,409	-2,25 %	0,457	-14,25 %
N02036	0,40	0,351	12,25 %	0,344	14,00 %	0,393	1,75 %
N02021	0,40	0,441	-10,25 %	0,427	-6,75 %	0,455	-13,75 %
M02917	0,40	0,410	-2,5 %	0,407	-1,75 %	0,456	-14,00 %
M02953	0,40	0,348	13 %	0,338	15,50 %	0,390	2,50 %
N02003	0,40	0,428	-7 %	0,401	-0,25 %	0,441	-10,25 %
M02493	0,40	0,384	4 %	0,388	3,00 %	0,442	-10,50 %
M02975	0,40	0,362	9,5 %	0,337	15,75 %	0,402	-0,50 %

180. Laura Escobar
Ing. D. Umé dice