

INSTRUCCIONES RESUMIDAS

VIO® 300 S


! Las instrucciones resumidas no sustituyen a la instrucción ni al manual de instrucciones. Las instrucciones resumidas no contienen indicaciones de seguridad. Familiarícese con las indicaciones de seguridad en los manuales de instrucciones.

Pasos de mando necesarios

1 Encender el aparato




2 Seleccionar y aceptar un programa

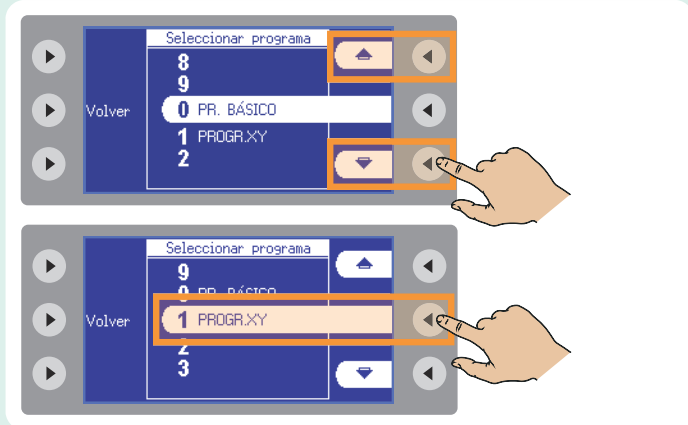


3 Comprobar los ajustes

Compruebe los ajustes de las conexiones para instrumentos pulsando sucesivamente las teclas de enfoque correspondientes.

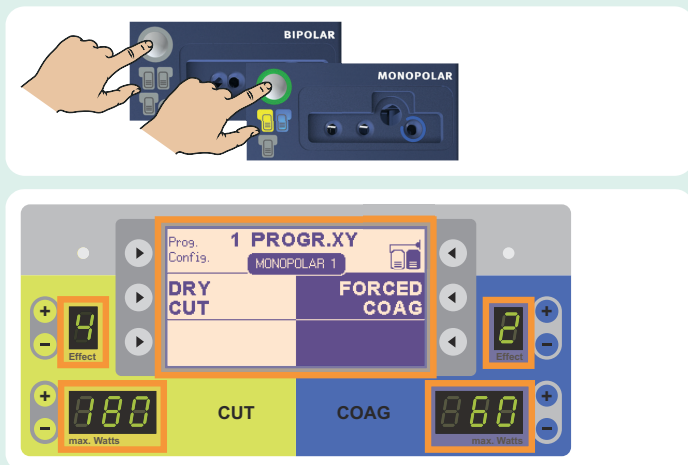

4 Aplicar y conectar el electrodo neutro


Solo si utiliza un instrumento monopolar.

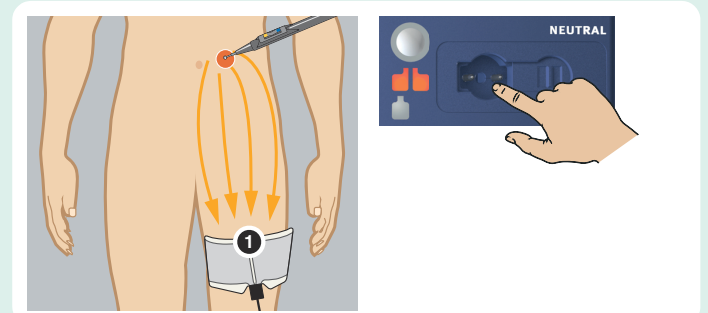

El borde largo del electrodo neutro (1) debe estar dirigido hacia el campo quirúrgico.

5 Vigilar el electrodo

Tras la aplicación y durante la intervención.

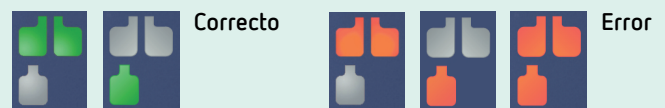

Si el símbolo del electrodo neutro aparece en rojo, compruebe si

- el electrodo neutro está correctamente conectado al aparato.
- el borde largo del electrodo neutro está dirigido hacia el campo quirúrgico.
- el electrodo neutro tiene suficiente contacto con la piel.


6 Conectar los instrumentos



ATENCIÓN: Los conectores monopolares de 4 mm de diámetro solo se deben conectar a la conexión identificada con el anillo azul (1). De lo contrario, dañará el aparato.

Pasos de mando opcionales

7 Cambiar el modo

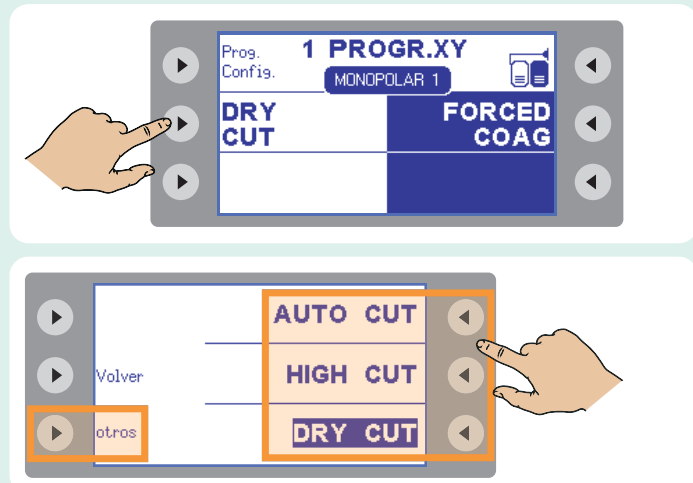

Con la tecla "otros" puede seleccionar otros modos (si están disponibles).

8 Cambiar el efecto



9 Cambiar el límite de potencia




10 Seleccionar conexión (p. ej. BIPOLAR)



11 Asignar a la conexión seleccionada el interruptor de pedal o AUTO START

AUTO START solo se puede asignar a la conexión bipolar.

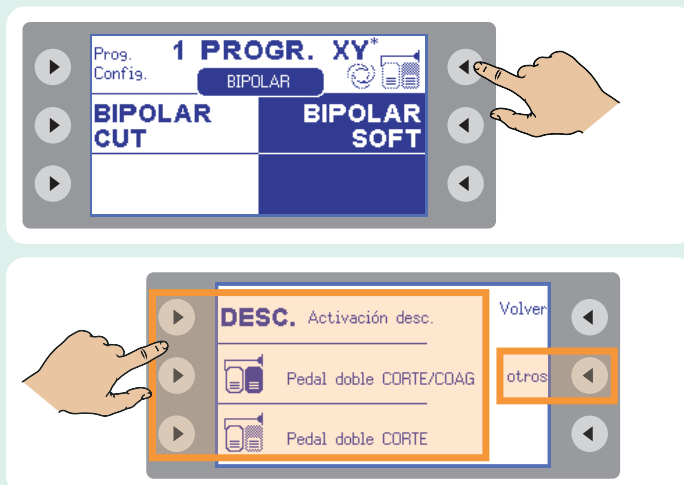

Con la tecla "otros" puede seleccionar otros tipos de interruptor de pedal (si están disponibles) o AUTO START.

12 Abrir la botella de argón para las aplicaciones de APC

