


GUÍA RÁPIDA INCUBADOR 37 S I

ID Microtyping System - BIORAD




ON/OFF


El interruptor se encuentra en la parte anterior derecha del equipo.

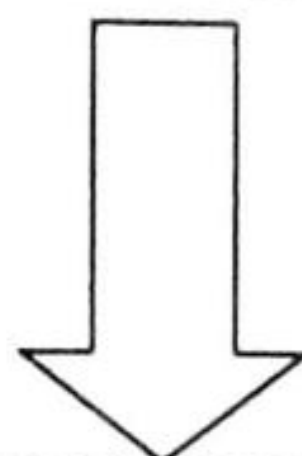


Una vez el equipo es encendido el Incubador toma un tiempo de 10 a 15 min para regular la temperatura a $37 \pm 2^{\circ}\text{C}$, durante este proceso visualiza el mensaje 'esperar por favor'.

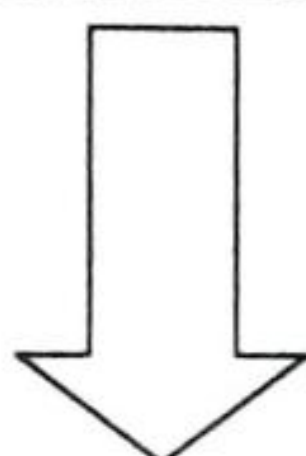

Una vez alcanza la temperatura visualiza el mensaje 'preparado'. En este momento se puede presionar la tecla START para poner a funcionar el temporizador digital incorporado en el equipo.

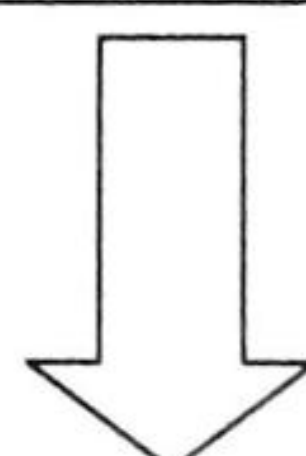

Si es necesario interrumpir el proceso de trabajo del incubador, se debe presionar la tecla STOP ubicada en el mismo panel frontal en el que se encuentra la tecla START.

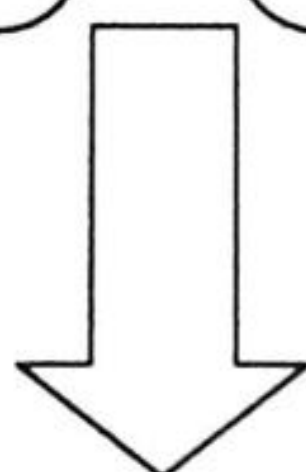

El Incubador tiene programado un tiempo de fabrica de 15 min, ya que las pruebas del ID Micro Typing System se incuban en este tiempo, sin embargo existe la posibilidad de cambiarlo con la tecla TIMER, que es la misma de STOP solo que funciona cuando el temporizador digital no está activado, es decir cuando no se le ha dado la orden de contar los 15 min programados originalmente