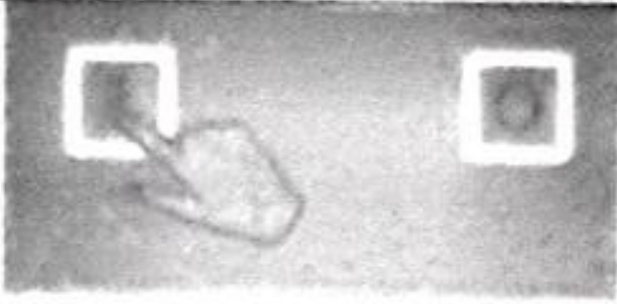
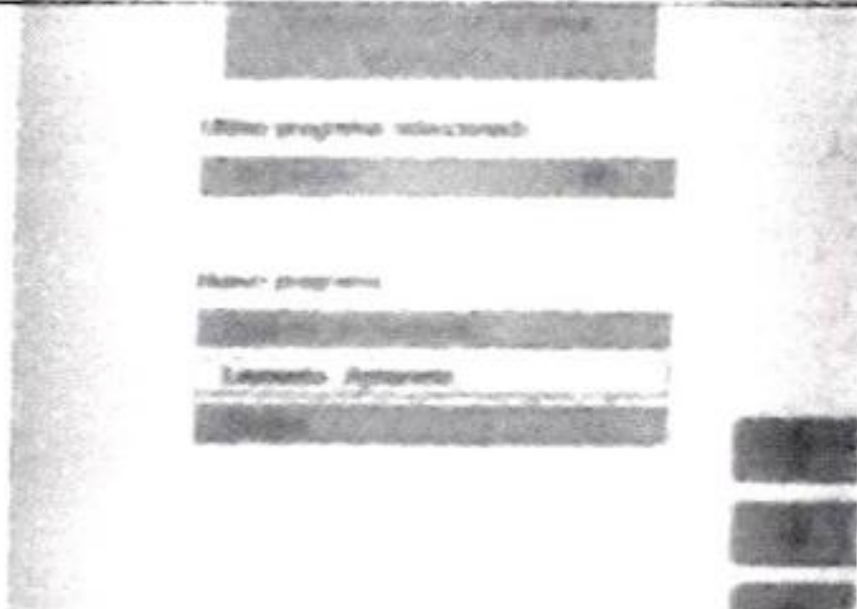
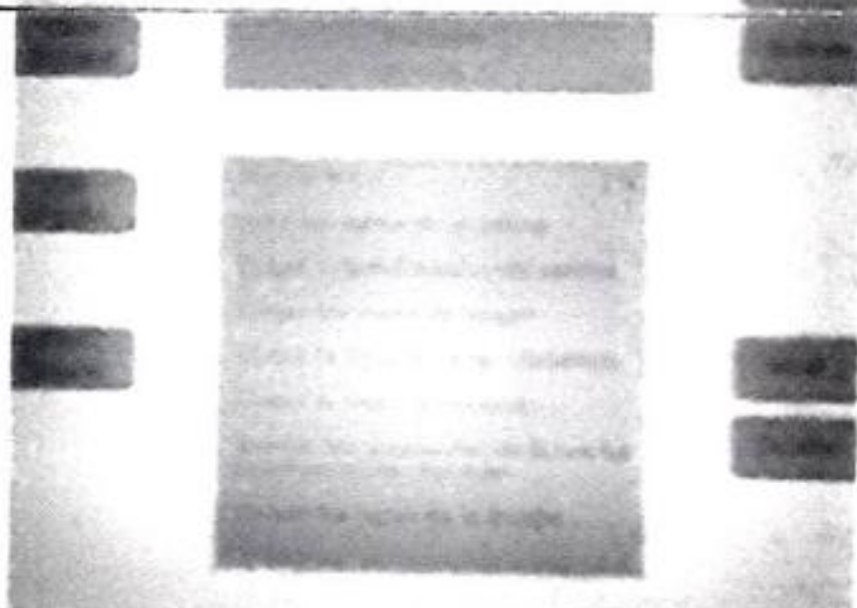
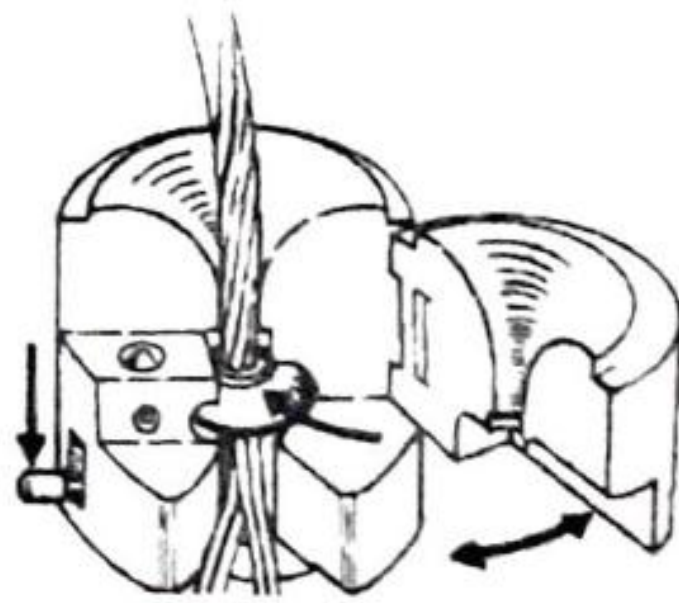
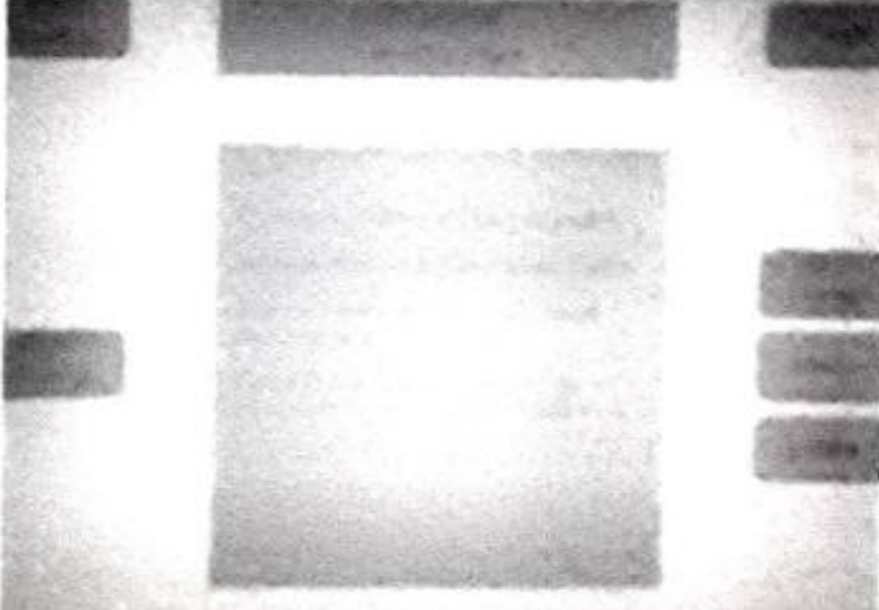
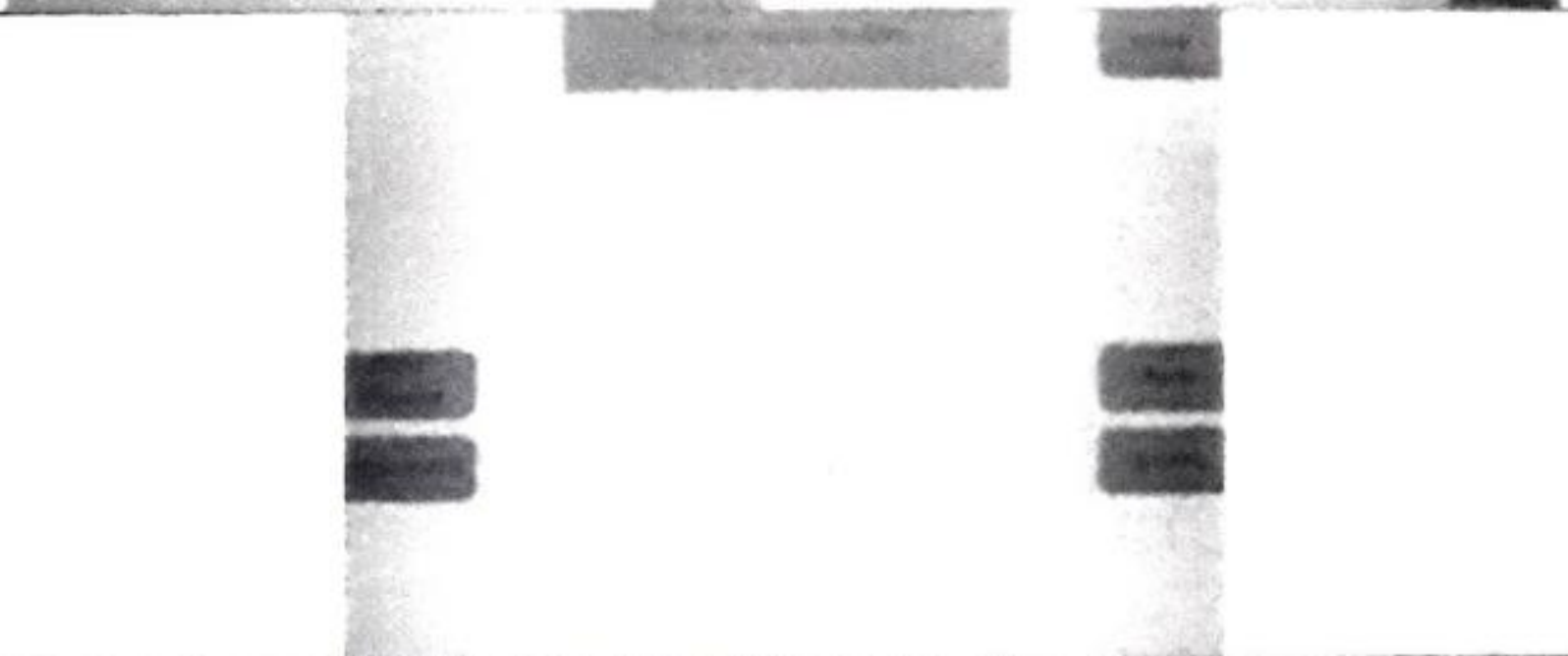
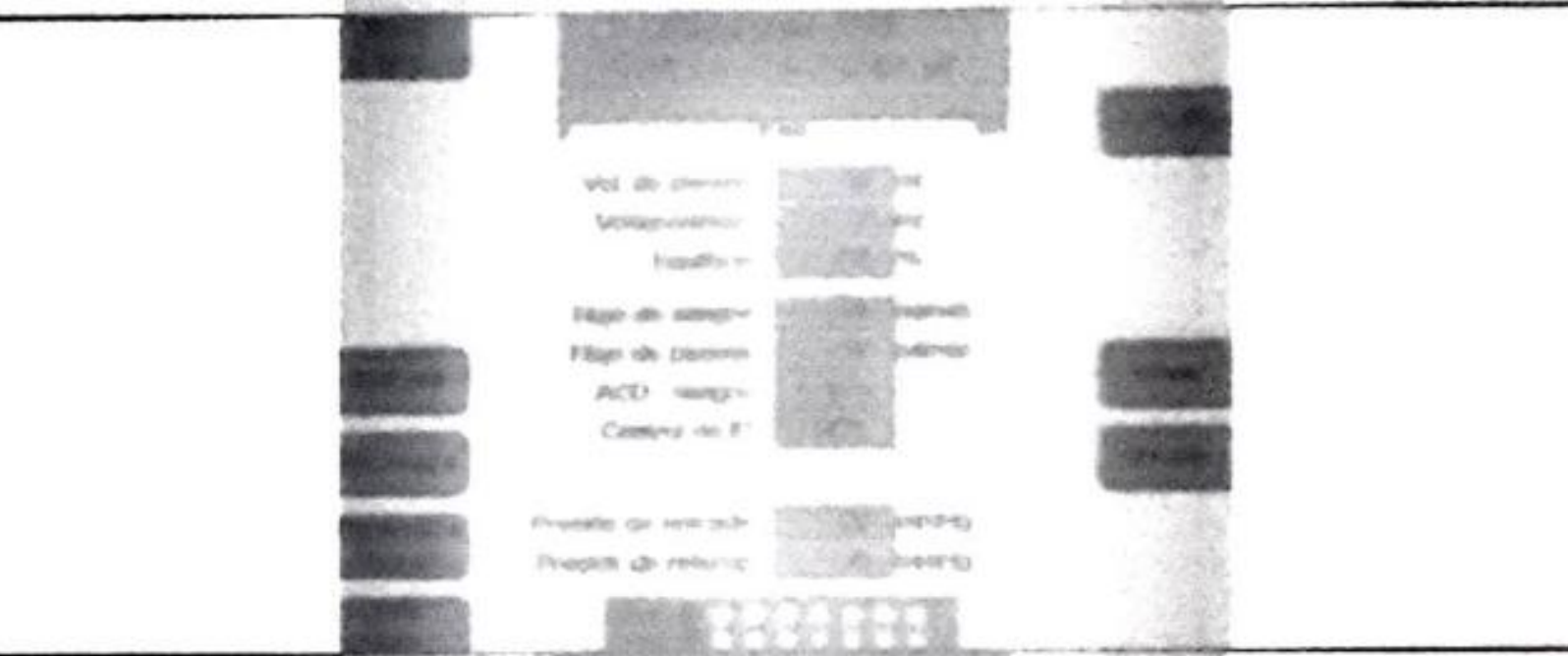
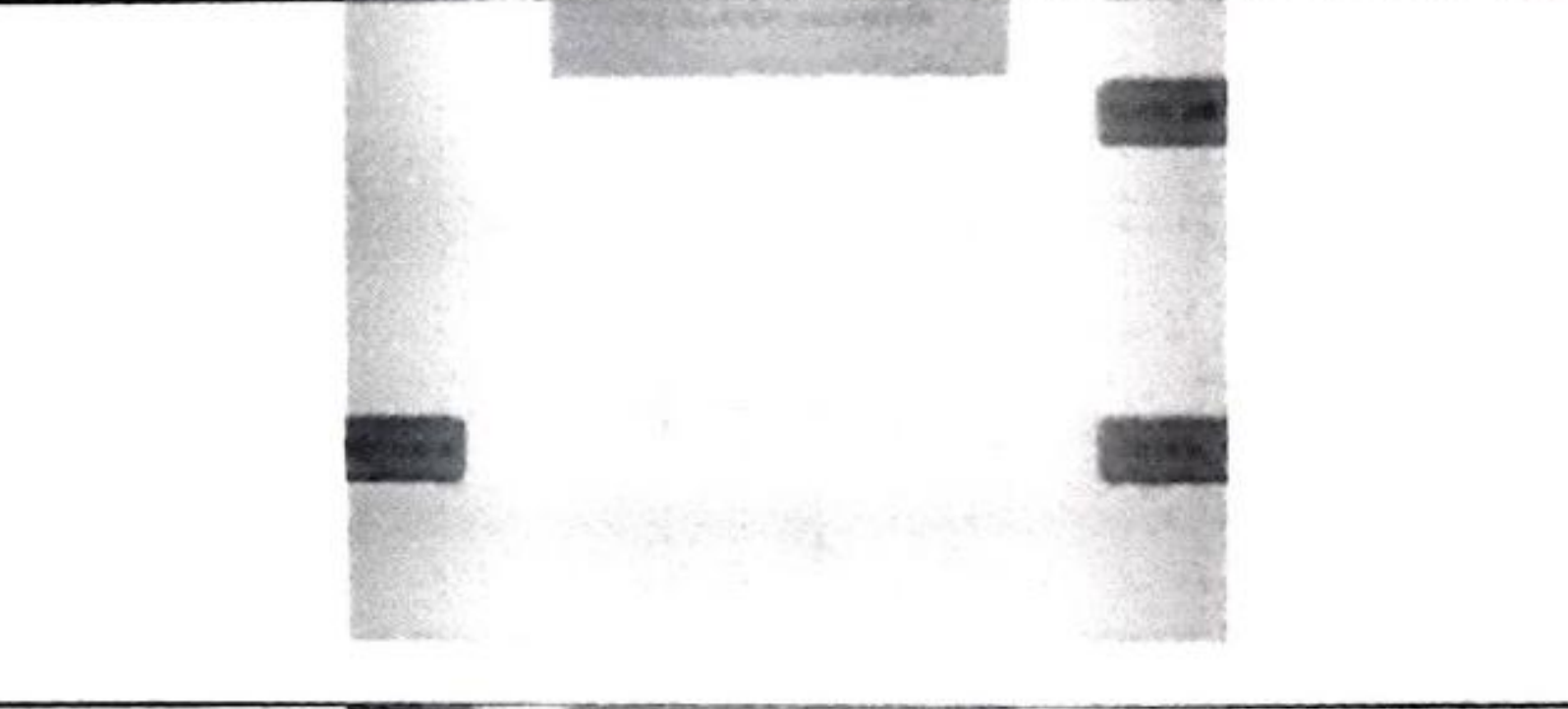
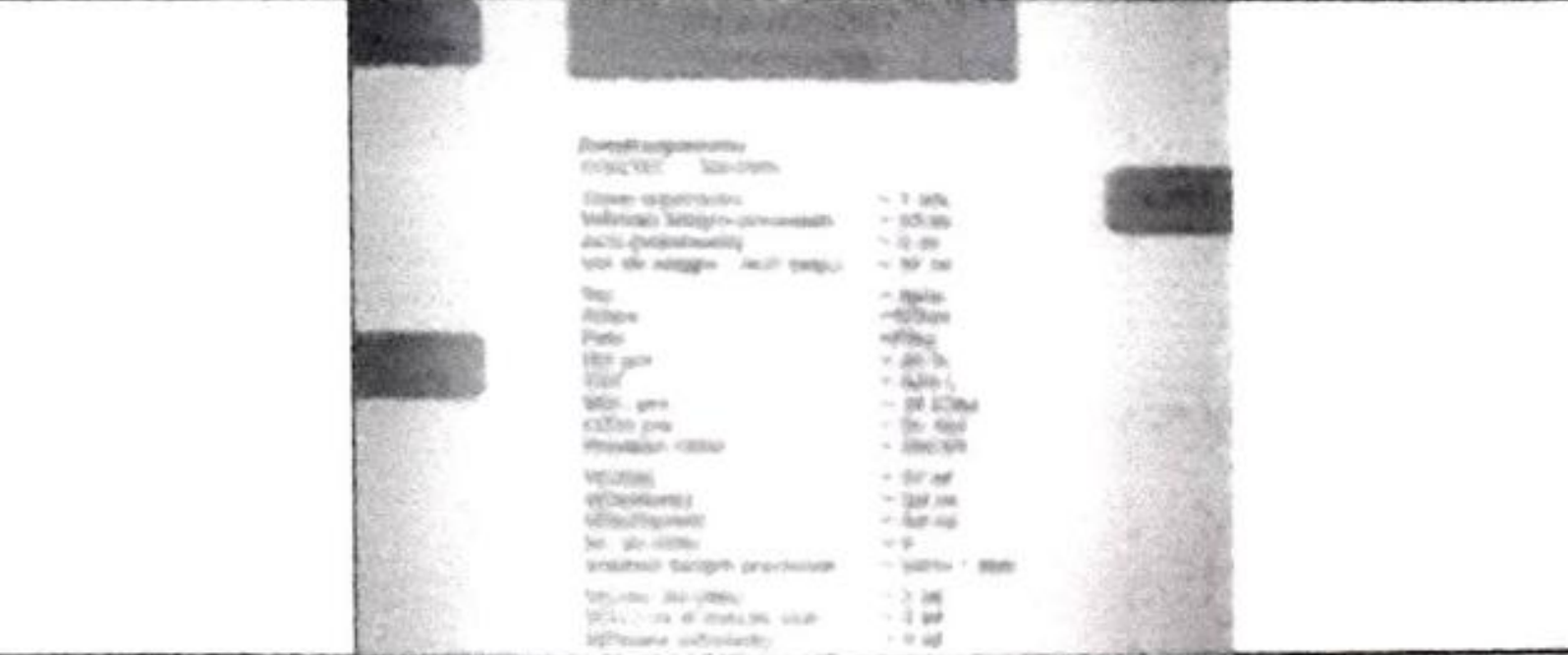


GUIA RAPIDA COM.TEC

1. Encienda el equipo pulsando la tecla I ubicada en la parte frontal del equipo debajo de la pantalla. El equipo realizará una comprobación inicial antes de dar paso a la pantalla inicial.	
2. En la pantalla inicial se mostrará la versión del software instalada, ahora pulse la tecla continuar.	
3. Use las teclas ▲ y ▼ para seleccionar la opción terapia y luego el programa deseado, confirme su opción con la tecla OK	
4. El mensaje Instalar set indica al operario que debe instalar el kit de aféresis, debe seguir los pasos allí descritos para cada set, pulse la opción mas ayuda para observar el paso a paso completo. (cuando sea necesario girar bombas se recomienda insertar los segmentos de las bombas en grupos de dos y no las cuatro al tiempo para evitar inconvenientes).	
5. Coloque la camara de separacion en su soporte, al realizar esto se debe oír un click, abra la puerta abatible del soporte de la camara, deslice el adaptador circular de la camara de separacion dentro de la muesca en el embudo central, coloque la camara de separacion en la centrifuga, baje la guia metalica completamente, inserte la tubuladura en la guia lateral y gire la centrifuga manualmente para observar que todo quedo bien instalado, cierre completamente la puerta.	
6. Luego el equipo le indicará los pasos a seguir para realizar el cebado, en este momento encontrará en pantalla Preparar prellenado. Para realizar el prellenado pulse la tecla Prime	

7. Durante el prime o cuando el set a terminado el prime puede ingresar los datos del procedimiento (datos del paciente y datos de la separacion).	
8. Cuando se han completado todos los pasos aparecerá la pantalla de Iniciar Separación, allí se activan automáticamente todos los sistemas de alarma. Pulse la tecla Iniciar	
9. Durante el proceso podrá observar en pantalla todos los datos relacionados con el procedimiento y podrá modificar la velocidad de extracción y retorno según sea conveniente.	
10. Cuando se obtiene la recolección objetivo, la separación se detiene automáticamente y el equipo dará la opción de realizar reinfusión o finalizar procedimiento, seleccionamos realizar reinfusión, cuando finalice la reinfusión el equipo dará la opción desconectar paciente y luego retirar equipo (se recomienda quitar los segmentos de las bombas en grupos de dos y no las cuatro al tiempo).	
11. Finalizado el procedimiento aparecen los valores finales los cuales comprenden todos los parámetros relevantes del procedimiento.	
12. Después de tomar los datos requeridos por protocolo institucional puede apagar el equipo. Pulse la tecla O y el dispositivo se apagará.	