


GUÍA RÁPIDA CENTRIFUGA 12SII

ID Microtyping System - BIORAD




ON/OFF

El interruptor se encuentra en la parte anterior derecha del equipo.

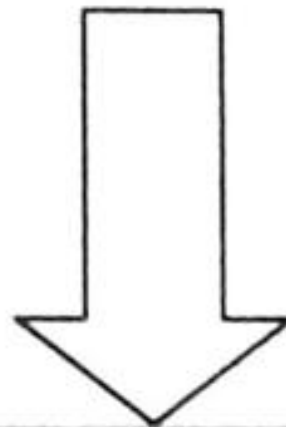


Una vez el equipo es encendido, está listo para trabajar.


Para poner a funcionar la centrifuga, la puerta debe estar cerrada y asegurada y solo es necesario presionar la tecla START ubicada en el panel frontal del equipo.

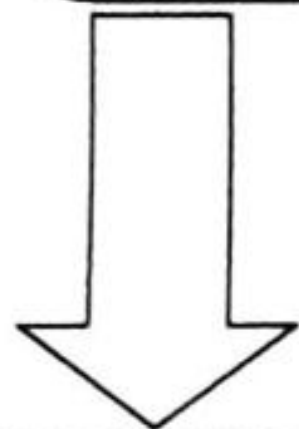


La centrifuga alcanza una velocidad de 1030 RPM en 13 segundos y tiene un tiempo de centrifugación de 10 min calibrados por un reloj digital el cual esta incorporado en el equipo

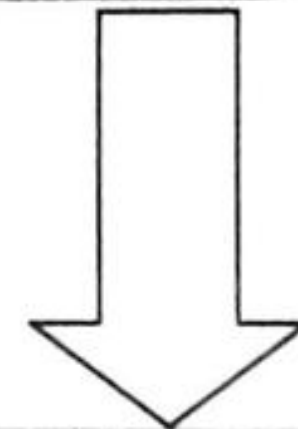

Si es necesario interrumpir el proceso de trabajo de la centrifuga, se debe presionar la tecla STOP ubicada en el mismo panel frontal en el que se encuentra la tecla START.

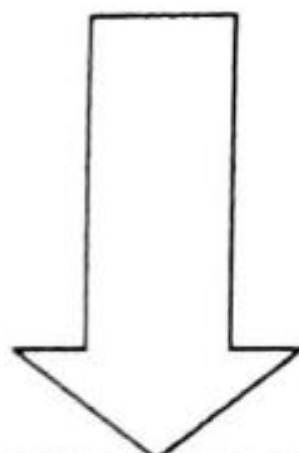

Al cumplirse el tiempo, la centrifuga se detiene, una vez la velocidad es cero se abre la tapa automáticamente y así mismo avisa con una alarma sonora el cumplimiento del trabajo.

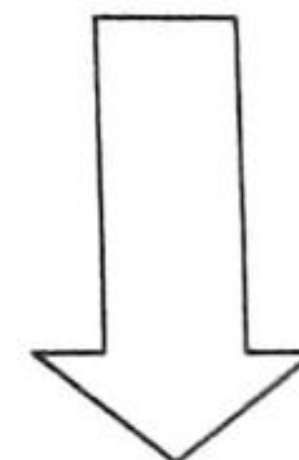

Si presiona la tecla STOP antes de cumplirse el tiempo de programación (10 minutos), se detiene y con alarma sonora muestra el mensaje 'INTERRUPCIÓN' y abra la tapa.