


5. Realice la flebotomía. Fije la aguja cómodamente en el brazo del donante y tome los tubos de muestras según el protocolo establecido por la Institución.




6. Rompa la cánula o abra el clamp de la tubuladura que permite el paso del flujo sanguíneo hacia la bolsa vacía de recolección y pulse la tecla play.


(Automáticamente el peso de la bolsa que aparecía en gramos será tarado por la CompoGuard e iniciará a calcular el volumen de la unidad de sangre en ml descontando el peso inicial).

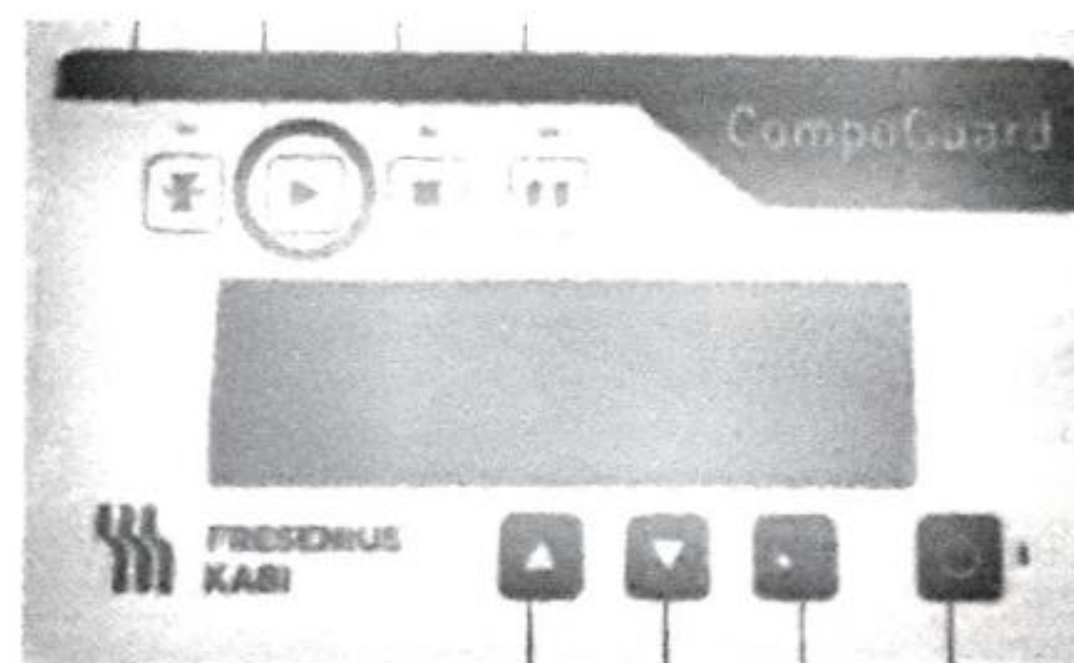


7. Si requiere pausar el procedimiento presione la tecla pause, de lo contrario la recolección de la sangre seguirá hasta que cumpla con el volumen deseado (programado previamente por el equipo de ingeniería en su equipo CompoGuard) y aparecerá una alarma sonora que le indicará al operador que ya ha finalizado el proceso de donación y se cerrará de nuevo el clamp de seguridad pero seguirá la agitación de la unidad recolectada hasta que el operador indique que se ha finalizado el proceso de donación.

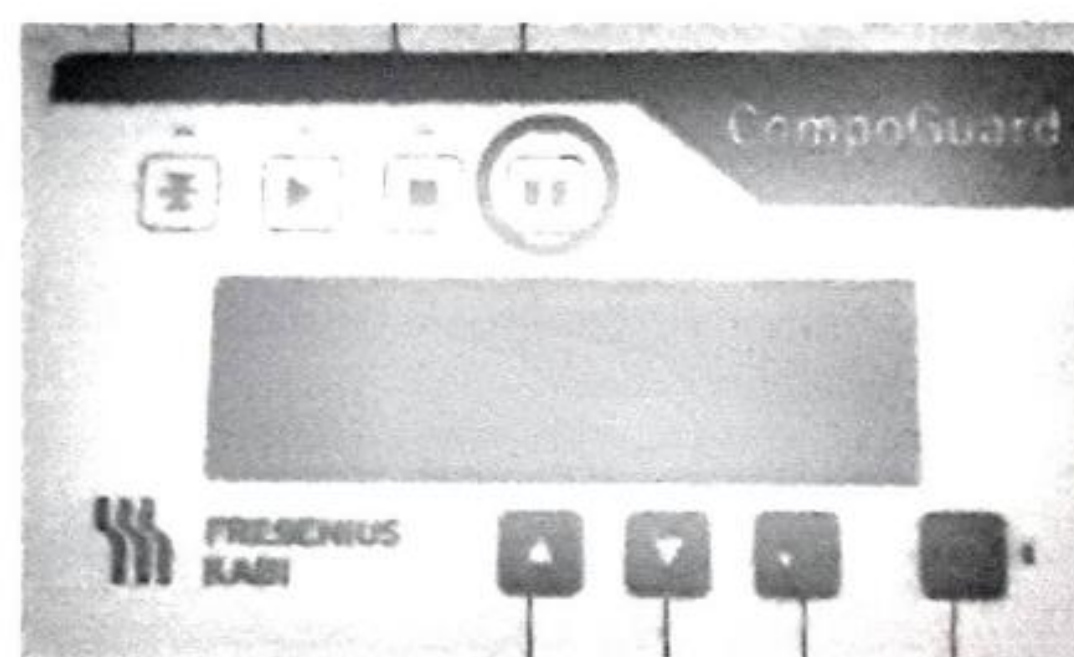



8. Retire la aguja del brazo del donante según los protocolos de la institución y presione la tecla stop. En la pantalla aparecerán los resultados finales del proceso.

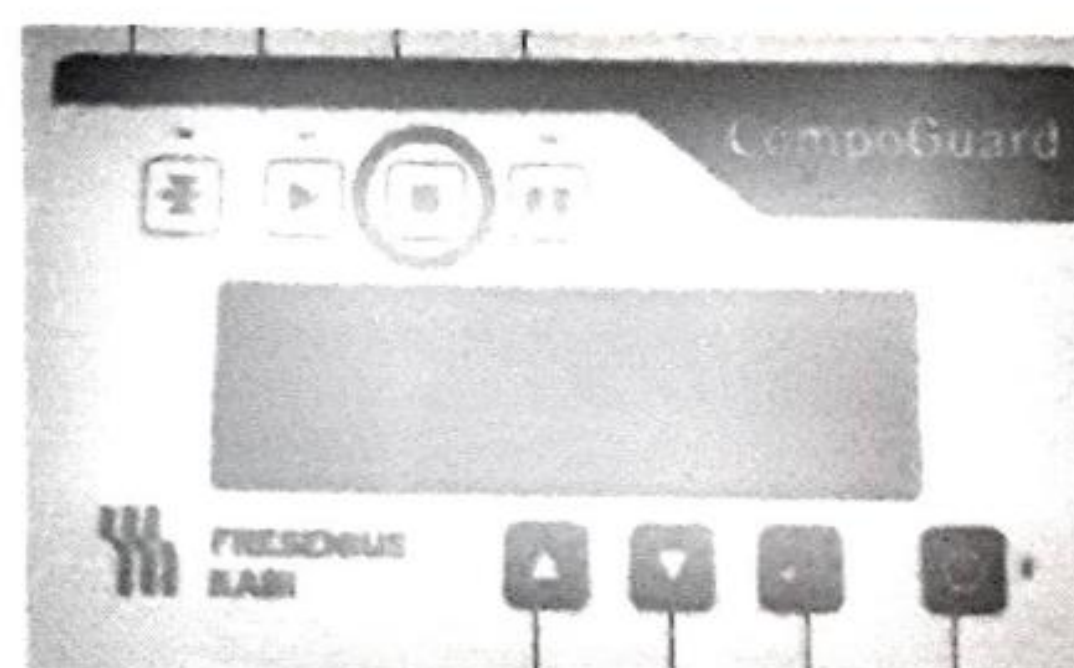

9. Para iniciar un nuevo procedimiento presione de nuevo la tecla Tube. Desaparecerán los datos anteriores y aparecerá en la pantalla la tara de la bandeja en cero.

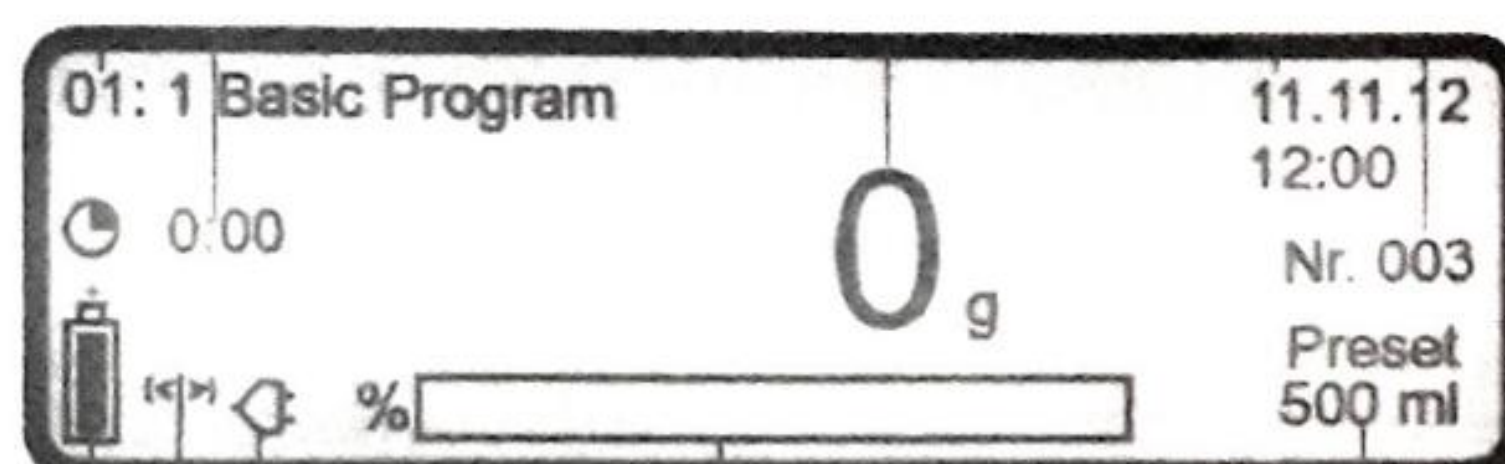

Ref. Guía Rápida de Utilización Compoguard

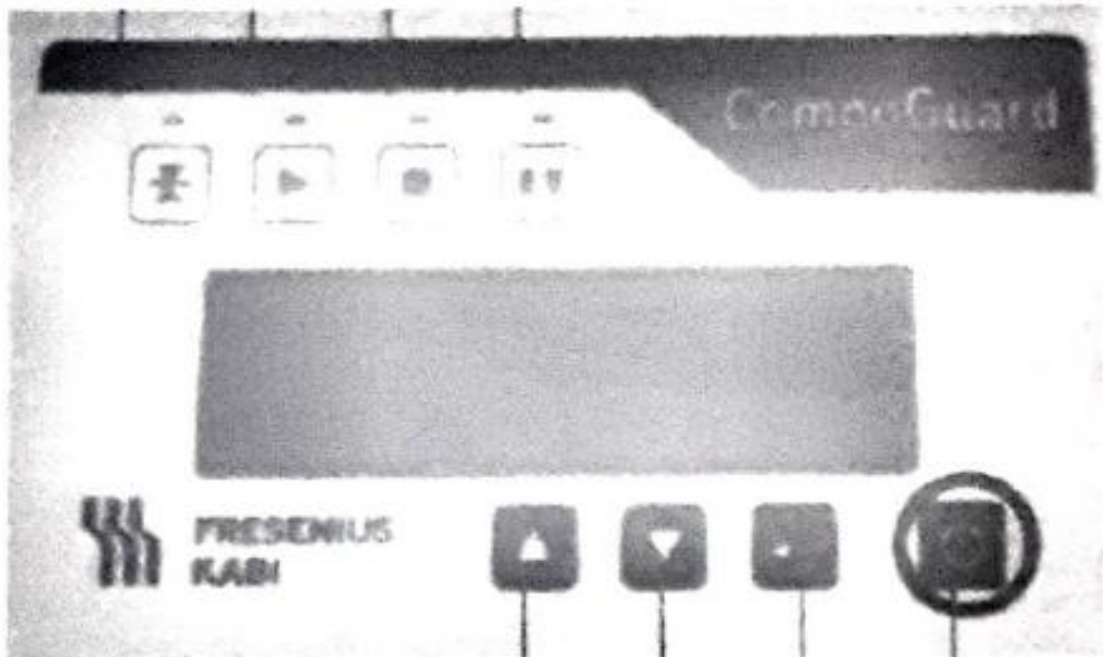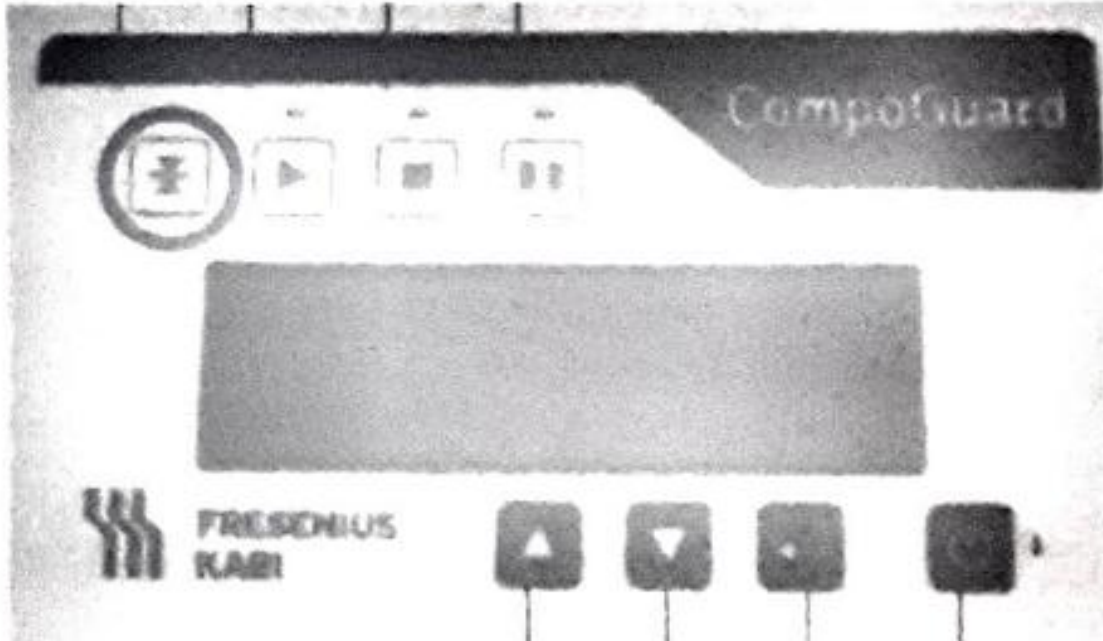1. Coloque el instrumento sobre una superficie plana cerca del lugar de trabajo	
2. Presione la tecla On / Standby durante 2 segundos Se realiza la comprobación del sistema automáticamente y aparece un mensaje de "abrir el clamp" (Open Clamp).	
3. Presione la tecla Tube (el LED amarillo parpadea). El clamp de seguridad se abre y la bandeja grande de agitación se alinea para poder instalar la bolsa para recolección de sangre. - Aparecerá un mensaje de insertar el sistema bolsas (Insert bag system)	
4. Coloque la bolsa de sangre vacía en la bandeja e inserte la tubuladura en el clamp de seguridad. Luego presione de nuevo la tecla Tube para dejar el clamp de seguridad cerrado. - Aparecerá en la pantalla del equipo el peso de la bolsa en gramos.	