
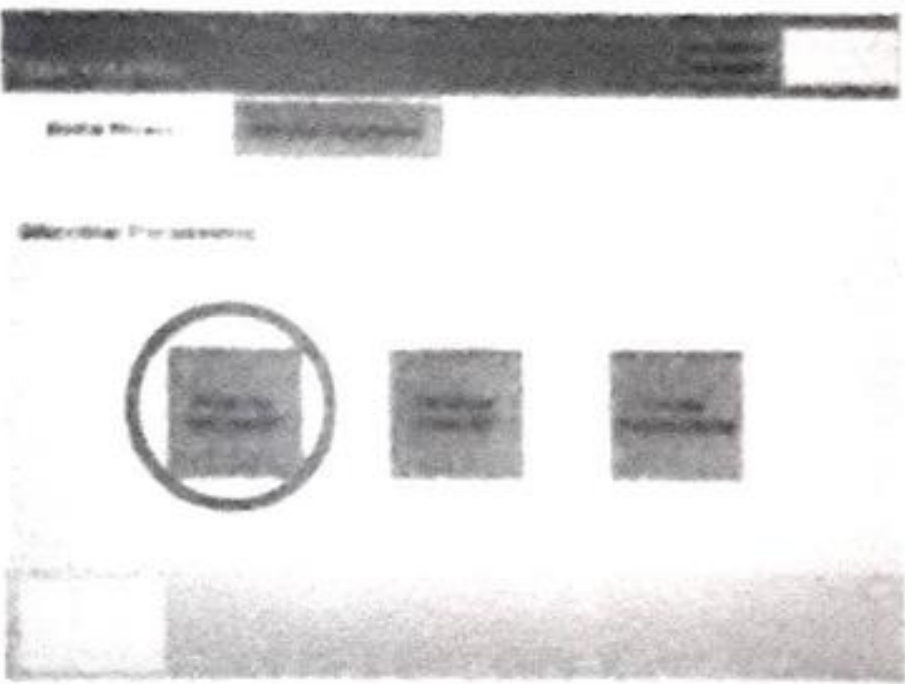
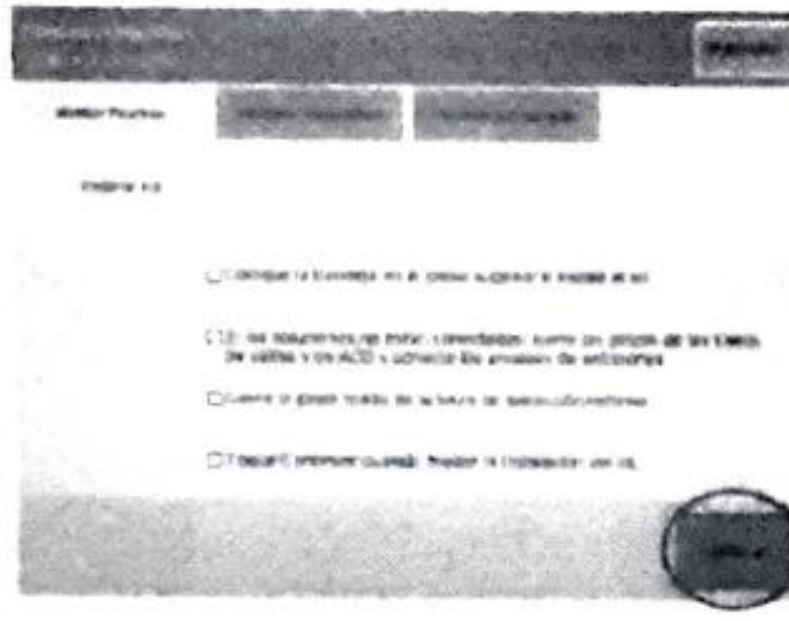
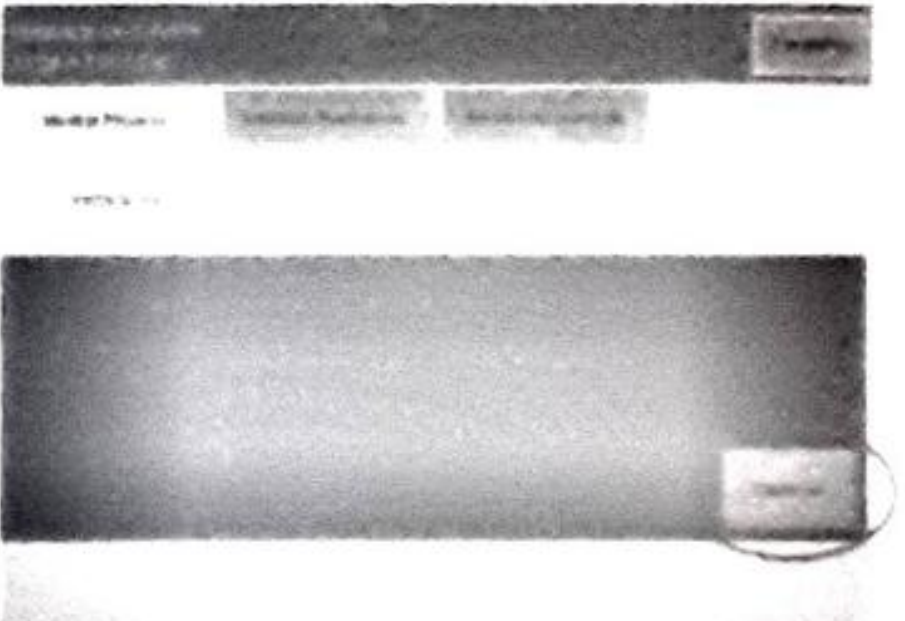
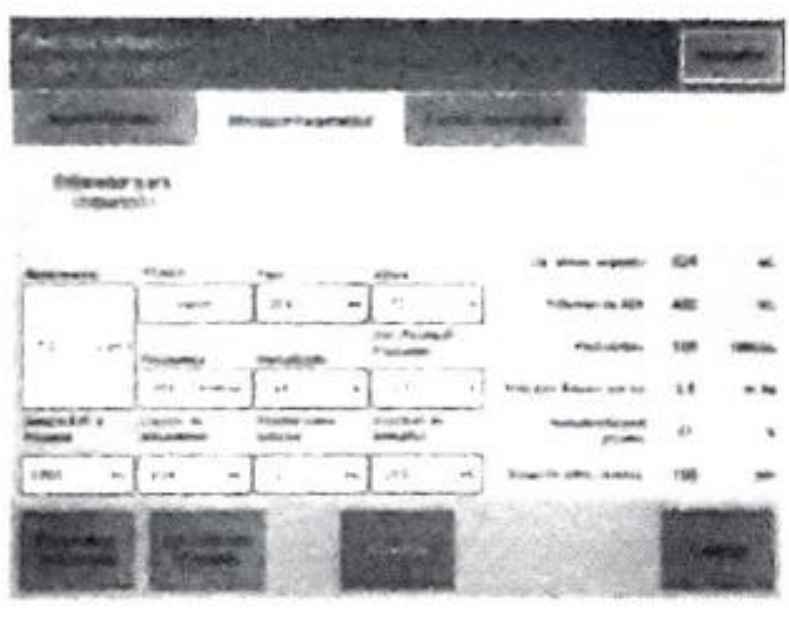
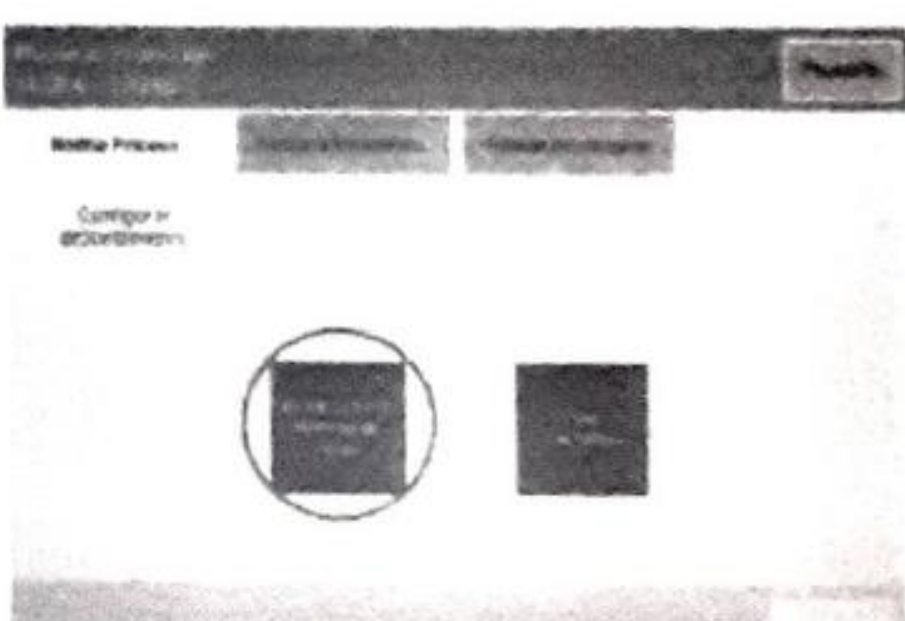
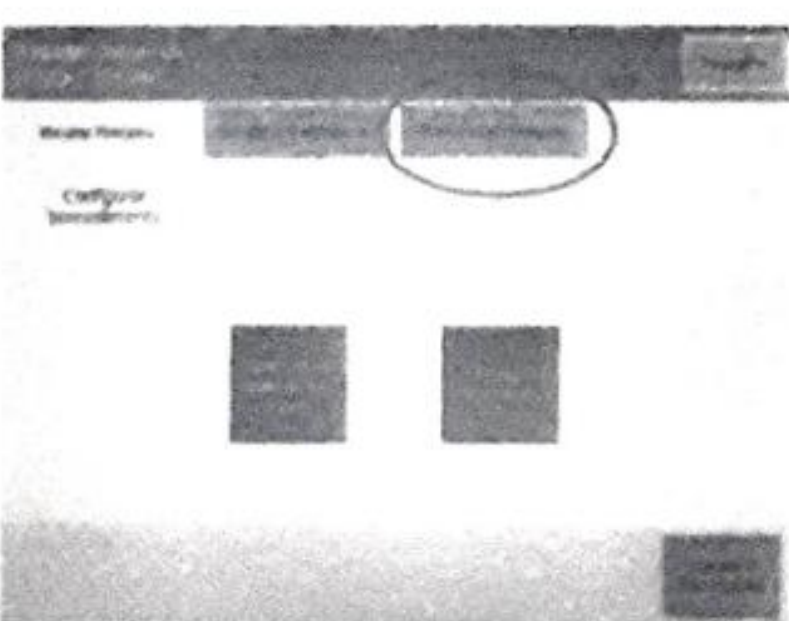
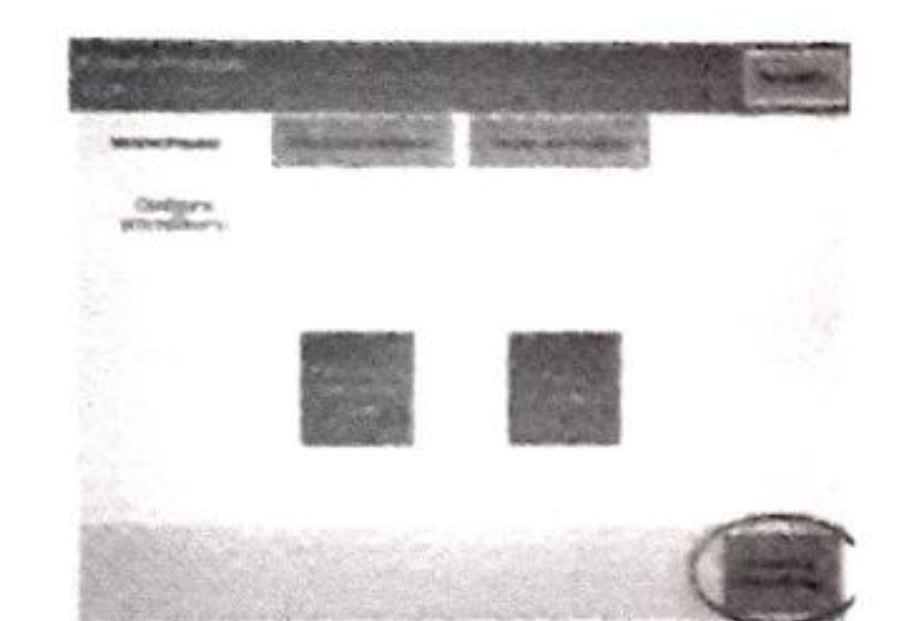
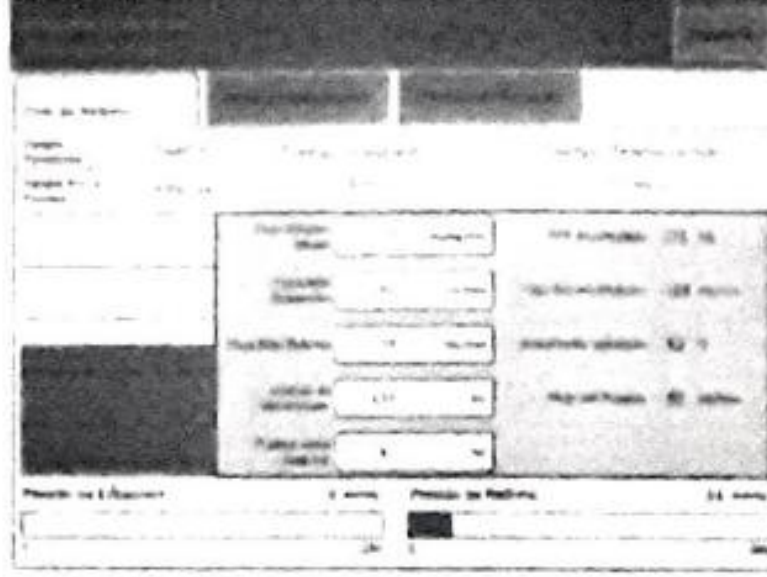
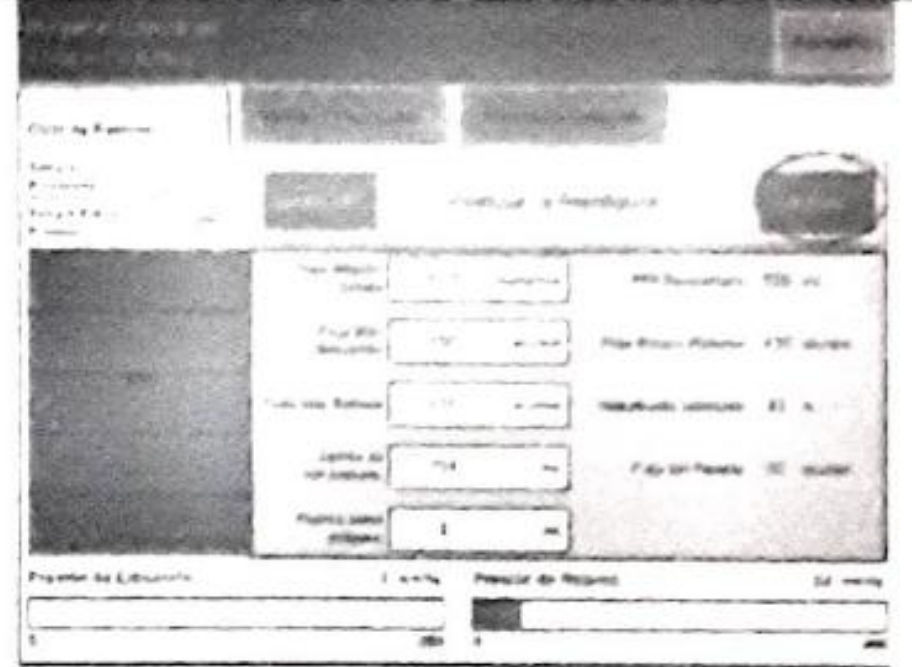
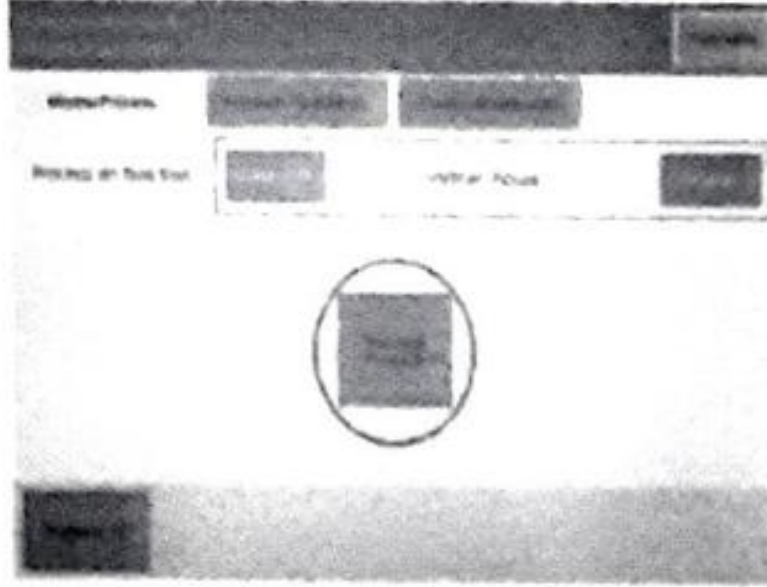
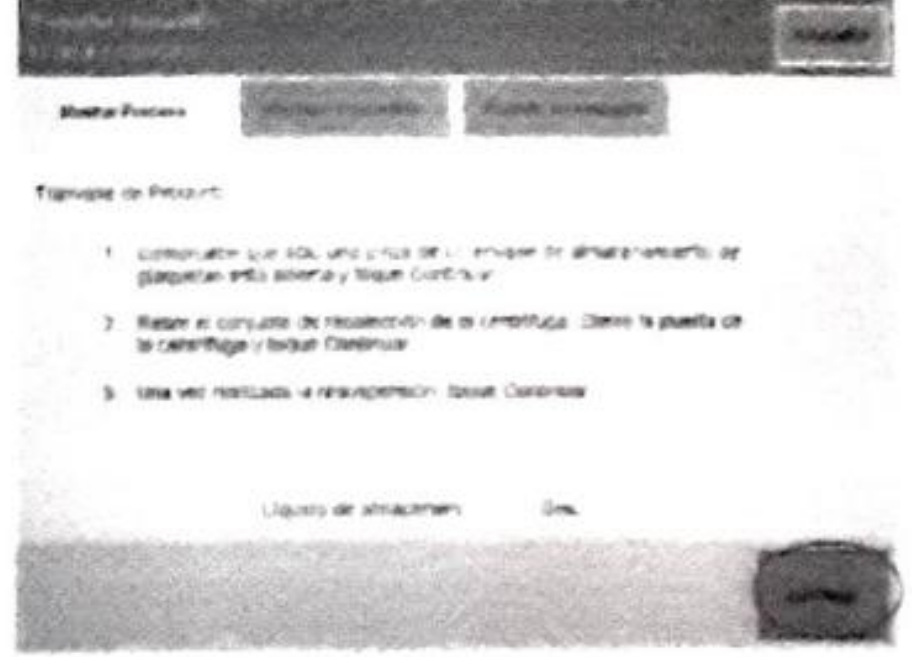
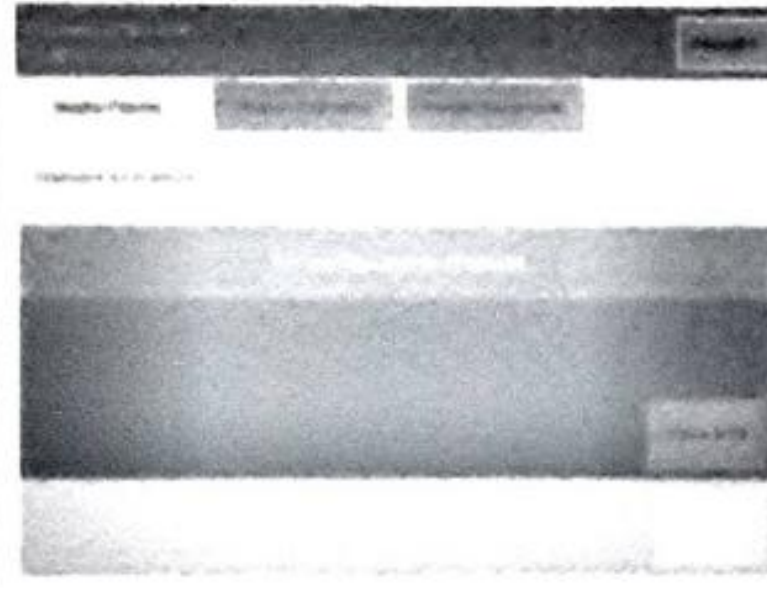


**Ref. Guía Rápida de Utilización Amicus**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> Presione el botón de encendido que está ubicado en la parte frontal del equipo. El equipo hará primero una comprobación de todo el sistema antes que usted pueda instalar el estuche para ser utilizado.</p>                         |     | <p><b>2.</b> Seleccione ahora el botón "Plaquetas unipunción". Luego otra pantalla en la que deberá escoger que para hacer la resuspensión de plaquetas requerirá PAS (Solución Aditiva de Plaquetas) o Plasma.</p>                                                |    |
| <p><b>3.</b> Aparecerá luego esta pantalla. Siga las instrucciones que aparecen en ella y pulse continuar. El equipo hará comprobación de la correcta instalación del estuche.</p>                                                                |  | <p><b>4.</b> Luego pedirá realizar el cebado del kit. Rompa cánulas, bebe las cámaras de cebado hasta la mitad y pulse continuar.</p>                                                                                                                              |  |
| <p><b>5.</b> Mientras se realiza el cebado puede ir ingresando los datos del donante en la pestaña "Introducir parámetros".</p>                                                                                                                   |  | <p><b>6.</b> Al finalizar el cebado, abra el rodillo de extracción retorno y presione el botón de "iniciar cebado manual de la aguja". Si tiene que tomar muestras extras del donante no bebe hasta la aguja sino hasta antes de la Y y luego cierre la llave.</p> |  |
| <p><b>7.</b> Luego del cebado de la aguja aparecerá el botón "Comenzar Recolección". Fije entonces el brazalete en el brazo del donante, ingrese a la pestaña "Presión del manguito", suba la presión y realice en ese momento la flebotomía.</p> |  | <p><b>8.</b> Utilice la bolsa de toma de muestras para verificar el buen flujo del donante, tome muestras de ser necesario, cierre la pinza, abra el rodillo de extracción/retorno, presione la pestaña "Mostrar Proceso" y confirme "Comenzar Recolección"</p>    |  |

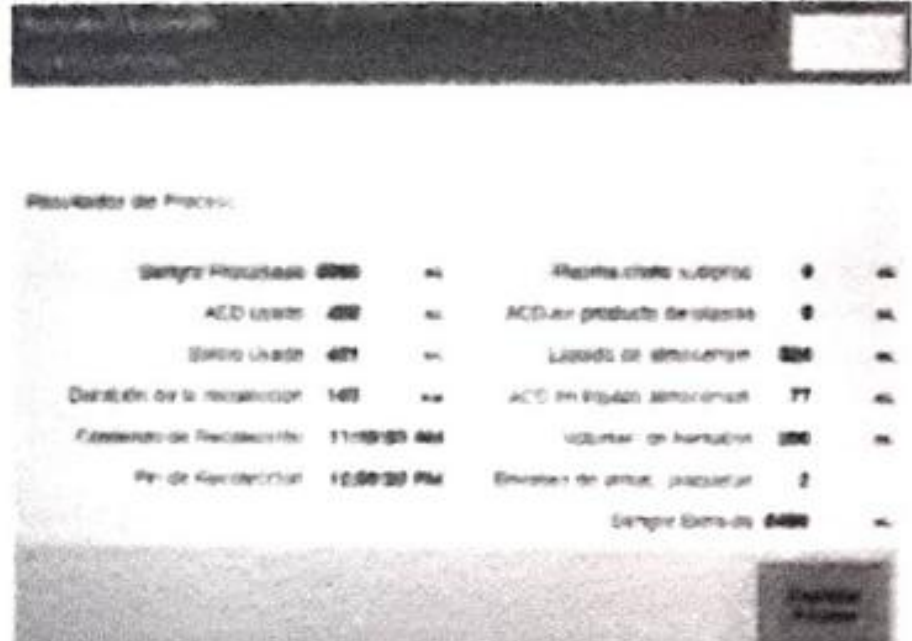

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>9.</b> Durante el proceso de donación podrá ver en la pantalla todos los datos del proceso (tiempo, presión y velocidad de extracción y retorno, porcentaje de plaquetas recolectadas, etc.)</p> |    | <p><b>10.</b> Un minuto antes de finalizar el procedimiento aparecerá la indicación de "Realizar la Reinfusión". Seleccione aceptar y espere a que el equipo lo realice para poder finalizar la donación.</p> |    |
| <p><b>11.</b> Al finalizar la donación aparecerá "Retirar Aguja". Seleccione Aceptar. Retire la aguja del brazo del donante y presione el botón "Transvasar producto".</p>                             |   | <p><b>12.</b> Conecte la solución aditiva para plaquetas, colóquela en la escala frontal derecha y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.</p>                                                    |   |
| <p><b>13.</b> Cuando termine el transvase del producto, se requiere el cierre de todas las llaves de los envases del kit para poder ser retirado. Luego ponga "Retirar el Kit".</p>                    |  | <p><b>14.</b> Aparecerán en la pantalla todos los datos finales del proceso. Copie lo que necesite según el protocolo de la Institución y pulse "Siguiendo Proceso".</p>                                      |  |