



- 1** Separe la bolsa de sangre completa del organizador del equipo de líneas.



- 2** Cierre la pinza de la línea del filtro de hematíes.

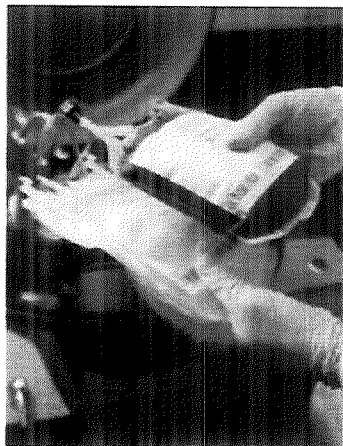


- 3** Coloque el filtro como se indica. Coloque las bolsas y el filtro, que están conectados al organizador, en el alojamiento para las bolsas de componentes sanguíneos.

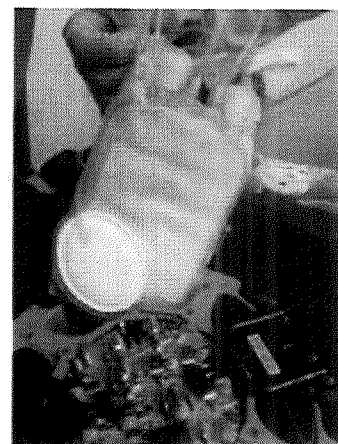


- 4** Inserte la bolsa de sangre completa en la cubeta correspondiente, con la etiqueta orientada hacia usted. Fije la bolsa de sangre completa en los correspondientes soportes de las bolsas.




- 5** Coloque la línea en el sensor de línea y empuje el conector en cruz para que entre en la guía de los canales, directamente encima del sensor de línea.

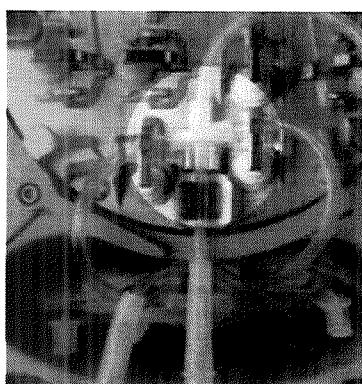


- 6** Pase la línea de leucocitos residuales a través de la correspondiente válvula y las guías de los canales.

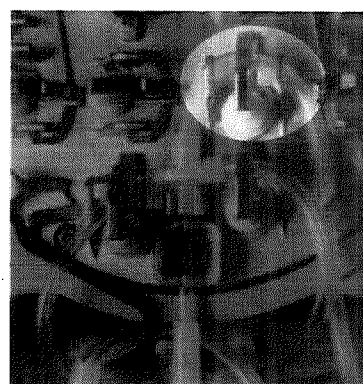


- 7** Pase la línea de plasma a través de la correspondiente válvula y la guía de los canales.

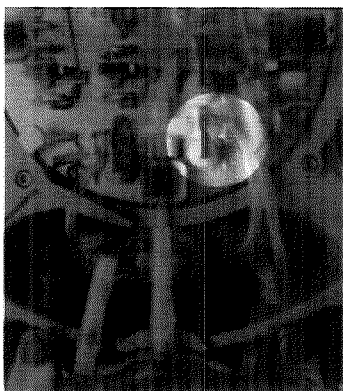

- 8** Pase la línea de plaquetas a través de la correspondiente válvula, las guías de los canales y el enrutador de la línea de plaquetas.


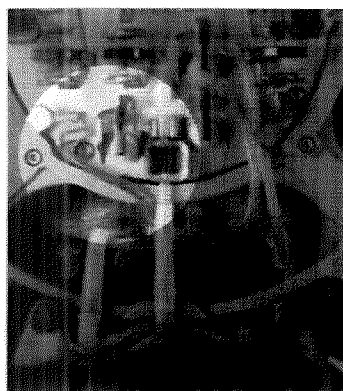


- 9** Asegúrese de que la línea de sangre completa esté totalmente insertada en el sensor de línea.

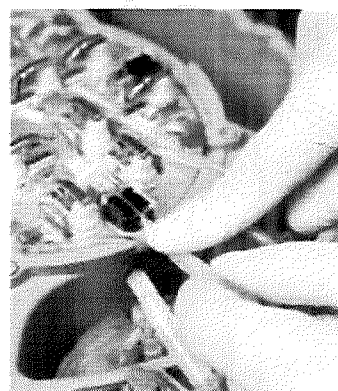

10

Inspeccione visualmente las líneas para asegurarse de que todas las líneas estén bien colocadas en sus respectivas guías de los canales.

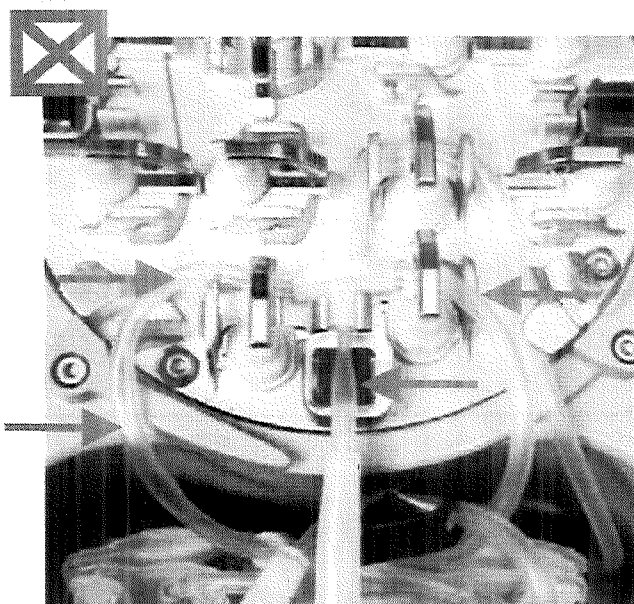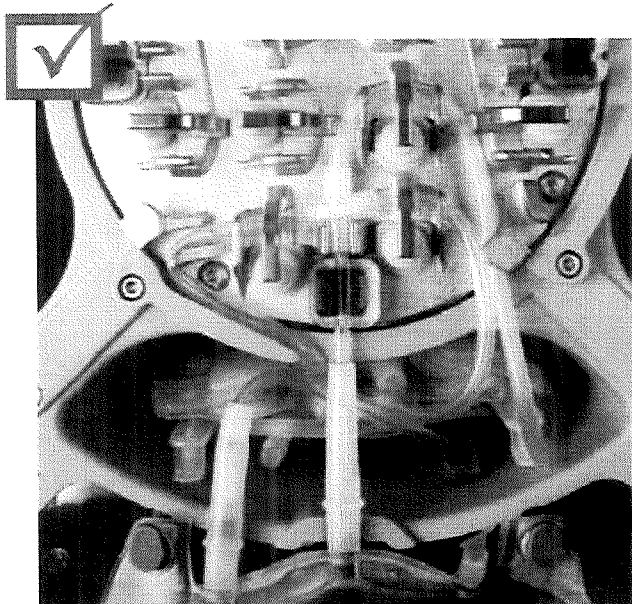

11

Apriete suavemente por ambos lados la bolsa de sangre completa y después cierre la tapa de la cubeta y póngale el seguro, cuidando que los conectores rompibles estén alineados.




12

Continúe con la siguiente cubeta. Repita los pasos del 1 al 12 hasta cargar todas las cubetas. Todas las cubetas vacías deben contener una bolsa de contrapeso antes de ejecutar un procedimiento.


13

Pulse el botón para cerrar válvulas en la pantalla táctil.

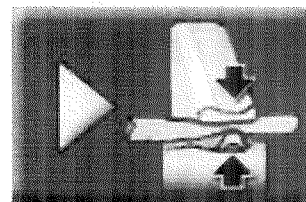

14

Rompa el conector rompible situado entre la bolsa de sangre completa y el sensor de la línea de cada bolsa de sangre.

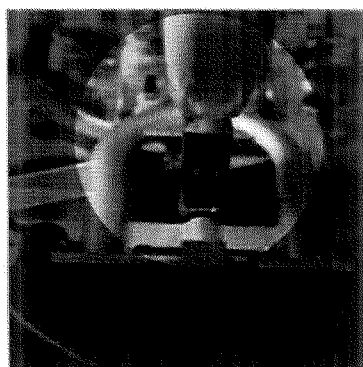

15

Cierre la tapa exterior y póngale el seguro.

